



New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation

Bedienungsanleitung

Copyright

Copyright © 2014 Eppendorf AG, Germany. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

The company reserves the right to change information in this document without notice. Updates to information in this document reflect our commitment to continuing product development and improvement.

Trademarks

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.

Slo-Blo® is a trademark owned and registered by Littlefuse, Inc. Corporation Illinois, USA.

Phillips® is a registered trademark of Phillips Screw Company in the United States and other countries.

Allen® is a registered trademark of Allen Manufacturing Company, USA.

Sticky Pad® is a registered trademark of American Covers, Inc., USA.

Trademarks are not marked in all cases with ™ or ® in this manual.

Eppendorf has attempted to identify the ownership of all trademarks from public records. Any omissions or errors are unintentional.

1 Plattform-Installationsanleitung

1.1 Einleitung

Eppendorf hat kürzlich das Verfahren zum Installieren und Entfernen der Plattform für den Schüttler New Brunswick™ I26/26R geändert. Diese Anleitung soll Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung bieten, da diese von der Beschreibung in der Bedienungsanleitung für Ihren I26/26R abweichen kann.



VORSICHT! Die Bedienung dieses Geräts muss wie in dieser Anleitung beschrieben erfolgen. Bei Nichtbefolgen der Bedienungshinweise können Schäden am Gerät und Körperverletzungen auftreten.

- ▶ Lesen Sie bitte die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
 - ▶ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer gefährlichen Atmosphäre oder mit gefährlichen Materialien, für die es nicht ausgelegt ist.
-

1.2 Für Standard- und leichtere Beladungen

Wenn Sie vorhaben, den Schüttler I26/26R mit Kolben mit einem Volumen von maximal 1 L zu beladen, empfiehlt Eppendorf, die Plattform wie folgt zu installieren.

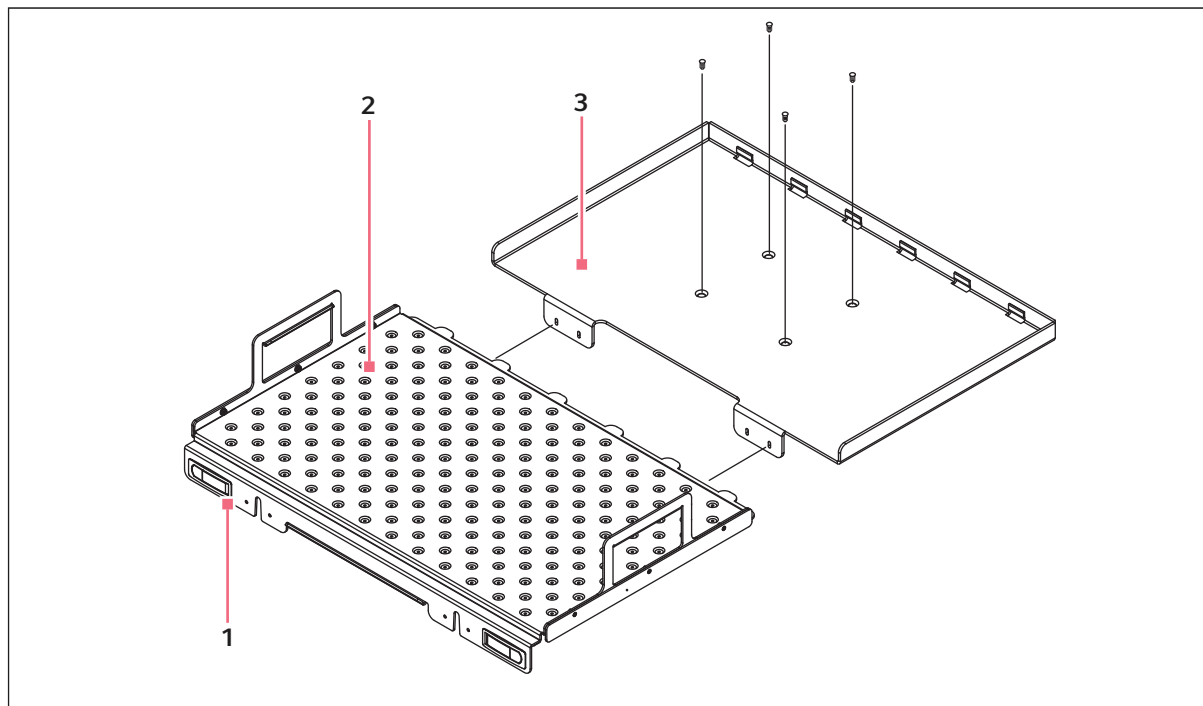


Abb. 1-1: Plattform installieren: Standard- und leichtere Beladungen

1 Riegel

3 Sub-Plattform

2 Plattform

Alle Plattformen lassen sich, wenn sie erst einmal installiert sind, leicht in den Schüttler hineinschieben und herausziehen.

1. Drücken Sie auf die Tasten vorn an der Plattform, damit die Riegel aufschnappen.
2. Ziehen Sie die Plattform an dem Griff vorn in der Mitte heraus, bis sie auf den Türführungsleisten ruht. Die beiden Rastnasen in der Tür verhindern, dass die Plattform aus der Sub-Plattform fällt.
3. Schieben Sie sie wieder hinein und achten Sie darauf, die Riegel sicher zu schließen, bevor Sie den Schüttler wieder in Betrieb nehmen.

1.3 Für schwerere Beladungen

Bei schwereren Beladungen empfiehlt es sich, die Plattform mit Knöpfen an ihrem Platz zu sichern. Die Universalplattform sowie die vorbestückten Plattformen für 2 L und 2,8 L enthalten ein Paket mit folgenden Teilen:

- 2× P0220-9341 – KNOPF, GEWINDEBOHRUNG, 5/16-18, NYLON, SCHWARZ
- 2× S1224-2206 – SCHRAUBDECKEL ALN 5/16-18×1-1/4SCHWARZ
- Unterlegscheiben und Federringe

So befestigen Sie die Knöpfe an der vorhandenen Plattform:

1. Entfernen Sie die Sub-Plattform und drehen Sie sie mit der Oberseite nach unten.
2. Setzen Sie die Schraube wie abgebildet ein (siehe Abb. 1-2 auf S. 5).

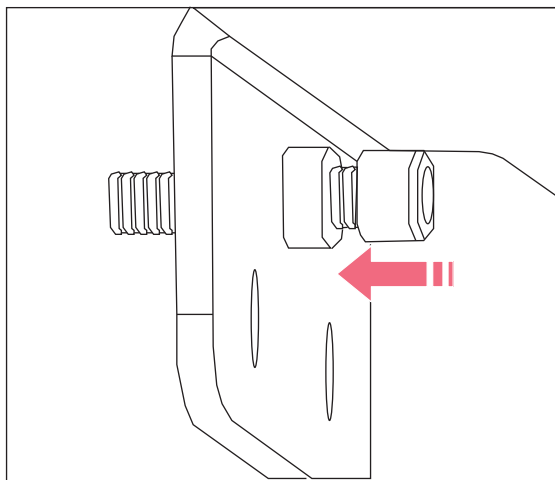


Abb. 1-2: Schraube

3. Installieren Sie die Sub-Plattform wieder.

Plattform-Installationsanleitung

New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation
Deutsch (DE)

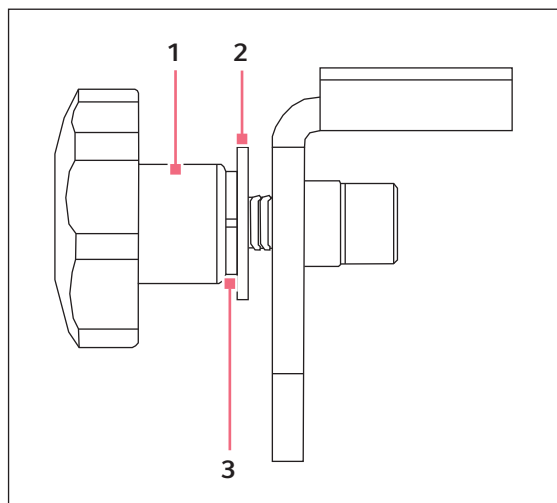


Abb. 1-3: Knopf

1 Knopf

3 Federring

2 Unterlegscheibe

4. Setzen Sie die Plattform mit den seitlichen Griffen (siehe Abb. 1-4 auf S. 7) auf die Führungsleisten in der Fläche der geöffneten Tür.
5. Schieben Sie die Plattform in Richtung Geräterückwand. Richten Sie dabei den Boden der Plattform auf die Oberseite der Sub-Plattform aus und achten Sie darauf, dass die Seiten bündig an die Seiten der Sub-Plattform stoßen.
6. Wenn die Plattform vollständig eingesetzt und auf die Sub-Plattform ausgerichtet ist, installieren Sie wie abgebildet die Unterlegscheibe und den Federring. Schrauben Sie anschließend den abnehmbaren Knopf auf die Schraube und ziehen Sie ihn entsprechend an (siehe Abb. 1-3 auf S. 6).
7. Kontrollieren Sie, dass die Plattform nun an der Sub-Plattform und dem Antrieb gesichert ist.

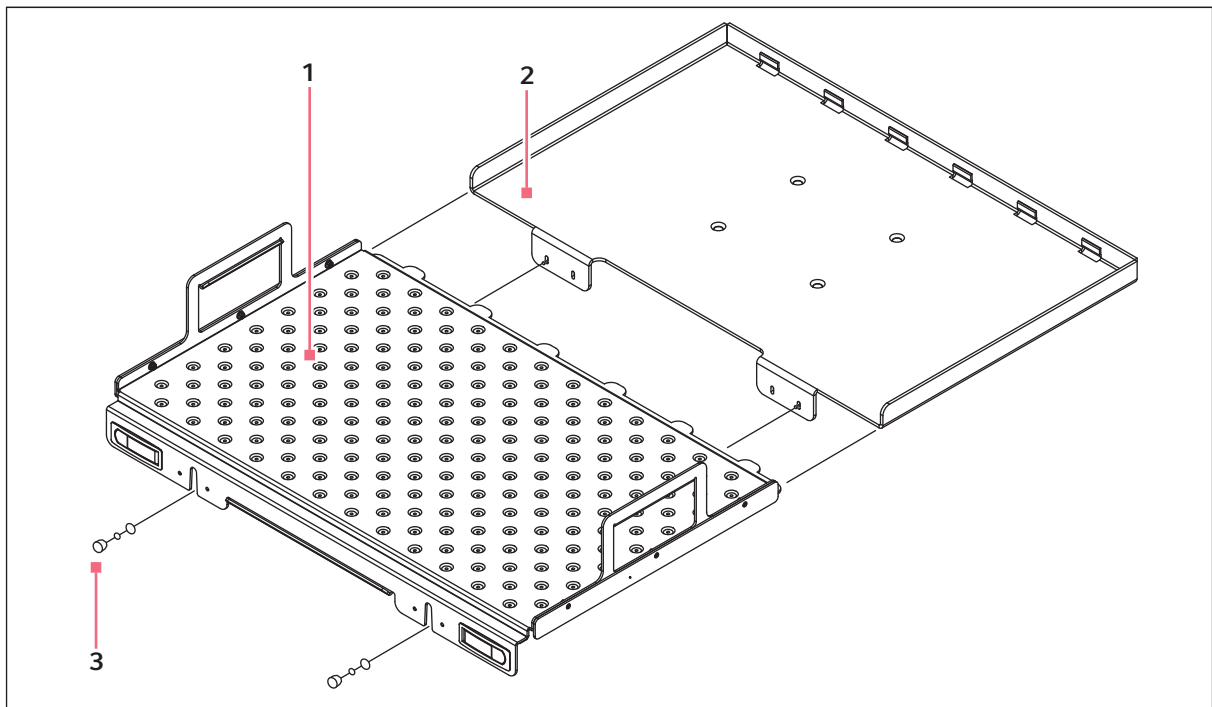


Abb. 1-4: Plattform installieren

1 Plattform

3 Knopf

2 Sub-Plattform

Plattform-Installationsanleitung

New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation
Deutsch (DE)

1.4 Entsorgung

Bei einer Entsorgung des Produkts sind die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in der Europäischen Gemeinschaft:

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird die Entsorgung von elektrischen Geräten durch nationale Vorschriften geregelt, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren.

Nach diesen Vorschriften dürfen alle nach dem 13. August 2005 gelieferten Geräte im Business-to-Business-Bereich, in den dieses Produkt einzuordnen ist, nicht mehr im kommunalen Abfall oder Hausmüll entsorgt werden. Um dies zu dokumentieren, sind sie mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Da sich die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu Land unterscheiden können, bitten wir Sie, sich bei Bedarf bei Ihrem Lieferanten zu informieren.

In Deutschland gilt diese Kennzeichnungspflicht ab dem 23. März 2006. Seit diesem Datum hat der Hersteller für alle ab dem 13. August 2005 gelieferten Geräte eine angemessene Möglichkeit der Rücknahme anzubieten. Bei allen vor dem 13. August 2005 gelieferten Geräten ist der Letztverwender für die ordnungsgemäße Entsorgung zuständig.

Plattform-Installationsanleitung

New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation
Deutsch (DE)

Evaluate Your Manual

Give us your feedback.

www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com