

Keep this rotor instruction manual and the centrifuge manual in the file.

Angle Rotors for Ultracentrifuge

P50AT2

Before using these rotors, please carefully read this instruction manual, "ROTORS, TUBES, BOTTLES AND CAPS", and the centrifuge instruction manual for its efficient operation and for your safety.

Keep this instruction manual for your reference and refer to it as required.

Contents



| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| 1. Specifications | _____ | 1 |
| 2. Applicable Tubes/Bottles | _____ | 2 |
| 3. How to Use | _____ | 3 |
| 4. Maintenance | _____ | 5 |
| 5. Using Cesium Chloride | _____ | 7 |
| 6. Packing List | _____ | 8 |
| 7. Decontamination | _____ | 9 |
| 8. Rotor Retirement | _____ | 9 |


Order no. 5720211107 (P50AT2 with RLM adapter)
Order no. 5720211117 (P50AT2 with Optical adapter)
S999181-18/2025-05


Original instruction manual

Safety Reminder

- Centrifuge rotors rotating at high speed have considerable potential for damage to personal properties if used improperly. For safe and proper use of this rotor, carefully read the centrifuge instruction manual and this rotor instruction manual before use and observe the instructions.

 **WARNING :** and  **CAUTION :** notes are used to call your attention in this manual to prevent personal injury or damage to the rotor and the centrifuge. These notes are defined as follows.

 **WARNING:** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in personal severe injury or possible death.

 **CAUTION:** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in personal injury or severe damage to the instrument.

WARNING

- Never use any material capable of producing flammable or explosive vapors. Your centrifuge and rotor have no explosion-proof construction.
- Your centrifuge and rotor are not designed to confine any sample particles dispersed due to leakage. Therefore, when using toxic or radioactive samples or pathogenic or infectious blood samples, make sure to prepare necessary safety measures at your own responsibility.
- Never exceed the maximum speed of the rotor (mentioned on the rotor). Always reduce rotor speed as instructed in this manual when rotor speed is limited due to sample density or kinds of tubes.
- Check the chemical resistance chart attached the rotor, and do not use any sample inapplicable to the rotor. Using such a sample could corrode the rotor.
- Do not remove the RLM adapter or optical adapter from rotor, or replace it with the adapter for another rotor. The adapter is critical component that detects the over-speed of rotor. If an adapter that is not compatible with the rotor is attached, the rotor could break, resulting in damage to the centrifuge.
- Do not allow the rotor temperature to rise 100°C.: This would cause the material brittle.
- Never sterilize the rotor by autoclaving or boiling. Otherwise the strength of rotor may be significantly decreased.
- If the centrifuge, rotor, or an accessory is contaminated by samples that toxic or radioactive, or blood samples that pathogenic or infectious, be sure to decontaminate the item according to good laboratory procedures and methods.
- If there is a possibility that the centrifuge, rotor, or an accessory is contaminated by samples that might impair human health (for example, samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious), it is your responsibility to sterilize or decontaminate the centrifuge, rotor, or the accessory properly before requesting repairs from an authorized sales or service representative.
- It is your responsibility to sterilize and/or decontaminate the centrifuge, rotor, or parts properly before returning them to an authorized sales or service representative.

CAUTION

- Check the chemical resistance chart attached to the rotor, and do not use any sample inapplicable to the tubes/bottles, the tube adapter, or the cap for the tubes/bottles. Using such a sample could deteriorate them.
- The allowable speed may be lower depending on the density of sample, use of salt-such as cesium chloride or the combination of tubes or bottles and tube adapters and caps. Refer to this instruction manual.
- Always balance the tubes/bottles and samples within the allowable imbalance of rotor, including the caps and the tube adapters. Do not exceed the allowable imbalance. Otherwise the rotor and the centrifuge may be damaged.
- Do not load only one tube or load tubes asymmetrically : Asymmetrically loading may cause imbalance operation and damage the centrifuge and rotor.
- Clean the inside of the drive hole (crown hole) of the rotor and the surface of the drive shaft (crown) of the centrifuge once a month. If the drive hole or the drive shaft is stained or any foreign matter is adhered, the rotor may be improperly installed and come off during operation.
- Use the rotor tubes and bottles within their actual capacities.
- Do not use tubes/bottles that have exceeded their life expectancy. Failure to do so could result in damage of tubes/bottles and the rotor and the centrifuge. The life expectancy of tubes/bottles depends on factors such as the characteristics of samples, speed of the rotor used, and temperature. Always check for deterioration and damage (cracks, deformation, and so on) on tubes/bottles before using them. Do not use the tubes/bottles if you find such a problem.
- Inspect and maintain the rotor after use. If abnormality is observed, do not use it. Contact an authorized sales or service representative.

1. Specifications

1.1 Construction

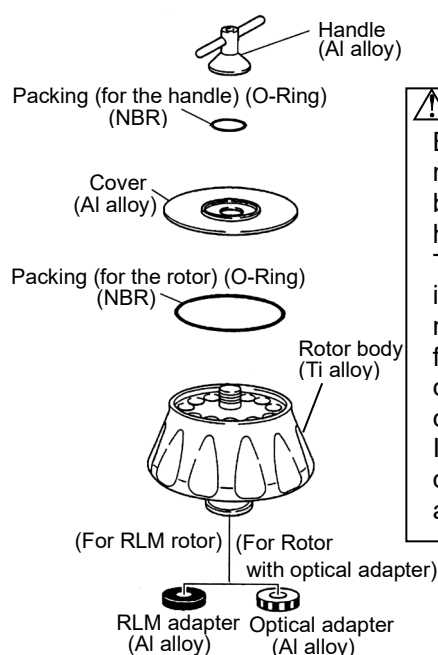


Fig.1-1. Construction of the P50AT2 Rotor

1.2 Specifications

- Max. speed: 50,000 rpm
- Max. RCF: 303,000 xg
- Allowable density at maximum speed of the rotor: 1.2 g/mL
- K Factor at maximum speed of the rotor: 70
- Nominal rotor capacity: 40 mL × 12 tubes = 480 mL
- Material of rotor: Ti alloy
- Material of cover: Al alloy
- Tube size: $\phi 2.6 \times 9.0$ cm
- Weight: 13.0 kg
- Max. diameter: 22.9 cm
- Max. height: 22.2 cm

⚠ CAUTION:

- Do not use a RLM rotor with the centrifuge other than a series of a CP-NX/WX/MX/ α ultracentrifuge.
- Do not use rotor with optical adapter with model 55P and 40P (old type centrifuge).

1.3 Cross-Sectional View of the Rotor

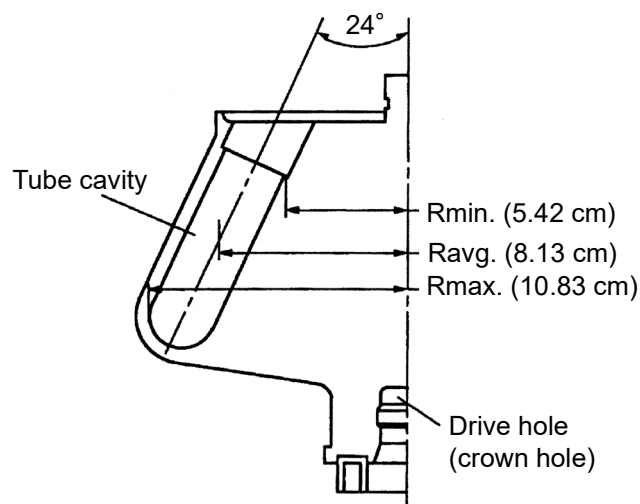


Fig.1-2. Cross-Sectional View of the P50AT2 Rotor

⚠ CAUTION:

Clean the inside of the drive hole (crown hole) of the rotor and the surface of the drive shaft (crown) of the centrifuge once a month. If the drive hole or the drive shaft is stained or any foreign matter is adhered, the rotor may be improperly installed and come off during operation.

1.4 Characteristic of the Rotor

Table 1-1. Characteristic of the P50AT2

| Rotor Speed (rpm) | RCF (xg) | | | K factor |
|-------------------|----------|---------|---------|----------|
| | Rmax. | Ravg. | Rmin. | |
| 10,000 | 12,100 | 9,090 | 6,060 | 1,753 |
| 20,000 | 48,400 | 36,400 | 24,200 | 438 |
| 30,000 | 109,000 | 81,800 | 54,500 | 195 |
| 40,000 | 194,000 | 145,000 | 97,000 | 110 |
| 50,000 | 303,000 | 227,000 | 151,000 | 70 |

※ For detail about K factor, refer to "ROTORS, TUBES, BOTTLES AND CAPS (Part No.S999204)" attached to the centrifuge.

Calculation formula

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times R \times N^2 \text{ (xg)}$$

R: Rotating radius (cm)

N: Speed (rpm)

2. Applicable Tubes/Bottles

2.1 Applicable Tubes/Bottles

Table 2-1. Applicable Tubes/Bottles

| Tubes/Bottles | | | | | Tube adapter Float spacer | | Cap | | Max. speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Nominal capacity (mL) | Order no. | Name | Size (ϕ X L cm) | Actual capacity (mL/tube) | Order no. | Name | Order no. | Name | | |
| 40 | 5720411139 | 40PP tube | 2.6 X 9.0 | 35.7 | --- | --- | 5720411212 | E3-AL cap ass'y | 50,000 | 303,000 |
| | | | | 32.5 | --- | --- | 5720410102 | S-40AL cap ass'y ^{*1} | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411141 | 40PP seal tube | 2.6 X 9.4 | 39.0 | --- | --- | 5720411256 | E space cap | 50,000 | 303,000 |
| | | | | 35.7 | --- | --- | 5720411212 | E3-AL cap ass'y | 40,000 | 194,000 |
| | 5720411146 | 40PE tube | 2.6 X 8.9 | 35.7 | --- | --- | 5720411223 | E4-AL cap ass'y | 40,000 | 194,000 |
| | | | | 31.8 | --- | --- | 5720410102 | S-40AL cap ass'y ^{*1} | 40,000 | 194,000 |
| | | | | 37.0 | --- | --- | 5720411212 | E3-AL cap ass'y | 40,000 | 194,000 |
| | 5720411148 | 40PET tube | 2.6 X 9.0 | 35.7 | --- | --- | 5720411212 | E3-AL cap ass'y | 45,000 | 245,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | 5720411219 | E-SST Lid (B) | 38,000 | 175,000 |
| | 5720411149 | 40TI tube | 2.6 X 9.0 | 24.4 | --- | --- | --- | --- | 38,000 | 175,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | 5720411219 | E-SST Lid (B) | 32,000 | 124,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | --- | --- | 32,000 | 124,000 |
| | 5720411147 | 40SST tube (B) | 2.6 X 9.0 | 24.4 | --- | --- | --- | --- | 32,000 | 124,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | --- | --- | 32,000 | 124,000 |
| 33 | 5720411137 | 33PC thick-walled tube | 2.6 X 8.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | 40,000 | 194,000 |
| | 5720411138 | 33PP thick-walled tube | 2.6 X 8.8 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | 25,000 | 75,700 |
| 30 | 5720411126 | 30PC bottle (C3) ass'y | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411127 | 30PC bottle (B3) ass'y | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 30,000 | 109,000 |
| | 5720411124 | 30PP bottle (C) ass'y ^{*2} | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 41,000 | 204,000 |
| | 5720411123 | 30PP bottle ass'y | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 28,000 | 95,000 |
| | 5720411121 | 30PP seal tube | 2.6 X 7.5 | 31.7 | 5720410250 | E40-30 float spacer | 5720411256 | E space cap | 50,000 | 303,000 |
| 20 | 5720411116 | 20PP seal tube | 2.6 X 5.5 | 22.2 | 5720411341 | E40-20 float spacer | 5720411256 | E space cap | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411020 | 12PP tube | 1.6 X 7.6 | 10.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411208 | C-AL cap ass'y | 40,000 | 183,000 |
| 12 | 5720411021 | 12PE tube | 1.6 X 7.5 | 10.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411208 | C-AL cap ass'y | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411022 | 12PC tube | 1.6 X 7.6 | 10.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411208 | C-AL cap ass'y | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411106 | 12PET tube | 1.6 X 7.6 | 11.4 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411209 | C4-AL cap ass'y | 40,000 | 183,000 |
| | | | | 10.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411208 | C-AL cap ass'y | 34,000 | 132,000 |
| | 5720411023 | 12SST tube | 1.6 X 7.6 | 10.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | 5720411210 | C-SST cap ass'y | 30,000 | 103,000 |
| | | | | 8.3 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| 10 | --- | 10PC bottle (B) ass'y | 1.6 X 8.2 | 8.4 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411024 | 10PC thick-walled tube | 1.6 X 7.7 | 6.3 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411027 | 10PC bottle ass'y | 1.6 X 8.2 | 8.0 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411028 | 10PP bottle ass'y | 1.6 X 8.0 | 8.0 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 35,000 | 140,000 |
| | 5720411025 | 10PP thick-walled tube | 1.6 X 7.6 | 6.5 | 5720411185 | 12A40 adapter | --- | --- | 30,000 | 103,000 |
| | 5720411029 | 6.5PP tube | 1.3 X 6.4 | 5.8 | 5720411184 | 6.5A40 adapter | 5720411201 | B-AL cap ass'y | 40,000 | 173,000 |
| 6.5 | 5720411030 | 6.5PC tube | 1.3 X 6.4 | 5.8 | 5720411184 | 6.5A40 adapter | 5720411201 | B-AL cap ass'y | 40,000 | 173,000 |
| | 5720411080 | 6.5PET tube | 1.3 X 6.4 | 6.2 | 5720411184 | 6.5A40 adapter | 5720411207 | B2-AL cap ass'y | 40,000 | 173,000 |
| 5 | 5720411031 | 5PP tube | 1.3 X 5.2 | 5 | 5720411183 | 5A40 adapter | 5720411201 | B-AL cap ass'y | 40,000 | 181,000 |
| 4.7 | 5720411032 | 4.7PC thick-walled tube | 1.3 X 6.4 | 3.4 | 5720411184 | 6.5A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 173,000 |
| 4 | 5720411033 | 4PP tube | 1.1 X 6.0 | 4 | 5720411182 | 4A40 adapter | 5720411199 | A3-AL cap ass'y | 40,000 | 180,000 |
| 3 | 5720411012 | 3PC tube | 1.3 X 5.1 | 2.5 | 5720411183 | 5A40 adapter | --- | --- | 40,000 | 179,000 |

※The material of tube adapters: Polyacetal

※The material of float spacers: Modified polyphenylene ether

* 1: When using tubes with S-40AL cap ass'y, tubes can not be reused.

* 2: Use a 30PP bottle (C) at a temperature between 4°C and 20°C.



CAUTION :

Chemical resistance and the strength of tubes/bottles varies with speed, temperature, and so on. Before using sample, fill tubes/bottles with water, buffer solution, etc. instead of sample and run them at the intended speed, temperature, and so on to ensure that there is no abnormality.


When using 40PP tubes, 40PP seal tubes, 30PP seal tubes, and 20PP seal tubes, we recommend the purchase of the tube kit, what is the set of tubes and necessary tools. Refer to Chapter 6 for the tube kit.

Refer to "ROTORS, TUBES, BOTTLES AND CAPS (Part No.S999204)" for the cleaning and sterilization of the tubes/bottles.

3. How to Use

How to use tubes/bottles varies in the kinds of tubes/bottles. The brief procedure of tubes/bottles handling is described as follows.

For the detail about handling tubes/bottles, refer to “ROTORS, TUBES, BOTTLES AND CAPS (Part No.S999204)” attached to the centrifuge.

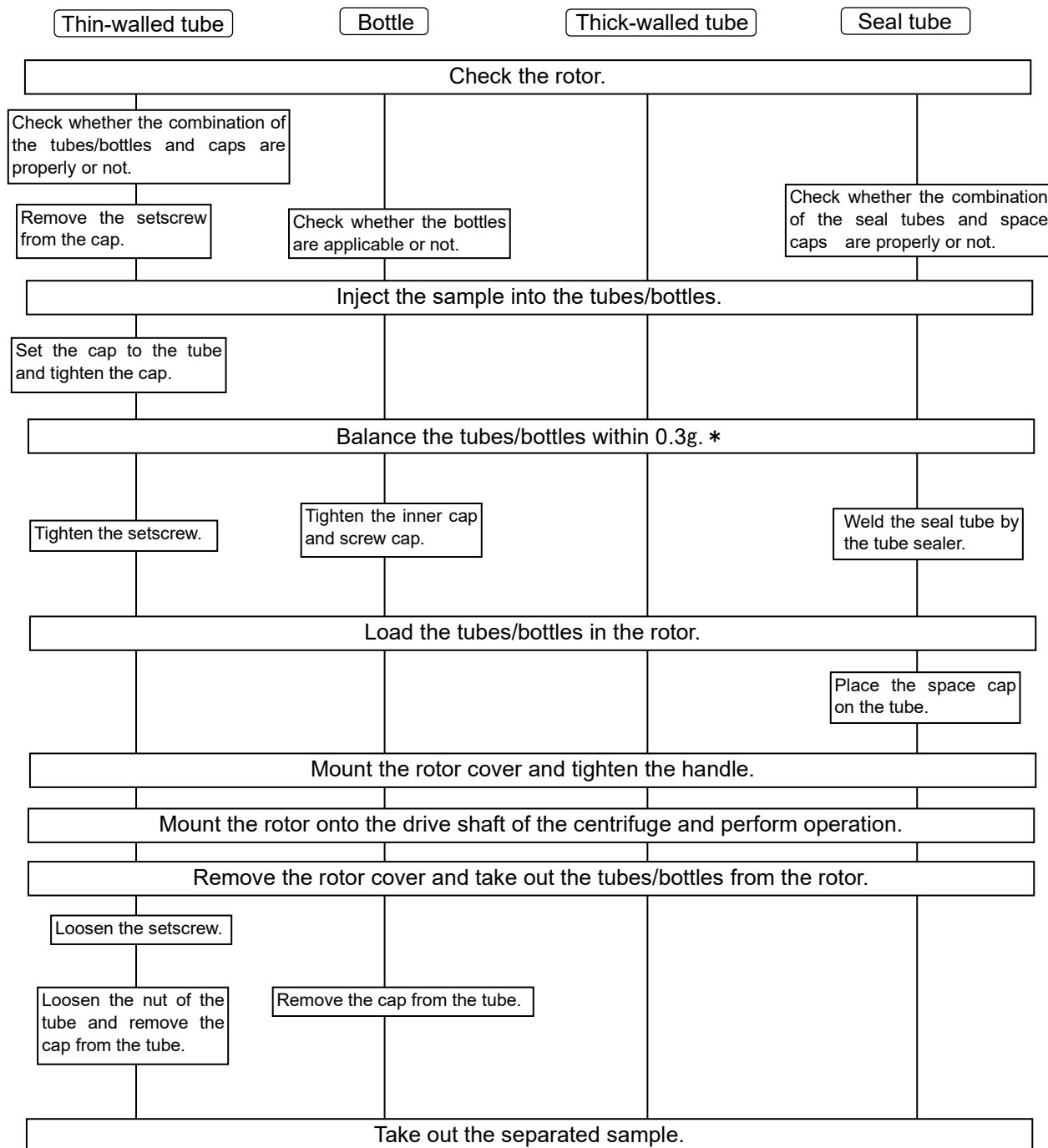

(*) When using CP-NX series, CP-WX series, CP-MX series, or CP- α/β series, approximately even quantities of sample in the tubes are sufficient for balancing, and extremely different sample quantities must be avoided.

(The levels of samples in the tubes should be approximately equal. Their difference should be within 5 mm.)

For some kinds of tubes, if a small quantity of a sample is injected to them, the rotor can not be used at the allowable maximum speed. Tube deformation may occur due to a small quantity of a sample during operation.

=For handling=

● Allowable speed of the rotor

1. To centrifuge a sample of an average density more than 1.2 g/mL.
Determine the allowable speed from the following equation.

$$\text{Allowable speed (rpm)} = 50,000 \text{ (rpm)} \times \sqrt{\frac{1.2 \text{ (g / mL)}}{\text{Mean density of sample (g/mL)}}}$$

2. The allowable speed may be lower depending on the density of a sample when using of salt-such as cesium chloride. Refer to “5. Using Cesium Chloride” for the detail.
3. The allowable speed may be lower depending on the combination of tubes/bottles and tube adapter, etc. Refer to “2. Applicable Tubes/Bottles”

● Tubes/Bottles

Before operation, check whether the combination of tubes/bottles, tube adapter, etc. is properly or not. When using seal tubes and thin-walled tubes, fill them with a sample. When using bottles and thick-walled tubes, use them with optional volume less than net capacity. However, when using the 30PP bottle (C) and the 30PC bottle (C3) at 100,000xg or more, fill it with the sample until the sample level is more than the shoulder line of them.

Tighten the cap securely. Weld the seal tube completely according to the instruction manual of the STF-1, the STF2, or the STF3 tube sealer.

Refer to “2. Applicable Tubes/Bottles” in this manual and “ROTORS, TUBES, BOTTLES AND CAPS (Part No. S999204)”.

● Handling the rotor



WARNING :

- Never exceed the maximum speed of the rotor (mentioned on the rotor). Otherwise, rotor may be damaged and result in damage to the centrifuge.
- Check the chemical resistance chart attached the rotor, and do not use any sample inapplicable to the rotor. Using such a sample could corrode the rotor.



CAUTION :

- Do not load only one tube or load tubes asymmetrically : Asymmetrically loading may cause imbalance operation and damage the centrifuge and rotor.
- Balance the tubes/bottles and the samples including the caps and the tube adapters within the allowable imbalance of the rotor.
Do not exceed the allowable imbalance. Otherwise, the centrifuge or the rotor may be damaged due to excessive imbalance operation.
- If foreign matter adheres to the rotor, wipe it off promptly. Otherwise, the rotor may be corroded.
- Be sure to attach the rotor cover to the rotor body and tighten the handle securely.
Tightening the handle insufficiently or removing the handle from the rotor can cause the rotor cover to come off. And it may result in the damage to the centrifuge and the rotor.
- Inspect and maintain the rotor after use. If abnormality is observed, do not use it.
Contact an authorized sales or service representative.

● Sample limitation



WARNING :

Never use any material capable of producing flammable or explosive vapors.
Your centrifuge and rotor are not designed to confine any sample particles dispersed due to leakage. Therefore, when using toxic or radioactive samples or pathogenic or infectious blood samples, make sure to prepare necessary safety measures at your own responsibility.

● Rotor life management of the rotor with optical adapter



CAUTION :

Each time the rotor with optical adapter is used, be sure to enter the results in the “rotor log book”. Failure to do so will disable management of the life of rotor.
No entry is need for RLM rotor.

● RLM adapter and Optical adapter

⚠ WARNING :

- Do not remove the RLM adapter or optical adapter from rotor, or replace it with the adapter for another rotor. The adapter is a critical component that detects the over-speed of rotor : If an adapter that is compatible with the rotor is attached, the rotor could break, resulting in damage to the ultracentrifuge.

⚠ CAUTION :

- Do not bring the RLM adapter near a magnet, or scratch it: Doing so will erase the memory stored in adapter, and make the rotor unusable. To prevent the adapter from being scratched, store the rotor with RLM adapter, using the stand provided with the rotor (rotor stand for protecting adapter). If the adapter is scratched, immediately stop using rotor and contact an authorized sales or service representative.
- Take great care not to scratch the optical adapter: Any scratch on adapter will make the rotor unusable. To prevent the adapter from being scratched, store the rotor with optical adapter, using the stand provided with the rotor (rotor stand for protecting adapter). If the adapter is scratched, immediately stop using rotor and contact an authorized sales or service representative.
- If foreign matter adheres to the RLM adapter or optical adapter, wipe it off promptly. Otherwise, the RLM adapter or optical adapter may be corroded.

4. Maintenance


● Maintenance of the rotor

⚠ WARNING :

Do not allow the rotor temperature to rise over 100°C. Otherwise, the rotor can be brittle.

⚠ CAUTION :

Use a neutral detergent having a pH between 5 and 9. Otherwise, the rotor can be corroded.

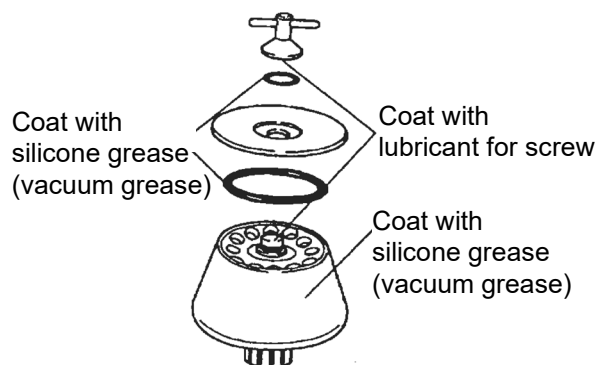

Wash the rotor with tap water or a dilute solution of neutral detergent and rinse it out with distilled water. Turn the rotor upside down with the rotor removed to dry it well. Check the rotor is completely dried and then put the light coat of silicone grease (vacuum grease) on the surface of the rotor, the light coat of lubricant for screw on the thread portion, the light coat of silicone grease (vacuum grease) on the packing, Store them in a dry place. If foreign matter adheres to the rotor, soak the rotor in warm water in one or two hours and remove foreign matter with a soft brush etc. Use a neutral detergent having a pH between 5 and 9. If you cannot remove it, contact an authorized sales or service representative.

● Sterilizing the rotor

⚠ WARNING :

Never sterilize the rotor by autoclaving or boiling. Otherwise the strength of rotor may be significantly decreased.

⚠ CAUTION :

Do not sterilize the tube adapters made of plastic by autoclaving or boiling. Otherwise the tube adapters may be deformed. Such the tube adapters can not be used.

Sterilize the rotor according to either gas sterilization method (ethylene oxide or formaldehyde) or chemical sterilization method (70% ethanol, 3% hydrogen peroxide, 3% formalin).

Sterilize the tube adapters made of plastic according to either gas sterilization method (ethylene oxide or formaldehyde) or chemical sterilization method (70% ethanol, 3% hydrogen peroxide, 3% formalin).

* Do not dip the rotor and the tube adapters in the formalin (3%) solution more than 2 hours.

● Inspecting the rotor

Check the rotor after every run as follows.

- The thread portion is worn. Contact an authorized sales or service representative.
- The tube cavity is corroded. Contact an authorized sales or service representative.
- The packing is deteriorated. Replace it with the new one.
- The adapter is stained. Wipe it out with a soft cloth.

Check the rotor once a month as follows.

- The inside of drive hole (crown hole) is stained. . . . Wipe it out with a soft cloth dampened with water.



CAUTION :

Clean the inside of the drive hole (crown hole) of the rotor and the surface of the drive shaft (crown) of the centrifuge once a month. If the drive hole or the drive shaft is stained or any foreign matter is adhered, the rotor may be improperly installed and come off during operation.

● Life of the rotor



WARNING :

Do not use rotors that have exceeded their lifetime; to do so might cause the rotor failure and the centrifuge might be damaged.

While using rotor repeatedly, its strength decreases gradually due to fatigue and creep of material, by which the rotor life is determined.

This rotor must not be used when they reached 5,000 operation times or 10,000 accumulated hours. If you use the RLM rotor at a speed lower than its maximum permissible speed, the life of the RLM rotor will be prolonged automatically by calculating from the strength of the rotor material.

5. Using Cesium Chloride

The cesium chloride (CsCl) solution is frequently used as a density gradient medium, but if the CsCl solution with a high density is used, it may saturate during the rotation of the rotor depending on the rotation condition which may cause CsCl crystals to be educed. Educated crystals have a high density (approx. 4g/mL) and apply an excessive load to the rotor, which is very dangerous.

The crystallization will also greatly affect the density gradient of the CsCl solution and separation status of the sample. Therefore, always use a solution which will not crystallize the allowable speed.

Fig.5-1 shows the relationship between the maximum allowable density and the speed at which cesium chloride does not crystallize in the condition that standard tube is filled with the cesium chloride solution. In this diagram, crystallization will occur above the curves.

Be sure to select the density of the cesium chloride solution and the rotor speed at which cesium chloride does not crystallize. The curve in this diagram varies in temperature etc. Before actual operation, centrifuge the cesium chloride solution with the same density to ensure that crystallization will not occur.

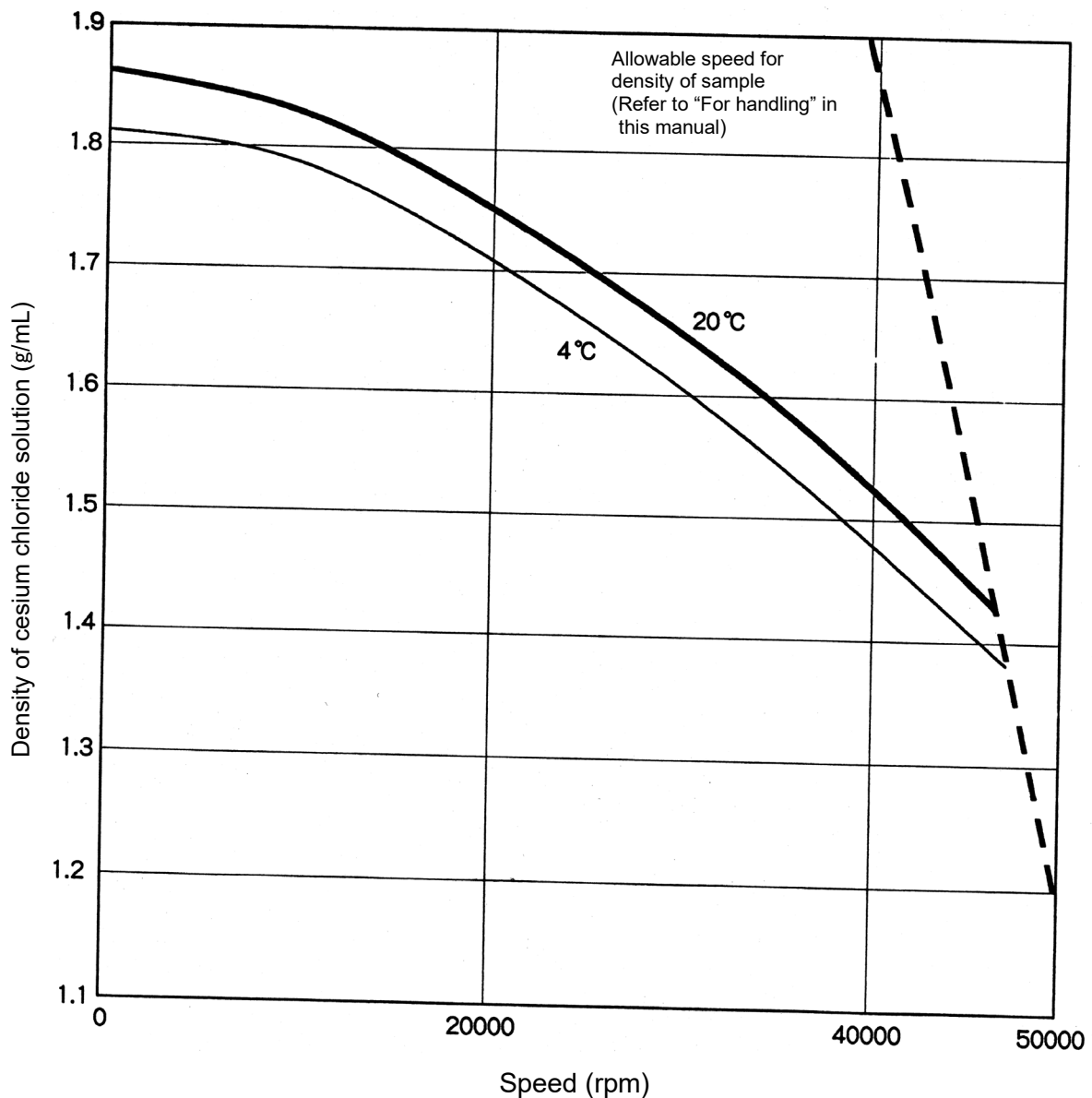


Fig.5-1 Relationship Between Density of Cesium Chloride and Speed

6. Packing List

Check the parts and accessories of rotor when receiving the rotor.
Contact an authorized sales or service representative when the need arises.

| No. | Name | Qty | Remark | Order no. (Qty) | No. | Name | Qty | Order no. (Qty) |
|-----|--------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------|
| ① | Rotor | 1 | | | ⑩ | Rotor stand | 1 | 5720410232 (1) |
| ② | Handle | 1*1 | | | ⑪ | Lubricant for screw | 1 | 5720411230 (1) |
| ③ | Packing (for the handle) (O-Ring) | 1*1 | | 5720410154 (5) | ⑫ | Silicone grease (vacuum grease) | 1 | 5720850317 (1) |
| ④ | Cover | 1*1 | | | ⑬ | Tool box (C) | 1 | |
| ⑤ | Packing (for the rotor) (O-Ring) | 1*1 | | 5720410160 (3) | ⑭ | | | |
| ⑥ | | | | | ⑮ | | | |
| ⑦ | | | | | ⑯ | | | |
| ⑧ | Packing (for the handle) (O-Ring) | 2 | For spare | | ⑰ | Rotor log book *2 | 1 | 5720411287 (1) |
| ⑨ | Packing (for the rotor) (O-Ring) | 2 | For spare | | ⑱ | Instruction manual | 1 | |

*1: the quantities of the parts that are mounted to the rotor

*2: The "rotor log book" is not included in RLM rotor.

Tubes are not included in this rotor. Please purchase the applicable tubes.

When using 40PP tubes, 40PP seal tubes, 30PP seal tubes, and 20PP seal tubes, we recommend the purchase of under-mentioned tube kit, what is the set of tubes and necessary tools.

●40PP tube kit (B) (Order no.5720411144)

(component)

| | | | |
|------------|-----------------------------------|----|----------------|
| 5720411139 | 40PP tube | 2 | (50 pcs./pack) |
| 5720411212 | E3-AL Cap ass'y | 12 | |
| --- | Packing (for the cap) (O-Ring) | 2 | (10 pcs./pack) |
| 5720411365 | Tube vise(E) | 1 | |
| 5720411282 | Torque wrench | 1 | |
| 5720411283 | Socket adaptor | 1 | |
| 5720411410 | 17mm socket | 1 | |
| 5720411267 | Tube setter | 1 | |

●40PP seal tube kit (A) (Order no.5720411143)

(component)

| | | | |
|------------|----------------|----|----------------|
| 5720411141 | 40PP seal tube | 2 | (50 pcs./pack) |
| 5720411256 | E-space cap | 12 | |
| 5720411232 | Tube setter | 1 | |

※When using 40PP seal tubes, Tube sealer (STF3,STF2,STF-1) and Tube rack (E) (Order no.5720410008) are needed.

●30PP seal tube kit (Order no.5720411122)

(component)

| | | | |
|------------|---------------------|---|----------------|
| 5720411121 | 30PP seal tube | 2 | (50 pcs./pack) |
| 5720411256 | E- space cap | 4 | |
| 5720410250 | E40-30 float spacer | 4 | |
| 5720411232 | Tube setter | 1 | |
| 5720411267 | Tube setter (B) | 1 | |


※ When using 30PP seal tubes, Tube sealer (STF3,STF2) and Tube rack (E3) (Order no. 5720410015) are needed.

●20PP seal tube kit (Order no.5720411117)

(component)

| | | | |
|------------|---------------------|---|----------------|
| 5720411116 | 20PP seal tube | 2 | (50 pcs./pack) |
| 5720411256 | E- space cap | 4 | |
| 5720411341 | E40-20 float spacer | 4 | |
| 5720411232 | Tube setter | 1 | |
| 5720411267 | Tube setter (B) | 1 | |

※ When using 20PP seal tubes, Tube sealer (STF3,STF2) and Tube rack (E4) (Order no. 5720410016) are needed.

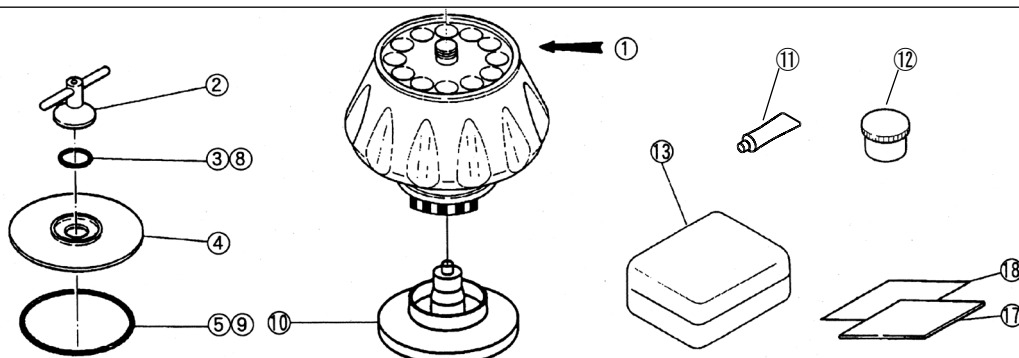

7. Decontamination

⚠ WARNING:

- If the centrifuge, rotor or an accessory is contaminated by samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious, be sure to decontaminate the item according to good laboratory procedures and methods.
- If there is a possibility that the rotor or an accessory is contaminated by samples that might impair human health (for example, samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious), it is your responsibility to sterilize or decontaminate the rotor or the accessory properly before requesting repairs from an authorized sales or service representative. Note that we cannot repair the centrifuge, rotor or the accessory unless sterilization or decontamination is completed.
- It is your responsibility to sterilize and/or decontaminate the rotor or parts properly before returning them to an authorized sales or service representative. In such cases, copy the attached decontamination sheet and fill out the copied sheet, then attach it to the item to be returned. We may ask you about the treatment for the rotor or parts if the decontamination is checked and judged as insufficient by us. It is your responsibility to bear the cost of sterilization or decontamination. Note that we cannot repair or inspect the rotor or the accessory unless sterilization or decontamination is completed.

8. Rotor Retirement

After many years of use, there will be inevitably some corrosion or stress corrosion. At some points, the combination of such damage and metal fatigue could make the rotor vulnerable to a failure. Although a rotor may appear to be in a good condition, you should follow the rotor retirement recommendation shown below.

| Rotor | Material | Retire After Years |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Angle rotor | Titanium alloy | 12 |
| Vertical rotor | Aluminum alloy | 10 |
| Swing rotor | Titanium alloy Aluminum alloy | 10 |
| Zonal rotor | Titanium alloy | 10 |
| Continuous flow rotor | Titanium alloy | 10 |

MEMO

Eppendorf Himaс Technologies Co., Ltd.

1060, Takeda, Hitachinaka City
Ibaraki Pref., 312-8502 Japan

この取扱説明書は、遠心機本体取扱説明書と一緒にファイルに入れて大切に保存してください。

超遠心機用アングルロータ

P 5 0 A T 2

- ・ご使用前に必ずこの取扱説明書と「ロータ・チューブ・ボトル・キャップ取扱説明書」、超遠心機本体の取扱説明書をあわせてよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保存してください。

—目次—

1. ロータの仕様 1
2. チューブ・ボトルについて 2
3. ロータの使用法 3
4. ロータの手入れ 6
5. 塩化セシウムを使用する場合の注意 . . 7
6. 部品・付属品一覧 8
7. 汚染除去について 9
8. ロータのリタイアメント 9
9. ロータの廃棄について 9

Order no. 5720211118 (RLM アダプタ式ロータ)

Order no. 5720211117 (光学アダプタ式ロータ)

S999181-18/2025-05

このマニュアルの内容はすべて著作権により保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright © 2025 Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

この取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

△マークについて

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐため、△マークをつけて注意を促すようにしております。

表示の意味は次のようになっていますので、内容を理解の上、本文をお読みください。

△ 警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項を示しています。

△ 注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される事項を示しています。

△安全にご使用いただくために

遠心機のロータは高速回転しますので、取り扱いの誤りにより装置に多大な損害を与える場合があります。安全にご使用いただくために、ご使用前に遠心機本体およびロータの取扱説明書をよくお読みになり、次のことに十分注意を払ってください。

△ 警告


- 引火性、爆発性のある試料は使用しないでください。本ロータおよび遠心機は防爆構造になっていません。
- 有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料を分離する場合は、使用者の責任において必要な安全対策を講じた上で行ってください。一般に遠心機およびロータは、遠心中の液漏れや万一の事故などによる試料の飛散を防ぐ構造になっていませんのでご注意ください。
- ロータの最高回転速度（ロータ表面に刻印してあります）を超えての使用はしないでください。ロータの破壊による遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。
- ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照してロータの材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。ロータの腐食の原因となる場合があります。
- RLMアダプタ、光学アダプタをロータから取り外したり、他のロータのアダプタと交換しないでください。アダプタはロータのオーバースピードを監視する重要な部品で、ロータに適合しないアダプタを取りつけますと、ロータの破壊による遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。
- ロータは100°C以上に温度を上げないでください。ロータの強度が低下し、大変危険です。
- ロータのオートクレーブ、煮沸滅菌は、絶対に行わないでください。ロータの強度が低下し、大変危険です。
- 装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には、必ず使用者の定める適切な汚染除去の手段に従って処理してください。
- お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当に修理を依頼される場合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
- 装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。

△ 注意

- ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照してチューブ/ボトル、チューブアダプタ、チューブ/ボトル用キャップ等の材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。これらの材料劣化を引き起こします。
- 許容回転速度は、試料の密度、塩化セシウムなどの塩類の使用、またはチューブやボトル・チューブアダプタ・キャップの組み合わせによって制限されることがありますので、この取扱説明書を参照してください。
- チューブ・ボトルと試料は、キャップ・チューブアダプタを含めてロータの許容インバランス量以内にバランスをとってください。許容量を超えたインバランス量で運転すると、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。
- 1本、あるいは、回転軸に対して非対称に、チューブ、ボトルをセットしないでください。過大なインバランス運転となり、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。
- ロータの回転軸挿入穴（クラウン穴）と遠心機の回転軸（クラウン）の表面を1回/月の割合で清掃して下さい。回転軸挿入穴や回転軸に汚れや付着物があると、ロータの回転軸への取付けが不完全となり、回転中にロータの離脱を引き起こす恐れがあります。
- チューブ・ボトルは、規定された実容量以下の液量で使用してください。
- 寿命に達したチューブ・ボトルは使用しないでください。回転中にチューブ・ボトルが破損し、ロータや遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。チューブ・ボトルの寿命は、使用する試料の性質、使用するロータの回転速度、温度など使用する条件により左右されます。使用前に、チューブ・ボトルが変形していないか傷やひびが入っていないか等をよく確認し、異常が認められる場合は、使用しないでください。
- ロータは使用ごとに手入れと点検を行ってください。異常な点がありましたら、ロータの使用を中止し、お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当までご連絡ください。

1. ロータの仕様

1.1 構成

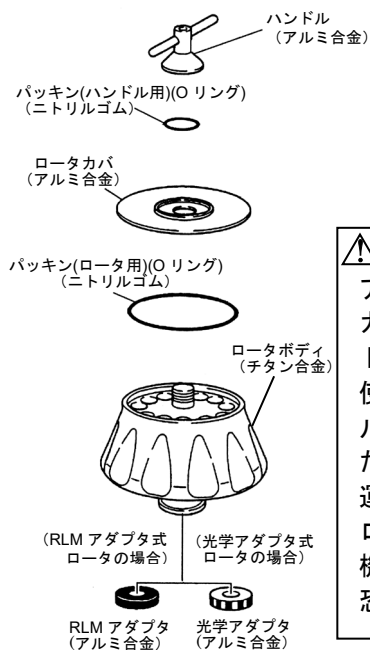

注意：
 アングルロータは、ロータカバを必ず取り付け、ハンドルをしっかり締めつけて使用してください。ハンドルの締め付けが不足していたりハンドルを取り外して運転しますと、回転中にロータカバが離脱し、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。

図 1-1 P50AT2 の構成図

1.2 仕様

- ・ 最高回転速度 50,000rpm
- ・ 最大遠心加速度 303,000 × g
- ・ 最高回転速度におけるサンプルの許容密度 1.2g/mL
- ・ Kファクタ 70 (最高回転速度時)
- ・ ロータ容量 (呼称容量) . . . 40mL × 12 本 = 480mL
- ・ ロータ材質 チタン合金
- ・ ロータカバ材質 アルミ合金
- ・ チューブ寸法 φ2.6 × 9.0cm
- ・ ロータ質量 13.0kg
- ・ 最大直径 22.9cm
- ・ 最大高さ 22.2cm

注意： RLM アダプタ式ロータは、CP-NX シリーズ、CP-WX シリーズ、CP-MX シリーズ、および CP-α シリーズ遠心機以外での使用を禁止します。光学アダプタ式ロータは、55P、40P 形遠心機 (旧形) での使用を禁止します。

1.3 断面図

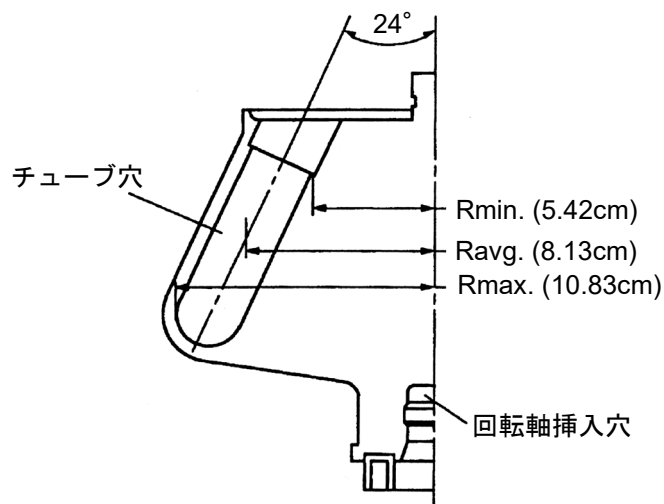


図 1-2 P50AT2 の断面図

注意： ロータの回転軸挿入穴 (クラウン穴) と遠心機の回転軸 (クラウン) の表面を 1 回 / 月の割合で清掃して下さい。回転軸挿入穴や回転軸に汚れや付着物があると、ロータの回転軸への取付けが不完全となり、回転中にロータの離脱を引き起こす恐れがあります。

1.4 分離特性

表 1-1 P50AT2 分離特性表

| 回転速度 (rpm) | 遠心加速度 (×g) | | | Kファクタ |
|------------|------------|---------|---------|-------|
| | Rmax. | Ravg. | Rmin. | |
| 10,000 | 12,100 | 9,090 | 6,060 | 1,753 |
| 20,000 | 48,400 | 36,400 | 24,200 | 438 |
| 30,000 | 109,000 | 81,800 | 54,500 | 195 |
| 40,000 | 194,000 | 145,000 | 97,000 | 110 |
| 50,000 | 303,000 | 227,000 | 151,000 | 70 |

※Kファクタについては、遠心機本体に付属している「ロータ・チューブ・ボトル・キャップ取扱説明書(パーツ No. 999966)」を参照ください。

回転速度と遠心加速度(RCF)の関係

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times R \times N^2 (\times g)$$

R: 回転半径 (cm)

N: 回転速度 (rpm)

2. チューブ・ボトルについて

2.1 チューブ・ボトル一覧

表 2-1 チューブ・ボトル一覧

| 呼称 容量 (mL) | チューブ・ボトル | | | | チューブアダプタ フロートスペーサ | | キャップ | | 最高 回転速度 (rpm) | 最大遠心 加速度 (xg) |
|------------------|------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | Order no. | 品名 | 寸法 (φ×L cm) | 実容量 (mL/本) | Order no. | 品名 | Order no. | 品名 | | |
| 40 | 5720411139 | 40PPチューブ | 2.6 X 9.0 | 35.7 32.5 | --- | --- | 5720411212 | E3-ALキャップクミ | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411141 | 40PPシールチューブ | 2.6 X 9.4 | 39.0 | --- | --- | 5720410102 | S-40ALキャップクミ ^{*1} | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411146 | 40PEチューブ | 2.6 X 8.9 | 35.7 | --- | --- | 5720411212 | E3-ALキャップクミ | 40,000 | 194,000 |
| | | | | 35.7 | --- | --- | 5720411223 | E4-ALキャップクミ | 40,000 | 194,000 |
| | | | | 31.8 | --- | --- | 5720410102 | S-40ALキャップクミ ^{*1} | 40,000 | 194,000 |
| | 5720411148 | 40PETチューブ | 2.6 X 9.0 | 37.0 | --- | --- | 5720411212 | E3-ALキャップクミ | 40,000 | 194,000 |
| | 5720411149 | 40TIチューブ | 2.6 X 9.0 | 35.7 | --- | --- | 5720411212 | E3-ALキャップクミ | 45,000 | 245,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | 5720411219 | E-SSTリッド(B) | 38,000 | 175,000 |
| | | | | 24.4 | --- | --- | --- | --- | 38,000 | 175,000 |
| | 5720411147 | 40SSTチューブ(B) | 2.6 X 9.0 | 24.4 | --- | --- | 5720411219 | E-SSTリッド(B) | 32,000 | 124,000 |
| 33 | 5720411137 | 33PCアツチューブ | 2.6 X 8.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | 32,000 | 124,000 |
| | 5720411138 | 33PPアツチューブ | 2.6 X 8.8 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | 40,000 | 194,000 |
| 30 | 5720411126 | 30PCボトル(C3)クミ | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 25,000 | 75,700 |
| | 5720411127 | 30PCボトル(B3)クミ | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 50,000 | 303,000 |
| | 5720411124 | 30PPボトル(C)クミ ^{*2} | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 30,000 | 109,000 |
| | 5720411123 | 30PPボトルクミ | 2.6 X 9.7 | 26.0 | --- | --- | --- | --- | 41,000 | 204,000 |
| | 5720411121 | 30PPシールチューブ | 2.6 X 7.5 | 31.7 | 5720410250 | E40-30フロートスペーサ | 5720411256 | E-スペースキャップ | 28,000 | 95,000 |
| 20 | 5720411116 | 20PPシールチューブ | 2.6 X 5.5 | 22.2 | 5720411341 | E40-20フロートスペーサ | 5720411256 | E-スペースキャップ | 50,000 | 303,000 |
| 12 | 5720411020 | 12PPチューブ | 1.6 X 7.6 | 10.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411208 | C-ALキャップクミ | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411021 | 12PEチューブ | 1.6 X 7.5 | 10.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411208 | C-ALキャップクミ | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411022 | 12PCチューブ | 1.6 X 7.6 | 10.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411208 | C-ALキャップクミ | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411106 | 12PETチューブ | 1.6 X 7.6 | 11.4 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411209 | C4-ALキャップクミ | 40,000 | 183,000 |
| | | | | 10.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411208 | C-ALキャップクミ | 34,000 | 132,000 |
| | | | | 10.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | 5720411210 | C-SSTキャップクミ | 30,000 | 103,000 |
| 5720411023 | 12SSTチューブ | 1.6 X 7.6 | 8.3 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 183,000 | |
| 10 | --- | 10PCボトル(B)クミ | 1.6 X 8.2 | 8.4 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411024 | 10PCアツチューブ | 1.6 X 7.7 | 6.3 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411027 | 10PCボトルクミ | 1.6 X 8.2 | 8.0 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 183,000 |
| | 5720411028 | 10PPボトルクミ | 1.6 X 8.0 | 8.0 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 35,000 | 140,000 |
| | 5720411025 | 10PPアツチューブ | 1.6 X 7.6 | 6.5 | 5720411185 | 12A40アダプタ | --- | --- | 30,000 | 103,000 |
| 6.5 | 5720411029 | 6.5PPチューブ | 1.3 X 6.4 | 5.8 | 5720411184 | 6.5A40アダプタ | 5720411201 | B-ALキャップクミ | 40,000 | 173,000 |
| | 5720411030 | 6.5PCチューブ | 1.3 X 6.4 | 5.8 | 5720411184 | 6.5A40アダプタ | 5720411201 | B-ALキャップクミ | 40,000 | 173,000 |
| | 5720411080 | 6.5PETチューブ | 1.3 X 6.4 | 6.2 | 5720411184 | 6.5A40アダプタ | 5720411207 | B2-ALキャップクミ | 40,000 | 173,000 |
| 5 | 5720411031 | 5PPチューブ | 1.3 X 5.2 | 5 | 5720411183 | 5A40アダプタ | 5720411201 | B-ALキャップクミ | 40,000 | 181,000 |
| 4.7 | 5720411032 | 4.7PCアツチューブ | 1.3 X 6.4 | 3.4 | 5720411184 | 6.5A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 173,000 |
| 4 | 5720411033 | 4PPチューブ | 1.1 X 6.0 | 4 | 5720411182 | 4A40アダプタ | 5720411199 | A3-ALキャップクミ | 40,000 | 180,000 |
| 3 | 5720411012 | 3PCチューブ | 1.3 X 5.1 | 2.5 | 5720411183 | 5A40アダプタ | --- | --- | 40,000 | 179,000 |

※チューブアダプタの材質： ポリアセタール

※フロートスペーサの材質： 変性ポリフェニレンエーテル

*1： S-40ALキャップクミを使用する場合、チューブの再使用はできません。

*2： 30PPボトル(C)は、4～20℃でご使用ください。

⚠ 注意：チューブ・ボトルの強度や耐薬品性は、温度や回転速度などの影響で変わります。実試料で評価する前に、実際の遠心条件で予備試験を行い、問題が無いことを確認してください。

40PPチューブ、40PPシールチューブ、30PPシールチューブ、20PPシールチューブをご使用になる場合は、必要な工具等もセットになったチューブキットをご利用になると便利です。

チューブキットについての詳細は、この取扱説明書の「6. 部品・付属品一覧」をご覧ください。

チューブ・ボトルの洗浄や滅菌および寿命につきましては、「ロータ・ボトル・チューブ・キャップ取扱説明書(パーツ No.999966)」を参照してください。

3. ロータの使用法

取扱いは、チューブ・ボトルの種類によって異なります。この取扱説明書では、取扱い手順を示します。くわしい取扱いは、遠心機本体に付属している「ロータ・チューブ・ボトル・キャップ取扱説明書 (パーツ No.999966)」をご覧ください。



(*) CP-NX シリーズ、CP-WX シリーズ、CP-MX シリーズ、および CP- α/β シリーズ遠心機で使用する場合は、目視で十分ですが、極端なインバランス運転はおさげください。(液面の高さは 5mm 以内) ただし、チューブの種類によっては、注入する液量がすくなくいと回転速度の制限を受けたり、つぶれが発生する場合がありますのでご注意ください。

＝取扱時の注意事項＝

●許容回転速度について

- ①平均密度が 1.2g/mL 以上の試料を使用する場合、回転速度が制限されます。次式の許容回転速度以下でお使いください。

$$\text{許容回転速度(rpm)} = 50,000(\text{rpm}) \times \sqrt{\frac{1.2 (\text{g/mL})}{\text{試料の平均密度 (g/mL)}}}$$

- ②塩化セシウムなどの塩類を使用する場合は、密度により回転速度が制限されます。塩化セシウムを使用する場合の詳細はこの取扱説明書の「5. 塩化セシウムを使用する場合の注意」をご覧ください。
- ③チューブ・ボトル、チューブアダプタなどの組合せにより、回転速度が制限されます。この取扱説明書の「2.チューブ・ボトルについて」をご覧ください。

●チューブ・ボトルについて

使用前に、チューブ・ボトル・キャップ・チューブアダプタの組合せを確認してください。シールチューブ、薄肉チューブは液量を満量にしてください。ボトル、アツチューブはこの取扱説明書の「2. チューブ・ボトルについて」の実容量以下の任意の液量で使用できます。

ただし、30PPボトル(C)および30PCボトル(C3)を、100,000xg以上で使用する場合は、試料を肩口以上に入れてください。キャップの締め付け、シールチューブの溶着は確実にこなってください。(STF-1、STF2、STF3取扱説明書を参照ください。) チューブ・ボトルについての詳細は、「ロータ・チューブ・ボトル・キャップ取扱説明書(パーツ No.999966)」をご覧ください。

●ロータの使用について

- ⚠ 警告：** ●ロータの最高回転速度(ロータに刻印してあります。)を超えての使用はしないでください。ロータの破壊による遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。
- ロータに付属している「耐薬品性一覧表」を参照して、ロータの材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。ロータの腐食の原因となる場合があります。
- ⚠ 注意：** ●1本、あるいは、回転軸に対して非対称にチューブ・ボトルをセットしないでください。過大なインバランス運転となり、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。
- チューブ・ボトルと試料は、チューブアダプタ・キャップを含めてロータの許容インバランス量以内にバランスをとってください。許容量を越えたインバランス量で運転すると、遠心機およびロータを損傷する場合があります。
- ロータに試料が付着した場合は、速やかに柔らかい布等でふき取ってください。ロータの腐食の原因となる場合があります。
- アングルロータは、ロータカバを必ず取りつけ、ハンドルをしっかり締付けて使用してください。ハンドルの締め付けが不足していたりハンドルを取り外して運転しますと、回転中にロータカバが離脱し、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。
- ロータは、使用ごとに手入れと点検を行ってください。異常な点がありましたら、ロータの使用を中止し、お買い求めいただいた販売店または当社のサービス担当にご連絡ください。

●試料について

- ⚠ 警告：** ●引火性、爆発性のある試料は使用しないでください。本ロータおよび遠心機は防爆構造になっていません。
- 有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料を使用する時には、隔離された場所で使用するなどして、十分な安全管理を行ってください。一般に遠心機およびロータは、遠心中の液漏れや万一の事故などによる試料の飛散を防ぐ構造になっていません。

●「ロータ運転日誌」の記入について

- ⚠ 注意：** 光学アダプタ式ロータをご使用の場合は、ロータ使用ごとに、必ず「ロータ運転日誌」に記入してください。記入しませんでしたら、ロータの寿命管理ができなくなります。(RLM アダプタ式ロータの場合は記入不要です。)

● RLMアダプタ、光学アダプタについて

⚠ 警告：RLMアダプタ、光学アダプタをロータから取り外したり、他のロータのアダプタと交換しないでください。

アダプタはロータのオーバースピードを監視する重要な部品で、ロータに適合しないアダプタを取りつけますと、ロータの破壊による遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。

⚠ 注意：●RLMアダプタは、磁気に近づけたり、傷をつけないでください。アダプタに記録されているメモリが消滅し、ロータを使用できなくなります。また、アダプタに傷がつくのを防ぐため、RLMアダプタ式ロータは、ロータに付属のロータスタンド (アダプタ保護用ロータスタンド)を使用し、保管してください。アダプタに傷がついてしまった場合は、ロータの使用を中止し、当社のサービス担当にご連絡ください。

●光学アダプタに傷をつけないでください。ロータを使用できなくなります。また、アダプタに傷がつくのを防ぐため、ロータに付属のロータスタンド (アダプタ保護用ロータスタンド)を使用し、保管してください。


アダプタに傷がついてしまった場合は、ロータの使用を中止し、当社のサービス担当にご連絡ください。

●RLMアダプタ、光学アダプタに試料が付着した場合は、速やかに柔らかい布等でふき取ってください。RLMアダプタ、光学アダプタが腐食するとロータを使用できなくなります。

4. ロータの手入れ

●ロータの手入れ

- ⚠ 警告：ロータは100℃以上に温度を上げないでください。ロータの強度が低下し、大変危険です。
- ⚠ 注意：洗剤をお使いになる場合はpH5～9の中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用しますと腐食の原因となります。

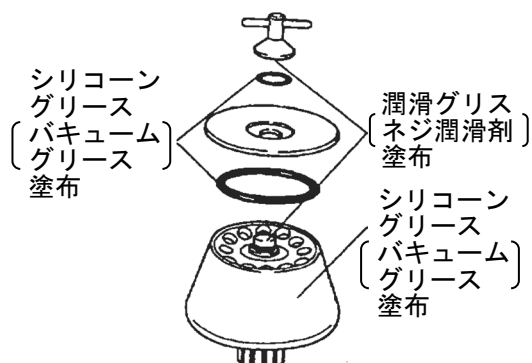

ロータの使用後は、水道水またはpH 5～9の中性洗剤の希釈液で洗い、蒸留水ですすぎます。ロータカバを取ったままロータを逆さまにし、空気中で乾燥します。乾燥後、ロータの表面にシリコングリース（バキュームグリース）、ネジ部には潤滑グリス（ネジ潤滑剤）、パッキン類にはシリコングリース（バキュームグリース）を薄く塗布し、乾燥した雰囲気の中で保管してください。ロータに付着物がある場合は、ロータを1～2時間、40～50℃の温水に浸した後、柔らかいブラシなどで洗ってください。いずれの場合でもpH 5～9の中性洗剤をご使用ください。付着物が除去できない場合には、当社のサービス担当までご相談ください。

●ロータの滅菌について

- ⚠ 警告：ロータのオートクレーブ、煮沸滅菌は、絶対に行わないでください。ロータの強度が低下し、大変危険です。
- ⚠ 注意：プラスチック製のチューブアダプタのオートクレーブ、煮沸滅菌は絶対に行わないでください。チューブアダプタが変形し、使用できなくなる場合があります。

ロータの滅菌は、ガス滅菌(エチレンオキシド、ホルムアルデヒド)、薬液滅菌(70% エタノール、3% 過酸化水素、3% ホルマリン*)、紫外線滅菌のいずれかの方法で行ってください。チューブアダプタの滅菌はガス滅菌(エチレンオキシド、ホルムアルデヒド)、薬液滅菌(70% エタノール、3% 過酸化水素、3% ホルマリン*)のいずれかの方法で行ってください。
* 3% ホルマリンでの浸せき滅菌は2時間以内としてください。

●ロータの点検項目

使用ごとに点検する項目

- ネジ部の摩耗・・・当社のサービス担当へご相談ください。
- チューブ穴の腐食・・・当社のサービス担当へご相談ください。
- パッキン類の劣化・摩耗・・・新しいものと交換してください。
- アダプタの汚れ・・・柔らかい布などで拭き取ってください。

1回/月に点検する項目

- 回転軸挿入穴の汚れ・・・水で湿らせた柔らかい布などで拭き取ってください。

- ⚠ 注意：ロータの回転軸挿入穴（クラウン穴）と遠心機の回転軸（クラウン）の表面を1回/月の割合で清掃してください。回転軸挿入穴や回転軸に汚れや付着物があると、ロータの回転軸への取り付けが不完全となり、回転中にロータの離脱を引き起こす恐れがあります。

●ロータの寿命

- ⚠ 警告：寿命に達したロータは使用しないでください。回転中にロータが破壊し、遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。

ロータを繰り返し使用しますと、材料の疲労やクリープ（変形）によってロータの強度は少しずつ低下しますので、ロータの寿命が規定されています。運転回数5,000回、または、積算使用時間10,000時間のいずれかに到達するまでが、ロータの寿命です。ただし、RLMアダプタ式ロータの場合、ロータの最高回転速度より低い回転速度で使用すると、ロータの材料強度特性に基づいた補正がなされ、使用回数、積算使用時間とともに寿命が自動的に延長されます。

5. 塩化セシウムを使用する場合の注意

密度勾配液として塩化セシウム(CsCl)溶液がよく用いられますが、高密度の CsCl 溶液を使用すると、ロータ回転条件により回転中に CsCl 溶液が飽和状態となり、CsCl の結晶が析出する場合があります。析出した結晶は密度が大きく(約4g/mL)、ロータに過大な負荷がかかり非常に危険です。また、結晶化により、CsCl溶液の密度勾配やサンプルの分離状態にも大きな影響を与えます。このため、結晶化しない密度と回転速度で必ずご使用ください。

図5-1は、標準チューブにCsCl溶液を満量にした状態で、結晶化しない最大許容密度と回転速度の関係を表しています。この図においてカーブより上では結晶化が occurs しますので、必ずカーブ以下で密度と回転速度を選択してください。また、この図のカーブは温度などによって変化しますので、重要な試料を分離する場合はあらかじめ同一密度のCsCl 溶液を遠心して、結晶化しないことの確認をおすすめします。

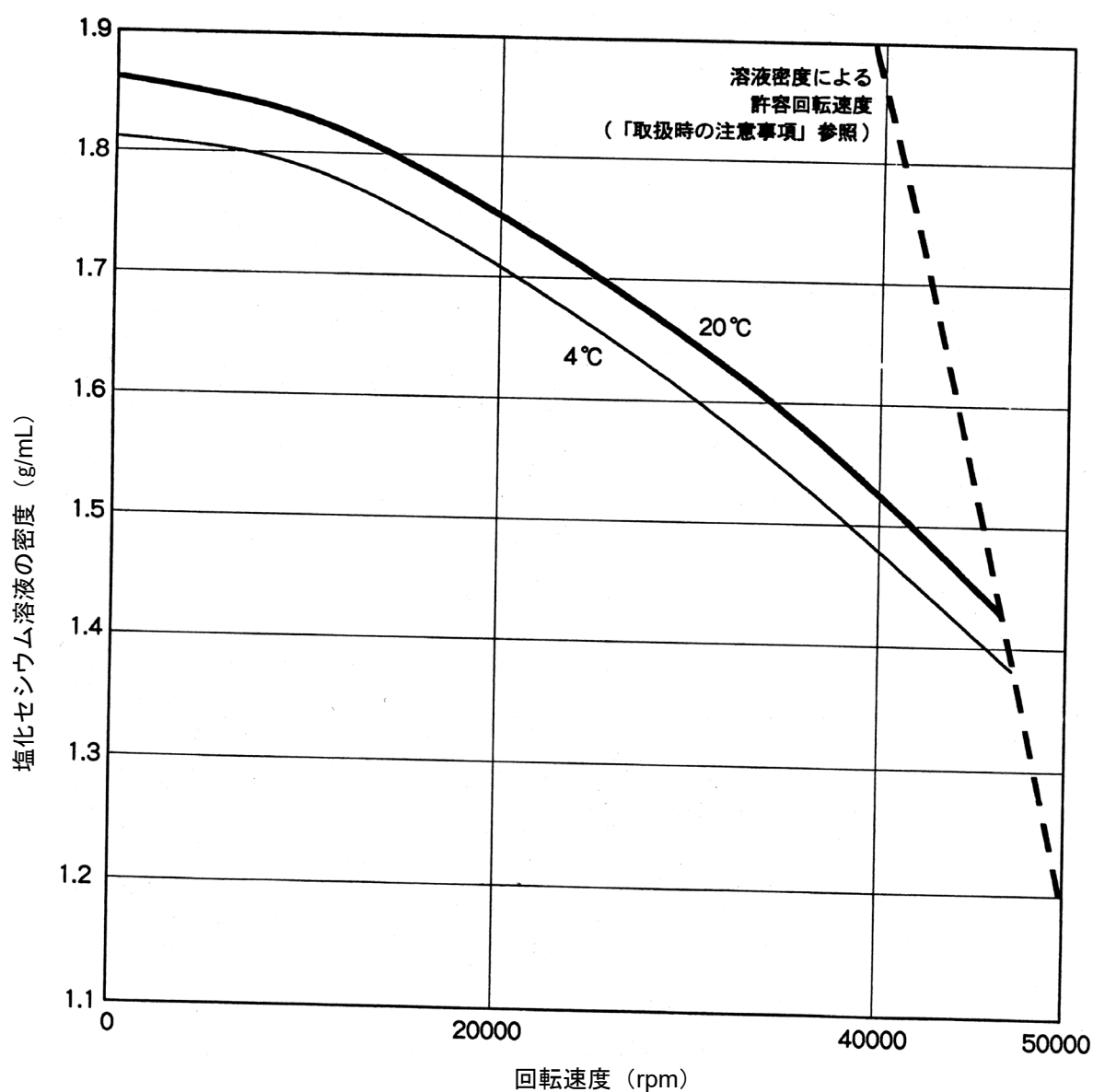


図 5-1 塩化セシウム溶液と密度と回転速度の関係

6. 部品・付属品一覧

ロータ受領時に、ロータの部品、付属品のチェックをおこなってください。万一、欠品または不良品がございましたら、お買い求めになられた販売店、または、当社のサービス担当までご連絡ください。

| 番号 | 部品名 | 個数 | 備考 | 補給用部品 No. (員数) ^{※3} | 番号 | 部品名 | 個数 | 備考 | 補給用部品 No. (員数) ^{※3} |
|----|-----------------------|-----------------|----|---------------------------------|----|------------------------|----|----|---------------------------------|
| ① | ロータ | 1 | | | ⑩ | ロータスタンド | 1 | | 5720410232 (1) |
| ② | ハンドル | 1 ^{※1} | | | ⑪ | 潤滑グリス (ネジ潤滑剤) | 1 | | 5720411230 (1) |
| ③ | パッキン(ハンドル用) (Oリング) | 1 ^{※1} | | 5720410154 (5) | ⑫ | シリコングリース (シキウムグリース) | 1 | | 5720850317 (1) |
| ④ | ロータカバ | 1 ^{※1} | | | ⑬ | コウグバコ(C) | 1 | | |
| ⑤ | パッキン(ロータ用) (Oリング) | 1 ^{※1} | | 5720410160 (3) | ⑭ | | | | |
| ⑦ | | | | | ⑮ | | | | |
| ⑧ | パッキン(ハンドル用) (Oリング) | 2 | 予備 | | ⑰ | ロータ運転日誌 | 1 | | 5720411287 (1) |
| ⑨ | パッキン(ロータ用) (Oリング) | 2 | 予備 | | ⑱ | ロータ取扱説明書 | 1 | | |

※1：ロータに組み込まれている個数

※2：RLM アダプタ式ロータに⑰ロータ運転日誌は、付属していません。

※3：補給用部品の入数

ロータには、チューブが付属しておりませんので、別途お買い求めのうえ、ご使用ください。
40PP チューブ、40PP シールチューブ、30PP シールチューブ、20PP シールチューブをご使用になる場合は、必要な工具等もセットになった下記の下記のキットをご利用になると便利です。

●40PP チューブキット(B)(Order no. 5720411144)

(構成部品)

| | | |
|------------|-----------------------|-----------|
| 5720411139 | 40PP チューブ | 2(50 本/組) |
| 5720411212 | E3-AL キャップ | 12 |
| --- | パッキン(キャップ用) (Oリング) | 2(10 個/組) |
| 5720411365 | チューブバイス(E) | 1 |
| 5720411282 | トルクレンチ | 1 |
| 5720411283 | ソケットアダプタ | 1 |
| 5720411410 | 17MM ソケット | 1 |
| 5720411267 | チューブセッタ | 1 |

●30PP シールチューブキット(Order no. 5720411122)

(構成部品)

| | | |
|------------|-----------------|-----------|
| 5720411121 | 30PP シールチューブ | 2(50 本/組) |
| 5720411256 | E-スペースキャップ | 4 |
| 5720410250 | E40-30 フロートスペーサ | 4 |
| 5720411232 | チューブセッタ | 1 |
| 5720411267 | チューブセッタ(B) | 1 |

※30PP シールチューブをご使用になる場合は、別にチューブシーラ(STF3, STF2)、チューブラック(E3)(Order no. 5720410015)が必要です。

●40PP シールチューブキット(A)(Order no. 5720411143)

(構成部品)

| | | |
|------------|--------------|-----------|
| 5720411141 | 40PP シールチューブ | 2(50 本/組) |
| 5720411256 | E-スペースキャップ | 12 |
| 5720411232 | チューブセッタ | 1 |


※40PP シールチューブをご使用になる場合は、別にチューブシーラ(STF3, STF2, STF-1)、チューブラック(E)(Order no. 5720410008)が必要です。

●20PP シールチューブキット(Order no. 5720411117)

(構成部品)

| | | |
|------------|-----------------|-----------|
| 5720411116 | 20PP シールチューブ | 2(50 本/組) |
| 5720411256 | E-スペースキャップ | 4 |
| 5720411341 | E40-20 フロートスペーサ | 4 |
| 5720411232 | チューブセッタ | 1 |
| 5720411267 | チューブセッタ(B) | 1 |

※20PP シールチューブをご使用になる場合は、別にチューブシーラ(STF3, STF2)、チューブラック(E4)(Order no. 5720410016)が必要です。

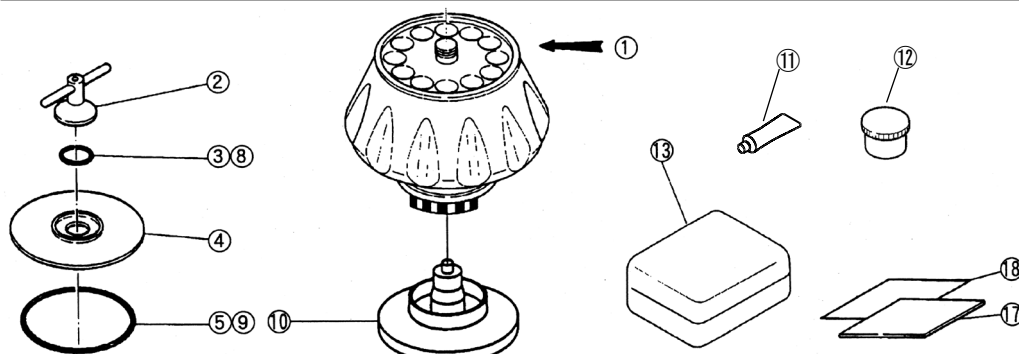

7. 汚染除去について

⚠ 警告：

- 装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には必ず使用者の定める適切な汚染除去の手順に従って処理してください。
- お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当に修理を依頼される場合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
この消毒・汚染除去が完了するまで、当社は装置の修理ができません。
- 装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。尚、ロータに付属している汚染除去書をコピーしご記入の上、修理・返却品等に添付してください。
当社施設で遠心機、ロータ、または付属品等を受け取り、当社の見解として有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料による汚染が除去されていないと判断した場合、装置の処理について指示をいただくためにお客様にご連絡させていただきます。
装置、ロータ、および部品等の消毒・汚染除去等の処理にかかる費用は、お客様にご負担いただきます。この消毒、汚染除去が完了するまで、当社は修理や調査等ができません。
- ご相談、ご質問は、裏表紙の遠心機お客様相談センターにお問い合わせください。

8. ロータのリタイアメント

ロータを長年使用し続けると、経年劣化や腐食等が徐々に進行し、ロータの外観上に変化が見られなくてもロータの強度が低下している可能性があります。このようなロータを使い続けることにより破壊事故等を起こす恐れがありますので、以下に示すリタイアメント年数を過ぎたロータは廃棄されるようお願いいたします。

| ロータ種類 | 材質 | リタイアメント年数 |
|-----------|----------------|-----------|
| アングルロータ | チタン合金 | 12年 |
| パーティカルロータ | アルミ合金 | 10年 |
| スイングロータ | チタン合金 アルミ合金 | 10年 |
| ゾーナルロータ | チタン合金 | 10年 |
| 連続ロータ | チタン合金 | 10年 |

9. ロータの廃棄について

- 廃棄物は、お使いになったお客様が自らの責任において適正に処理することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法）で定められております。ロータ（バケット、チューブ、ボトル、アダプタなども同様です）を廃棄するときは、産業廃棄物処理の許可を持った廃棄物処理業者に廃棄処理を委託してください。なお、ロータ（バケット、チューブ、ボトル、アダプタなども同様です）が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料などで、人の健康に被害を生ずるような汚染が生じていたり、またはその恐れがあるときは、廃棄物処理業者に汚染物質を使用された旨ご通知願います。
- ロータの廃棄でお困りの場合は、裏表紙の遠心機お客様相談センターにお問い合わせください。

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

〒312 - 8502 茨城県ひたちなか市武田 1060 番地

遠心機お客様相談センター **フリーダイヤル** (0120) 02 - 4125 (無料)
(土・日・祝日・弊社特別休業日を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)