

Keep this rotor instruction manual and the centrifuge manual in the file.

Angle Rotor for Refrigerated Centrifuge

R13A

Before using this rotor, please carefully read this instruction manual and the centrifuge instruction manual for its efficient operation and for your safety.



Keep this instruction manual for your reference and refer to it as required.

Contents


1. Specifications	_____	1
2. Bottles/Tubes	_____	4
3. How to Use	_____	8
4. Maintenance	_____	10
5. Packing List	_____	12
6. Spare Parts	_____	12
7. Decontamination	_____	13
8. Rotor Retirement	_____	13
(Appendix) K Factors	_____	14


Safety Reminder

- Centrifuge rotors rotating at high speed have considerable potential for damage to personal properties if used improperly.
For safe and proper use of this rotor, carefully read the centrifuge instruction manual and this rotor instruction manual before use and observe the instructions.

 **WARNING :** and  **CAUTION :** notes are used to call your attention in this manual to prevent personal injury or damage to the rotor and the centrifuge.

These notes are defined as follows.

 **WARNING:** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in personal severe injury or possible death.

 **CAUTION:** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in personal injury or severe damage to the instrument.

WARNING

- Never use any material capable of producing flammable or explosive vapors.
- Your centrifuge and rotor are not designed to confine any sample particles dispersed due to leakage. Therefore, when using toxic or radioactive samples or pathogenic or infectious blood samples, make sure to prepare necessary safety measures at your own responsibility.
- Never exceed the maximum speed of the rotor (mentioned on the rotor).
Always reduce rotor speed as instructed in this manual when rotor speed is limited due to sample density or kinds of tubes.
- Check the attached chemical resistance chart, and do not use any sample inapplicable to the rotor.
- If the centrifuge, rotor, or an accessory is contaminated by samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious, be sure to decontaminate the item according to good laboratory procedures and methods.
- If there is a possibility that the centrifuge, rotor, or an accessory is contaminated by samples that might impair human health (for example, samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious), it is your responsibility to sterilize or decontaminate the centrifuge, rotor, or the accessory properly before requesting repairs from an authorized sales or service representative.
- It is your responsibility to sterilize and/or decontaminate the centrifuge, rotor, or parts properly before returning them to an authorized sales or service representative.

CAUTION

- Do not run the rotor without the rotor cover in position.
Tighten the cover-locking knob securely.
- Balance the tubes/bottles and the samples including the caps and the adapters within the allowable imbalance of the rotor. Do not exceed the allowable imbalance.
- Clean the inside of the drive hole (crown hole) of the rotor and the surface of the drive shaft (crown) of the centrifuge once a month. If the drive hole or the drive shaft is stained or any foreign matter is adhered, the rotor may be improperly installed and come off during operation.
- Use the rotor tubes and bottles within their actual capacities.
- Do not use tubes/bottles that have exceeded their life expectancy. Failure to do so could result in damage of tubes/bottles and the rotor and the centrifuge. The life expectancy of tubes/bottles depends on factors such as the characteristics of samples, speed of the rotor used, and temperature.
Always check for deterioration and damage (cracks, deformation, and so on) on tubes/bottles before using them. Do not use the tubes/ bottles if you find such a problem.
- Inspect and maintain the rotor after use. If abnormality is observed, do not use it.
Contact an authorized sales or service representative.

1.Specifications

1.1 Construction

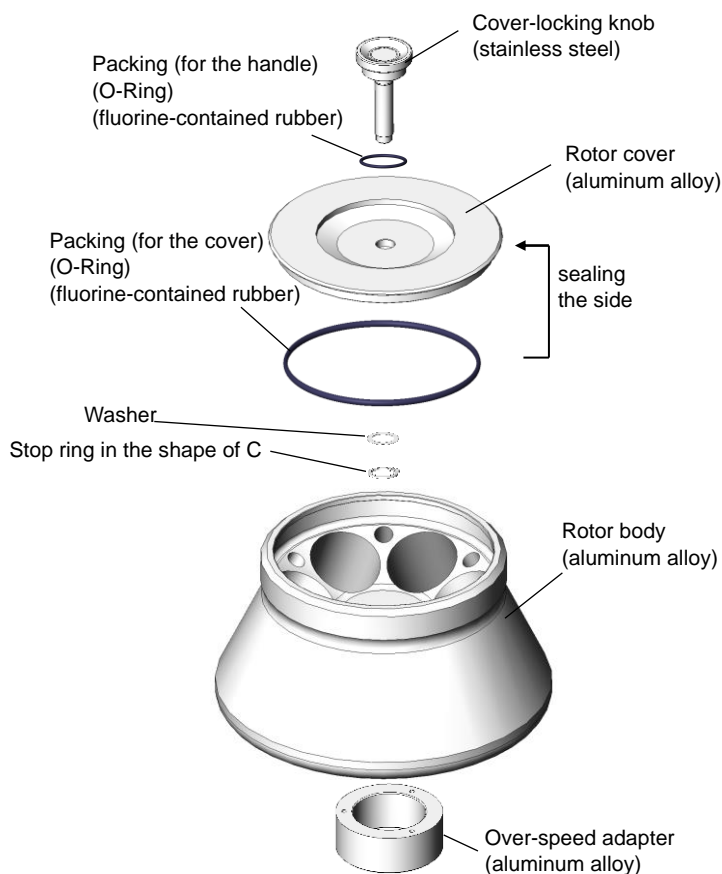


Figure1-1 Construction of R13A rotor

1.2 Specifications

Applicable centrifuge*1

(Some centrifuges are on sale in only Japan.
Visit to our web site.)

Max. speed*2: 13,000 rpm

Max. RCF: 26,400 × g (250PP Bottles)
23,400 × g (11PA Thick-Walled Tubes)

Nominal rotor capacity:

250 mL × 6 bottles = 1500 mL

Rotor Size: φ 290 × 193 mm

Weight: 11.0 kg

Material: Aluminum alloy

Rotor No.: 77

*1: For applicable centrifuges, refer to the “Applicable centrifuges (Rotors for high-speed refrigerated centrifuges (Part No. S998611))”.

*2: The maximum allowable speed varies with centrifuge models and so on. For further details, refer to the “Applicable centrifuges (Rotors for high-speed refrigerated centrifuges (Part No. S998611))”.

1.3 Cross-sectional view of rotor

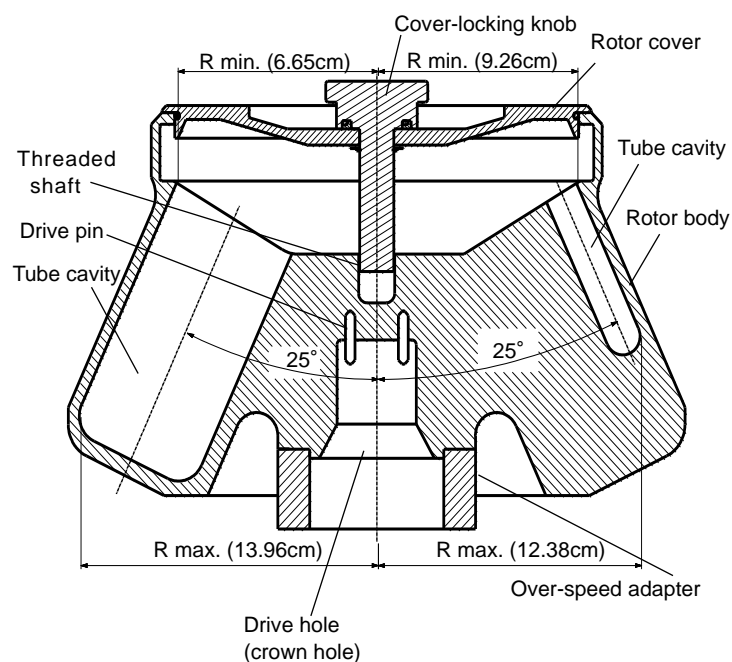


Figure1-2 Cross-sectional view of R13A rotor

1.4 Characteristic of rotor

Table1-1 Characteristics

Rotor speed (rpm)	250PP Bottle			11PA Tube		
	RCF (×g)		K factor ※	RCF (×g)		K factor ※
	R = Rmin. (6.65cm)	R = Rmax. (13.96cm)		R = Rmin. (9.26cm)	R = Rmax. (12.38cm)	
1,000	74	156	187,844	104	138	73,554
2,000	297	624	46,961	414	554	18,388
3,000	669	1,400	20,872	932	1,250	8,173
4,000	1,190	2,500	11,740	1,660	2,210	4,597
5,000	1,860	3,900	7,514	2,590	3,460	2,942
6,000	2,680	5,620	5,218	3,730	4,980	2,043
7,000	3,640	7,650	3,834	5,070	6,780	1,501
8,000	4,760	10,000	2,935	6,630	8,860	1,149
9,000	6,020	12,600	2,319	8,390	11,200	908
10,000	7,430	15,600	1,878	10,400	13,800	736
11,000	9,000	18,900	1,552	12,500	16,700	608
12,000	10,700	22,500	1,304	14,900	19,900	511
13,000	12,600	26,400	1,111	17,500	23,400	435

※For details about K factor, refer to “(Appendix) K Factors”

Calculation formula

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times R \times N^2 (\times g)$$

R: Rotating radius (cm)
N: speed(rpm)

1.5 Allowable speed of the rotor



WARNING :

Do not exceed the maximum speed of the rotor. The rotor speed should be limited depending on sample characteristic, kinds of bottles and centrifuge model.

Do not exceed the allowable speed of the rotor.

The maximum speed marked on the surface of the rotor cover is permitted under the conditions as follows.

-Average sample density : less than 1.2g/mL

-250mL bottles are used.

Depending on sample density, kinds of bottle and centrifuge model, the rotor speed may be limited as follows. Do not exceed the allowable speed of the rotor.

(1) Allowable speed for sample density



WARNING :

When sample density exceeds 1.2g/mL, calculate the allowable speed according to the following equation.

$$\text{Allowable speed (rpm)} = 13,000 \text{ (rpm)} \times \sqrt{\frac{1.2(\text{g/mL})}{\text{Average density of sample (g/mL)}}}$$

(2) Allowable speed for kinds of bottles/tubes

The rotor speed should be limited by kinds of bottles/tubes etc.

For details, refer to "2.2 Applicable bottles/tubes".

Perform operation under the allowable speed, otherwise bottles may be broken during operation.

1.6 Rotor registration data for the CR-G II series centrifuges

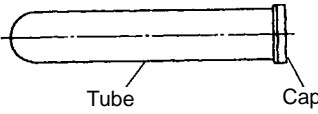
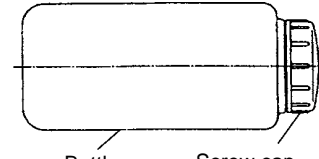
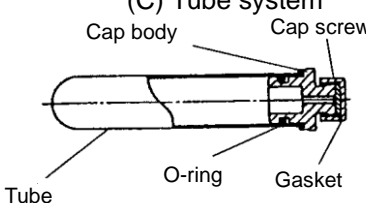
If this rotor is not registered in the CR-G II series centrifuges, register this rotor by entering the following data according to "3-5-5 Entry of New Rotor" on the instruction manual of the CR-G II series centrifuges.

Item/No.	DATA	Item/No.	DATA	Item/No.	DATA	Item/No.	DATA
ROTOR No.	77	6	2153	12	51065	18	0
1	4000	7	4106	13	32032	19	1154
2	50204	8	42	14	32032	20	0
3	96000	9	16000	15	50200	21	7006
4	5116	10	8001	16	4175	22	14255
5	5096	11	82049	17	0	23	42029

2. Bottles/Tubes

2.1 Kinds of Bottles and Tubes

Following table shows general types of bottles and tubes.

Simplified types		Seal-capped type
(A) Tube system 	(B) Bottle system 	(C) Tube system 

Bottles and tubes are made of the following materials.

PC: Polycarbonate

Strong, transparent and can be autoclaved at 121°C or less. Use the tubes/bottles at a temperature between 4 °C and 25 °C. Weak in organic solution, alkali solution, and alkali detergent.

PP: Polypropylene

Strong but susceptible to low temperature (brittle point:0°C). It can be autoclaved at 121°C or less. Use the tubes/bottles at a temperature between 4 °C and 25 °C.

PA: Polypropylene copolymer

Strong and can be autoclaved at 115°C or less. Use the tubes/bottles at a temperature between 4 °C and 25 °C.

SST: Stainless steel

Excellent in chemical resistance and heat resistance. It can be autoclaved at 121°C or less.

Glass: It is transparent and highly heat-resistant.

Refer to the attached "Chemical resistance chart (Part No. S999313)" for chemical resistance of each material.

2.2 Applicable bottles/tubes

Table2-1 Applicable bottles/tubes


Tubes/Bottles				Tube Adapter				Cap		Max. Speed (rpm)	Max. RCF (xg)
Part No. (Qty)	Name	Size (φ X L cm)	Actual capacity (mL/tube)	Part No. (Qty)	Name	Size (φ X L cm)	Material *2	Part No. (Qty)	Name		
S306749A (10 pcs.)	250PP Bottle Ass'y	6.2X12.4	250	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
S306750A (10 pcs.)	250PC Bottle Ass'y	6.2X12.4	250	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
328343A (2 pcs.)	300SST Tube	6.2X12.8	130	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
464977A (50 pcs.)	10 Glass Tube	1.2X10.5	7.1	336717A (4 pcs.)	10G7A300 Adapter	6.1X11.7	POM	---	---	4,000	2,320
473866A (10 pcs.)	50 Glass Tube	3.5X10.0	30	336720A (4 pcs.)	50GA300 Adapter	6.1X11.7	NBR	---	---	4,000	2,180
S311187A (100 pcs.)	50 TC Tube Ass'y	3.0X11.5	43	S408203A (2 pcs.)	50TA300 Adapter	6.1X10.5	POM	---	---	11,000	16,200
Marketed	50mL PP CultureTube *1 (conical bottom)	---	43	S408203A (2 pcs.)	50TA300 Adapter	6.1X10.5	POM	---	---	11,000	16,200
328353A (10 pcs.)	50PA Tube	2.9X10.4	28	S407879A (2 pcs.)	50A300 Adapter (B)	6.1X11.5	PP	328479A (20 pcs.)	M-PP Lid	10,000	13,600
328354A (10 pcs.)	50PC Tube	2.9X10.3	28	S407879A (2 pcs.)	50A300 Adapter (B)	6.1X11.5	PP	328479A (20 pcs.)	M-PP Lid	10,000	13,600
S306352A (10 pcs.)	50PP Bottle Ass'y	2.9X10.3	30	S407879A (2 pcs.)	50A300 Adapter (B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
328352A (10 pcs.)	50PC Bottle Ass'y	2.9X10.3	30	S407879A (2 pcs.)	50A300 Adapter (B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
328342A (2 pcs.)	50SST Tube	2.9X10.2	34	S407879A (2 pcs.)	50A300 Adapter (B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
332094A (10 pcs.)	80PA Bottle Ass'y	3.8X10.4	54	336722A (4 pcs.)	80A300 Adapter	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
S308432A (10 pcs.)	70PC Bottle Ass'y	3.8X10.4	49	336722A (4 pcs.)	80A300 Adapter	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
326012A (2 pcs.)	94SST Tube	3.8X10.1	40	336722A (4 pcs.)	80A300 Adapter	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
333959A (10 pcs.)	11PA Thick-Walled Tube	1.6X8.2	8	---	---	---	---	328478A (20 pcs.)	C2-PP Lid	13,000	23,400

*1: When using tubes on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer. Otherwise the tubes may be broken during operation.

*2: POM: Polyacetal NBR: Nitrile rubber PP: Polypropylene

The maximum allowable speed varies with centrifuge models and so on. For further details, refer to the "Applicable centrifuges (Rotors for high-speed refrigerated centrifuges) (Part No. S998611)".

The rotor speed is limited by the sample density and so on (see Section1.5).

 **CAUTION:**
When using bottles/tubes outside 4-25°C, bottles/tubes may be broken or deformed during operation. Test them before actual operation and perform actual operation after checking that there is no inconvenience such as the above.

- Maximum speeds listed are guidelines only. Because of variances in user methodologies, no guarantee of performance is expressed or implied.

2.3 Cleaning and sterilization of bottles/tubes

Properly wash and sterilize the bottles/tubes according to Table 2-2.

Comply with instructions of each maker for washing and sterilization of commercially available tubes.

- Autoclaving PA, PP and PC bottles/tubes

Wash the bottles/tubes well. Put them on a heat-resistant tube stand facing their mouths upward. Remove the screw caps and the lids to prevent deformation or breakage during autoclaving. After autoclaving, wait until the temperature in the autoclaving chamber reduces to the room temperature, then take out the tubes/bottles.



CAUTION:

Do not place the screw cap or the lid on the mouth of the bottle. Otherwise the bottle may be deformed or damaged during autoclaving.

- Washing

Wash the bottles/tubes with tap water or a dilute solution of neutral detergent. If the bottles/tubes stain heavily, soak them in a dilute solution of neutral detergent or wash them with a soft brush being careful not to scratch them. Then rinse the bottles/tubes in tap water and finally rinse them with distilled water. Dry the bottles/tubes in the air. Use a detergent of pH 5 to 9 because the PC tubes are susceptible to alkaline solutions. Avoid soaking the tubes/bottles in a dilute solution of neutral detergent for a long time. Otherwise, the tubes/bottles may be degraded in strength. For the caps of the tubes/bottles, remove them from the tubes/bottles. After disassembling the caps, wash them, then dry and store the caps in the same manner as the tubes/bottles.

Table 2-2 Washing and sterilization of bottles/tubes

○ : Applicable x : Inapplicable

Conditions		Material	PE	PA	PC	PP	SST
Washing	Washing solution	pH 5 or lower	x	x	x	x	x
		pH 5 to 9	○	○	○	○	○
		pH 9 or higher	○	○	x	○	○
		Warm water (50°C or lower)	○	○	○	○	○
Ultrasonic washing	Neutral detergent (pH 7)	○	○	○	○	○	
Sterilization	High-pressure steam sterilization (Autoclaving)	115°C(0.7kg/cm ²), 30 minutes	x	○	○	○	○
		121°C (1.0kg/cm ²), 20 minutes	x	x	○	○	○
		126°C (1.4kg/cm ²), 15 minutes	x	x	x	x	x
	Boiling	For 15 to 30 minutes	x	○	○	○	○
	Ultraviolet ray	200-300nm	x	x	x	x	○
	Gas	Ethylene oxide	○	○	x	○	○
		Formaldehyde	○	○	○	○	x
Chemical	Ethanol (70%)	○	○	x	○	○	
	Hydrogen peroxide (3%)	○	○	○	○	○	
	Formalin (3%)	○	○	○	○	x	

PE: Polyethylene PA: Polypropylene copolymer PC: Polycarbonate
 PP: Polypropylene SST: Stainless steel

2.4 Life expectancy of plastic bottle and tube

The life of plastic bottle and tube depends upon the sample, speed of rotor, temperature, etc. The standard life of plastic bottle and tube when used with aqueous samples (of pH5 to pH9) is specified as follows:

- (1) Tubes (PA, PP, PC and PE) 5 times
- (2) Thick-walled tube and bottle (PA, PP, PC and PE) 50 times
- (3) 50TC tubes and Commercial tubes 1 time

However, the standard life of the PC thick-walled tube and PC bottle is specified as follows depending upon the pre-treating conditions such as washing, sterilization, etc.:

Table 2-3 Standard Life of tube and bottle

Sample \ Washing and sterilization	Sterilization in gas or washing in hot water	Autoclaving at 121°C x 20min
Neutral (pH7)	50 times	10 times
Weak alkali (pH7 to pH9)	30 times	5 times

Do not use crazed (cracked) tubes or bottles.

The standard life of plastic tubes and bottles as the above are an approximate guide when they are used repeatedly for 1 hour at the maximum speed of rotor. We do not warrant the life expectancies of bottles/tubes.

3. How to Use

3.1 Preparation of bottles

Check that the bottles are free from crack or deformation. Do not use remarkably deformed or cracked bottles.

⚠ WARNING :

- These rotors and the centrifuge are not explosion-proof. Never use explosive or flammable samples.
- For safety, there are limits on the use of bio-samples which require bio-isolation, such as pathogenic germs and DNA recombination, as well as RI substance in centrifuges. Perform strict safety controls when separating samples containing these substances.

⚠ CAUTION:

- Do not use any sample inapplicable to the bottles, the caps, and the tubes in use referring to the attached "Chemical resistance chart. Otherwise, the bottles/tubes and the caps may be degraded.
- Chemical resistance and the strength of bottles/tubes varies with speed, temperature, and so on. Before using sample, fill bottles/tubes with water, buffer solution, etc. instead of sample and run them at the intended speed, temperature, and so on to ensure that there is no abnormality.
- Do not exceed the specified sample capacity of the bottles/tubes, otherwise sample leakage or deformation of bottles/tubes may occur.
- Balance the sample within the allowable imbalance including the weight of the bottles/tubes, caps. Excessive imbalance can cause damage to the centrifuge and the rotor.
- Use the samples that are same in compositions and same in density when placing them symmetrically. Otherwise the precipitation levels may be different by centrifugation and such operation may increase the level of imbalance. And it may result in damage to the centrifuge and the rotor.
- Balance between symmetrically arranged the bottles/tubes filled with the same-density sample. Variations in sample density cause imbalance operation.
- Tighten the cap of the tube/bottle securely, otherwise the sample leakage during operation can cause the excessive imbalance, and it may result in damage to the centrifuge and the rotor.

Inject the sample into the bottles/tubes and cap the bottles/tubes properly.

If the bottle/tube lid without the O-ring is used, do not invert or shake the bottle/tube with the lid, otherwise the sample may leak.

Do not exceed the specified sample capacity of the bottles/tubes, otherwise sample leakage or deformation of bottles/tubes may occur.

Balance the bottles/tubes that are symmetrically arranged. The allowable imbalance of this rotor is within 4g/bottle.

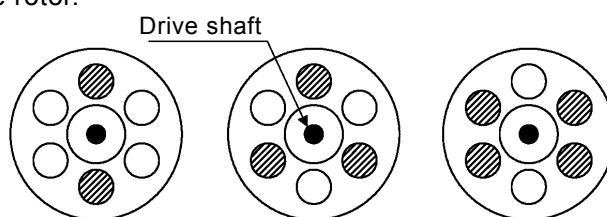
3.2 Setting of bottles into rotor

⚠ CAUTION:

Do not load only one bottle nor arrange the bottle asymmetrically with respect to the drive shaft, otherwise the centrifuge or the rotor may be damaged due to excessive imbalance operation.

Check that the tube cavities of the rotor are free from foreign substances. Set the balanced bottles symmetrically with respect to the drive shaft as shown in the figure below. When using bottles of even numbers, set bottles in pairs symmetrically with respect to the drive shaft. When using bottles of odd numbers, set the bottles so as to keep the same space between bottles.

Pre-cool the rotor when the operating temperature of the rotor is lower than the room temperature or pre-heat the rotor when the operating temperature of the rotor is higher than the room temperature before setting the bottles in the rotor.



Setting of two bottles Setting of three bottles Setting of four bottles

Fig.3-1 Setting of bottles

3.3 Mounting the rotor cover



CAUTION:

Be sure to mount the rotor cover to the rotor body and tighten the cover locking knob securely before operation, otherwise the rotor or the rotor cover may be removed during operation and result in damage to the centrifuge and the rotor.

- (1) Apply silicone grease (vacuum grease) (standard accessory of the centrifuge) to the packing (for the cover) and then fit the packing (for the cover) in the groove of the rotor body or the cover. Replace the packing (for the cover) with new one if damaged or deteriorated.
- (2) Apply lubricant for screw (Part No. 84810601) to the threaded portion of the cover. Put the rotor cover on the rotor body. Turn the cover locking knob to screw in the rotor body securely.

3.4 Operation

Mount the rotor onto the drive shaft of the centrifuge gently and securely. Check that the rotor cover is mounted and the cover-locking knob is securely tightened. Perform operation according to the instructions of the centrifuge instruction manual.

3.5 Taking out samples

After the operation, gently take out the rotor from the centrifuge and remove the rotor cover by turning the cover locking knob. Take out the bottles/tubes from the rotor and then take out the sample in a proper manner.

4. Maintenance

4.1 Corrosion resistance of rotor



WARNING:

Check the attached chemical resistance chart, and do not use any sample inapplicable to the rotor.

This rotor is made of aluminum alloy. The rotors made of aluminum alloy have high corrosion resistance and they are covered with an anodic oxidation coating. However, use of inapplicable chemicals can corrode these rotors and decrease the strength. Use samples that will not affect the rotor referring to the attached chemical resistance chart.

4.2 Maintenance of rotor

After the operation, properly maintain the rotor to prevent corrosion that can cause the rotor breakage.

- Normal maintenance



CAUTION:

Clean the inside of the drive hole (crown hole) of the rotor and the surface of the drive shaft (crown) of the centrifuge once a month. If the drive hole or the drive shaft is stained or any foreign matter is adhered, the rotor may be improperly installed and come off during operation.

Wash the rotor with tap water or a dilute solution of neutral detergent and rinse it out with distilled water. Wipe the rotor with a soft cloth. Turn the rotor upside down with the rotor cover removed to dry it well. Check that the rotor is completely dried and then put a light coat of silicone grease (vacuum grease) (standard accessory of the centrifuge) on the rotor. Store the rotor in a dry place.

- Maintenance after use of a corrosive sample

Wash the rotor with tap water immediately after the operation. Then perform the normal maintenance.

- Maintenance when foreign substances are adhered to the rotor




CAUTION:


Use a neutral detergent having a pH between 5 and 9, otherwise the rotor can be discolored or corroded.


Soak the rotor in warm water for one or two hours and wash the inside of the tube cavities and the crown hole at the rotor bottom with a soft brush to remove foreign substances. Do not forget to remove foreign substances adhered in the crown hole at the rotor bottom, otherwise the rotor and the drive shaft may be damaged.


4.3 Sterilizing rotor


- Sterilize this rotor according to either gas sterilization method (ethylene oxide or formaldehyde) or chemical sterilization method (70% ethanol, 3% hydrogen peroxide, or 3% formalin) or autoclaving (121°C, 20 minutes).
- Sterilize the plastic or rubber adapters according to either gas sterilization method (ethylene oxide or formaldehyde) or chemical sterilization method (70% ethanol, 3% hydrogen peroxide, or 3% formalin).


 **WARNING:** Be sure to remove the rotor cover from the rotor before autoclaving, otherwise the rotor or the rotor cover may be deformed.


 **WARNING:** Never sterilize the rotor by boiling, otherwise the rotor will be brittle.

 **CAUTION :** Never sterilize the adapters by autoclaving or boiling, otherwise the adapters may be deformed. Such adapters cannot be used.

 **CAUTION :** After autoclaving, wait until the temperature in the autoclaving chamber reduces to the room temperature, then take out the rotor and the rotor cover.

 **CAUTION :** Take out the rotor and the rotor cover carefully from the autoclaving chamber as they are wet and slippery.

 **CAUTION :** Check the packing (for the cover) after sterilizing. The packing (for the cover) may be damaged during operation due to deterioration. Replace the new one if a damage or deterioration is observed.

 **CAUTION :** Do not dip the rotor and the adapters in the formalin (3%) solution more than 2 hours.

4.5 Inspecting rotor

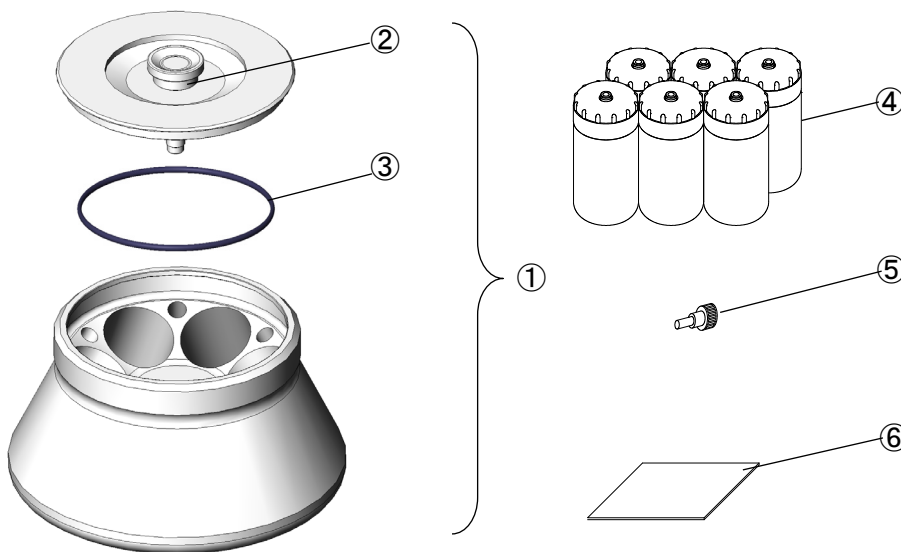
Periodically check that the rotor is free from corrosion every 100 hours use. Especially be careful of the tube cavities of the rotor and the crown hole at the rotor bottom because the rotor can be brittle if these portions are corroded. If the rotor surface is discolored, dented or cracked, the rotor is corroded. Do not use such a corroded rotor and contact an authorized sales or service representative immediately for further inspection.

5. Packing List




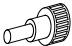

Check the parts and accessories of the rotor when the rotor is delivered. Contact an authorized sales or service representative if there are a missing item and inferior goods.

No.	Name	Qty	Part No. of spare parts (Qty)
①	Rotor	1	—
②	Packing (for the handle) (O-Ring)	1*	84521017 (3)
③	Packing (for the cover) (O-Ring)	1*	S411569A (3)
④	250PP Bottle Ass'y	6	S306749A (10)
⑤	Bottle setter	1	84550301 (1)
⑥	Rotor instruction manual	1	S999842

*: The quantities of the parts that are mounted to the rotor.



6. Spare Parts

	Part No.	Name	Qty
	84521017	Packing (for the handle) (O-ring)	3
	S411569A	Packing (for the cover) (O-ring)	3
	84810601	Lubricant for screw	1
	483719	Silicone grease (vacuum grease)	1
	84550301	Bottle setter	1
	S999842	Rotor instruction manual	1

7. Decontamination

 **WARNING:**

- If the centrifuge, rotor or an accessory is contaminated by samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious, be sure to decontaminate the item according to good laboratory procedures and methods.
- If there is a possibility that the rotor or an accessory is contaminated by samples that might impair human health (for example, samples that are toxic or radioactive, or blood samples that are pathogenic or infectious), it is your responsibility to sterilize or decontaminate the rotor or the accessory properly before requesting repairs from an authorized sales or service representative. Note that we cannot repair the centrifuge, rotor or the accessory unless sterilization or decontamination is completed.
- It is your responsibility to sterilize and/or decontaminate the rotor or parts properly before returning them to an authorized sales or service representative. In such cases, copy the attached decontamination sheet and fill out the copied sheet, then attach it to the item to be returned. We may ask you about the treatment for the rotor or parts if the decontamination is checked and judged as insufficient by us. It is your responsibility to bear the cost of sterilization or decontamination. Note that we cannot repair or inspect the rotor or the accessory unless sterilization or decontamination is completed.

8. Rotor Retirement

After many years of use, there will be inevitably some corrosion or stress corrosion. At some points, the combination of such damage and metal fatigue could make the rotor vulnerable to a failure. Although a rotor may appear to be in a good condition, you should follow the rotor retirement recommendation shown below.

Rotor	Material	Retire After Years
Refrigerated centrifuge rotors	Aluminum alloy	15
	Stainless steel	

(Appendix) K Factors

- Calculation of separation time

The K factor can conveniently be used which makes it possible to estimate the settling time directly from Svedberg unit(S).

Namely, the time taken for particles of 1S to settle from Rmin. to Rmax. is K factor.
The K factor can be obtained from the formula show below.

$$K = \frac{\ln(R_{\max.}) - \ln(R_{\min.})}{\omega^2} \cdot \frac{10^{13}}{3600}$$

ω : Angular velocity $\omega = 2\pi/60 \times N$

N : Speed (rpm)

Rmin. : Distance from axis of rotation to top of solution (cm)

Rmax. : Distance from axis of rotation to bottom of tube (cm)

Using the K factor, the settling time t(in hours) is expressed as follows:

$$t = \frac{K}{S}$$

For example, when using 250PP bottle, the K factor at the maximum speed of 13,000rpm of Model R13A rotor is 1,111. The time taken for particles of 1000 S to be settled from R min. to R max. using this rotor is as follows:

$$t = \frac{1,111}{1,000} = 1.1 \text{ hours}$$

The time taken for settling of particles of 1000 S by the same rotor at a speed of 8,000 rpm is:

$$K = \left[\frac{13,000}{8,000} \right]^2 \times 1,111 = 2,934 \quad t = \frac{2,934}{1,000} = 2.9 \text{ hours}$$

MEMO

Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd.

1060, Takeda, Hitachinaka City
Ibaraki Pref., 312-8502 Japan

URL: <https://www.himac-science.com>

この取扱説明書は、遠心機本体取扱説明書と一緒にファイルに入れて大切に保存してください。

高速冷却遠心機用アングルロータ

R 1 3 A

- ・ご使用前に必ずこの取扱説明書と高速冷却遠心機本体の取扱説明書をあわせてよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保存してください。

—目次—

1. ロータの仕様	1
2. ボトル・チューブについて	4
3. ロータの使用法	8
4. ロータの手入れ	10
5. 部品・付属品一覧	12
6. 補給用部品一覧	12
7. 汚染除去について	13
8. ロータのリタイアメント	13
9. ロータの廃棄について	13
(付録) Kファクタについて	14

このマニュアルの内容はすべて著作権により保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright © 2022 Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

この取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

〈⚠ マークについて〉

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐため、⚠ マークをつけて注意を促すようにしています。

表示の意味は次のようになっていますので、内容を理解の上、本文をお読みください。

⚠ 警告：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項を示しています。

⚠ 注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される事を示しています。

⚠ 安全にご使用いただくために

遠心機のロータは高速回転しますので、取り扱いの誤りにより装置に多大な損害を与える場合があります。安全にご使用いただくために、ご使用前に遠心機本体およびロータの取扱説明書をよくお読みになり、次のことに十分注意を払ってください。

⚠ 警告

- 引火性、爆発性のある試料は使用しないでください。
- 有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料を分離する場合は、使用者の責任において必要な安全対策を講じた上で行ってください。一般に遠心機およびロータは、遠心中の液漏れや万一の事故などによる試料の飛散を防ぐ構造になっていませんのでご注意ください。
- ロータの最高回転速度（ロータ表面に刻印してあります）を超えての使用はしないでください。また回転速度は、使用するチューブの種類や試料の密度によって制限されることがありますので、取扱説明書を参照してご注意ください。
- 別冊の「耐薬品性一覧表」を参照してロータの材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。ロータの腐食の原因となる場合があります。
- 装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には、必ず使用者の定める適切な汚染除去の手段に従って処理してください。
- お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当に修理を依頼される場合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
- 装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。

⚠ 注意

- ロータカバーは必ず取り付け、カバーハンドルを確実に締付けてください。
- チューブ・ボトルと試料は、キャップ・アダプタを含めてロータの許容インバランス以内にバランスをとってください。許容量を超えたインバランス運転はしないでください。
- ロータの回転軸挿入穴（クラウン穴）と遠心機の回転軸（クラウン）の表面を1回／月の割合で清掃して下さい。回転軸挿入穴や回転軸に汚れや付着物があると、ロータの回転軸への取付けが不完全となり、回転中にロータの離脱を引き起こす恐れがあります。
- チューブ・ボトルは、規定された実容量以下の液量で使用してください。
- 寿命に達したチューブ／ボトルは使用しないでください。回転中にチューブ／ボトルが破損し、ロータや遠心機の損傷を引き起こす恐れがあります。
チューブ／ボトルの寿命は、使用する試料の性質、使用するロータの回転速度、温度など使用する条件により左右されます。
使用前に、チューブ／ボトルが変形していないか傷やひびが入っていないか等をよく確認し、異常が認められる場合は、使用しないでください。
- ロータは使用ごとに手入れと点検を行ってください。異常な点がありましたら、ロータの使用を中止し、お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当までご連絡ください。

1. ロータの仕様

1.1 構成

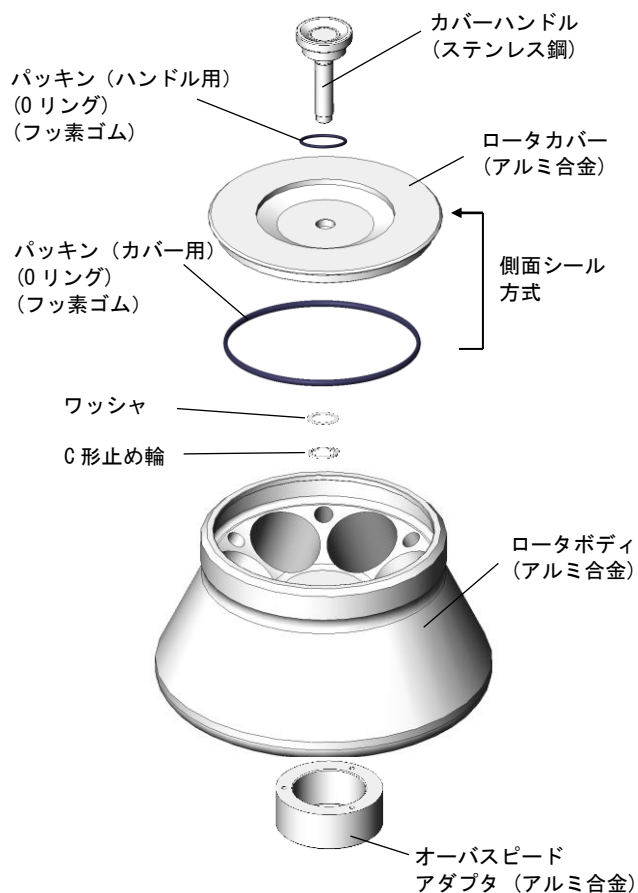


図 1-1 R13A の構成図

1.2 仕様

適用遠心機*1

最高回転速度*2 13,000 rpm

最大遠心加速度 250PP ボトル . . . 26,400 × g
 11PA アチューブ . . . 23,400 × g

ロータ最大容量(呼称) . . . 250mL × 6 本 = 1,500mL

ロータ寸法 φ290 × 193 mm

ロータ質量 11.0 kg

ロータ材質 アルミ合金

ロータ No. 77

*1: 適用遠心機については、ロータに同梱の「適用遠心機一覧表 (高速冷却遠心機用ロータ) (パーツ No.S998611)」を参照願います。

*2: 許容最高回転速度は、遠心機によって異なります。許容最高回転速度については、ロータに同梱の「適用遠心機一覧表 (高速冷却遠心機用ロータ) (パーツ No.S998611)」を参照願います。

1.3 断面図

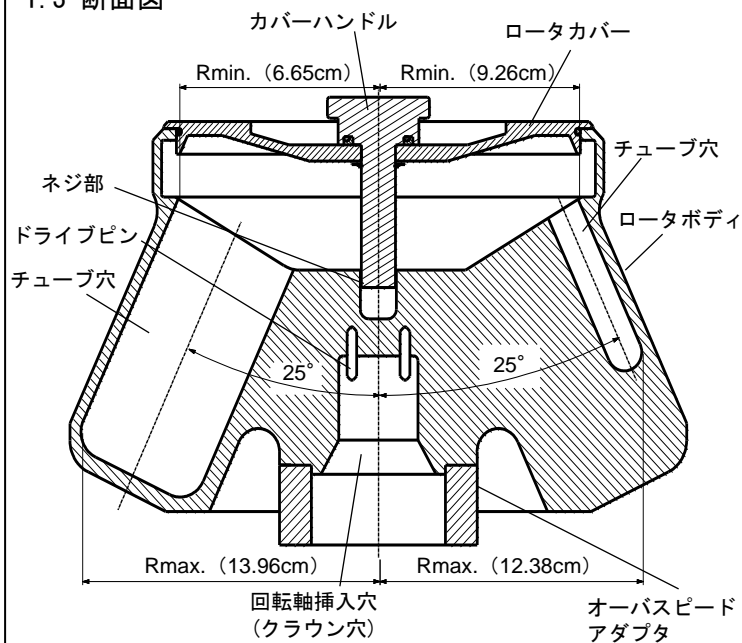


図 1-2 R13A の断面図

1.4 分離特性

表 1-1 R13A 分離特性表

回転速度 (rpm)	250PP ボトル			11PA チューブ		
	遠心加速度 (×g) R = Rmin. (6.65cm)	遠心加速度 (×g) R = Rmax. (13.96cm)	K ファクタ ※	遠心加速度 (×g) R = Rmin. (9.26cm)	遠心加速度 (×g) R = Rmax. (12.38cm)	K ファクタ ※
1,000	74	156	187,844	104	138	73,554
2,000	297	624	46,961	414	554	18,388
3,000	669	1,400	20,872	932	1,250	8,173
4,000	1,190	2,500	11,740	1,660	2,210	4,597
5,000	1,860	3,900	7,514	2,590	3,460	2,942
6,000	2,680	5,620	5,218	3,730	4,980	2,043
7,000	3,640	7,650	3,834	5,070	6,780	1,501
8,000	4,760	10,000	2,935	6,630	8,860	1,149
9,000	6,020	12,600	2,319	8,390	11,200	908
10,000	7,430	15,600	1,878	10,400	13,800	736
11,000	9,000	18,900	1,552	12,500	16,700	608
12,000	10,700	22,500	1,304	14,900	19,900	511
13,000	12,600	26,400	1,111	17,500	23,400	435

※ K ファクタについては、「付録.K ファクタについて」にて詳しく説明します。

回転速度と遠心加速度(RCF)の関係

$$RCF = 1.118 \times 10^{-5} \times R \times N^2 (\times g)$$

R: 回転半径 (cm)

N: 回転速度 (rpm)

1.5 ロータの許容回転速度



警告：

ロータは、いかなる場合でもそのロータの最高回転速度を越えて使用しないでください。
また、ロータの回転速度は使用する試料、チューブ・ボトルおよび遠心機によって制限される場合があります。制限された回転速度を越えて使用しないでください。

ロータは、試料の平均密度が 1.2g/mL 以下で 250PP ボトルを用いた場合に、最高回転速度（ロータカバーの表面に表示されている回転速度）で使用することができます。しかし、使用する試料、ボトル、および遠心機によっては、下記に示すように回転速度が制限されますので、制限された回転速度以下でご使用ください。

(1) 試料の密度による回転速度の制限



警告：

平均密度が 1.2g/mL を越える試料は、下記の計算式によって求められる許容回転速度を越えて使用しないでください。必ず許容回転速度以下でお使いください。

$$\text{許容回転速度 (rpm)} = 13,000 (\text{rpm}) \times \sqrt{\frac{1.2 (\text{g/mL})}{\text{試料の平均密度 (g/mL)}}}$$

(2) ボトル・チューブによる回転速度の制限

ボトル・チューブによっては回転速度が制限されることがあります。詳しくは、「2.2 ボトル・チューブ一覧」を参照の上、許容回転速度以下でお使いください。許容値を越えて使用するとボトル・チューブが変形したり破損する場合があります。

1.6 CR-G II シリーズ用登録データ

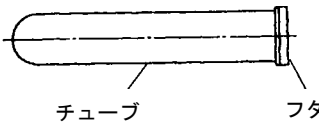
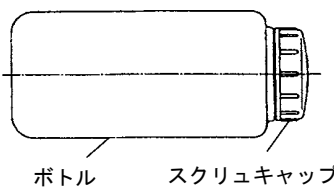
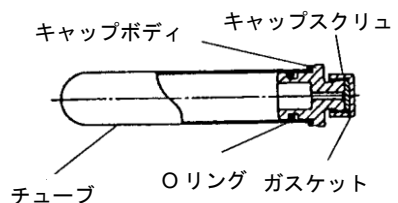
CR-G II シリーズの本体で、本ロータが登録されていない場合は、本体取扱説明書「3-5-5 NEWロータ登録」の手順に従い、下表のデータを入力し、ロータを登録してください。

項目/No.	DATA	項目/No.	DATA	項目/No.	DATA	項目/No.	DATA
ROTOR No.	77	6	2153	12	51065	18	0
1	4000	7	4106	13	32032	19	1154
2	50204	8	42	14	32032	20	0
3	96000	9	16000	15	50200	21	7006
4	5116	10	8001	16	4175	22	14255
5	5096	11	82049	17	0	23	42029

2. ボトル・チューブについて

2.1 ボトル・チューブの種類

ボトル・チューブの形式には一般に次のものがあります。

簡易形		シールキャップ形
(A) チューブ方式	(B) ボトル方式	(C) チューブ方式
		

また、ボトル・チューブの材質には以下のものがあります。

PC：ポリカーボネート

透明で、強度的にも優れています。4℃～25℃でご使用ください。121℃以下でオートクレーブ滅菌ができます。有機溶剤、アルカリ溶液に弱い欠点があります。アルカリ性の洗剤で影響があります。

PP：ポリプロピレン

強度的に優れていますが、低温に弱い（脆化点0℃）欠点があります。4℃～25℃でご使用ください。121℃以下でオートクレーブ滅菌が可能です。

PA：ポリプロピレンコポリマー(PPCO)

強度的に優れています。4℃～25℃でご使用ください。115℃以下でオートクレーブ滅菌が可能です。

SST：ステンレス

耐熱性、有機溶剤などに対する耐薬品性に優れています。121℃以下でオートクレーブ滅菌ができます。

ガラス：透明で耐熱性に優れています。

材質ごとの耐薬品性については、ロータに付属している「耐薬品性一覧表（パーツ No.S999313）」もご覧ください。

2.2 ボトル・チューブ一覧

表 2-1 R13A ロータの使用可能ボトル、チューブ

チューブ・ボトル				チューブアダプタ				キャップ		最高 回転速度 (rpm)	最大 遠心加速度 (xg)
パーツNo. (員数)	品名	寸法 (φ X L cm)	実容量 (mL/本)	パーツNo. (員数)	品名	寸法 (φ X L cm)	材質 *2	パーツNo. (員数)	品名		
S306749A (10本入り)	250PP ボトルクミ	6.2X12.4	250	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
S306750A (10本入り)	250PC ボトルクミ	6.2X12.4	250	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
328343A (2本入り)	300SST チューブ	6.2X12.8	130	---	---	---	---	---	---	13,000	26,400
464977A (50本入り)	10ガラスチューブ	1.2X10.5	7.1	336717A (4本入り)	10G7A300アダプタ	6.1X11.7	POM	---	---	4,000	2,320
473866A (10本入り)	50ガラスチューブ	3.5X10.0	30	336720A (4本入り)	50GA300アダプタ	6.1X11.7	NBR	---	---	4,000	2,180
S311187A (100本入り)	50TCチューブクミ	3.0X11.5	43	S408203A (2本入り)	50TA300アダプタ	6.1X10.5	POM	---	---	11,000	16,200
市販品	50mL PP 培養管(コニカル底)*1	---	43	S408203A (2本入り)	50TA300アダプタ	6.1X10.5	POM	---	---	11,000	16,200
328353A (10本入り)	50PAチューブ	2.9X10.4	28	S407879A (2本入り)	50A300アダプタ(B)	6.1X11.5	PP	328479A (20個入り)	M-PPフタ	10,000	13,600
328354A (10本入り)	50PCチューブ	2.9X10.3	28	S407879A (2本入り)	50A300アダプタ(B)	6.1X11.5	PP	328479A (20個入り)	M-PPフタ	10,000	13,600
S306352A (10本入り)	50PPボトルクミ	2.9X10.3	30	S407879A (2本入り)	50A300アダプタ(B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
328352A (10本入り)	50PCボトルクミ	2.9X10.3	30	S407879A (2本入り)	50A300アダプタ(B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
328342A (2本入り)	50SSTチューブ	2.9X10.2	34	S407879A (2本入り)	50A300アダプタ(B)	6.1X11.5	PP	---	---	10,000	13,600
332094A (10本入り)	80PAボトルクミ	3.8X10.4	54	336722A (4本入り)	80A300アダプタ	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
S308432A (10本入り)	70PCボトルクミ	3.8X10.4	49	336722A (4本入り)	80A300アダプタ	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
326012A (2本入り)	94SSTチューブ	3.8X10.1	40	336722A (4本入り)	80A300アダプタ	6.1X11.7	NBR	---	---	10,000	13,600
333959A (10本入り)	11PAアツチューブ	1.6X8.2	8	---	---	---	---	328478A (20個入り)	C2-PPフタ	13,000	23,400

*1：市販品のチューブは、メーカー指定の許容回転速度または許容最大遠心加速度以下で使用してください。
許容値を越えて使用するとチューブが破損する場合があります。

*2：POM：ポリアセタール NBR：ニトリルゴム PP：ポリプロピレン

許容最高回転速度は、遠心機によって異なります。許容最高回転速度については、ロータに同梱の「適用遠心機一覧表（高速冷却遠心機用ロータ）（パーツ No.S998611）」を参照願います。

ロータの回転速度は、試料の密度等で制限されます。「1.5 ロータの許容回転速度」を参照願います。



注意：

ボトル・チューブは、遠心機の設定温度4～25℃の範囲でご使用ください。この範囲外で遠心するとボトル・チューブが割れたり変形する場合があります。この範囲外で遠心する場合は、予備試験を行い異常が無いことを確認してからご使用ください。

- ・使用条件により、チューブ等が上表記載の最高回転速度に耐えない場合があります。この最高回転速度の数値は、目安であり保証するものではありません。

2.3 ボトル・チューブの洗浄と滅菌

ボトル、チューブの洗浄、滅菌条件は表2-2により最適な方法でおこなってください。

ただし、市販品チューブの洗浄と滅菌につきましては、各チューブメーカー推奨の方法により行ってください。

●PA、PP、PCボトル・チューブのオートクレーブについて

ボトル・チューブをよく洗浄し、耐熱製のボトルスタンドなどに口部を上にして立てます。

変形、破裂を防ぐため、スクリュキャップ、フタを外してください。

滅菌後は滅菌槽が室温まで下がってからボトル、チューブを取り出してください。



注意：

外したスクリュキャップ、フタをボトルの口部に乗せた状態で滅菌しないでください。ボトル内部が密閉状態となり内外の圧力差により変形や破損する場合があります。

●洗浄について

ボトル・チューブは水道水、または中性洗剤の希釈溶液で汚れを落とします。汚れがひどい場合は、中性洗剤の希釈溶液に浸漬するか、柔らかいブラシで傷をつけないよう洗います。その後水道水でよくすすいでから蒸留水ですすぎ、空気中で乾燥します。

PCチューブはアルカリ溶液に弱いため、pH5~9の洗剤を使用してください。また、洗剤の希釈溶液への長時間の浸漬はチューブ・ボトルの強度の低下を招きますので、できるだけ避けてください。

キャップは分解してからチューブ・ボトルと同様に洗浄し、乾燥して保存してください。

表2-2 ボトル・チューブの洗浄、滅菌条件

○使用可 ×使用不可

条件		材質	材質				
			PE	PA	PC	PP	SST
洗浄	洗浄液	pH5 以下	×	×	×	×	×
		pH5~pH9	○	○	○	○	○
		pH9 以上	○	○	×	○	○
	超音波洗浄	温水 (50℃以下)	○	○	○	○	○
滅菌	高圧蒸気滅菌 (オートクレーブ)	中性洗剤 (pH7 の洗浄液使用)	○	○	○	○	○
		115℃ (0.7kg/c m ²)、30 分間	×	○	○	○	○
		121℃ (1.0kg/c m ²)、20 分間	×	×	○	○	○
	煮沸滅菌	126℃ (1.4kg/c m ²)、15 分間	×	×	×	×	×
		15~30 分間煮沸	×	○	○	○	○
	紫外線滅菌	200~300nm	×	×	×	×	○
		ガス滅菌	エチレンオキシド	○	○	×	○
	薬液滅菌		ホルムアルデヒド	○	○	○	○
エタノール (70%)		○	○	×	○	○	
過酸化水素 (3%)		○	○	○	○	○	
	ホルマリン (3%)	○	○	○	○	×	

PE:ポリエチレン PA:ポリプロピレンコポリマー(PCCO) PC:ポリカーボネート

PP:ポリプロピレン SST:ステンレス

2.4 ボトル・チューブの寿命

プラスチック製のボトル・チューブは試料の性質、回転速度、温度など使用する条件によって寿命が左右されます。一般に使用される水系試料(pH5~9)の場合、寿命の目安は次のとおりです。なお、下記の回数は最高許容回転速度で1時間繰返し使用した場合の目安であり、ボトルの使用回数を保証するものではありません。

- (1) チューブ類(PA、PP、PC、PE) 5回
- (2) アツチューブ及びボトル類(PA、PP、PC、PE) .. 50回
- (3) 50TCチューブ及び市販品チューブ 1回

ただし、PCアツチューブ、ボトルは洗浄・滅菌など前処理の条件により寿命の目安が表2-3のようになります。

表2-3 繰返し使用回数

試料	洗浄・滅菌	ガス滅菌 及び湯洗	オートクレーブ 121°C×20分
中性(pH7)		50回	10回
弱アルカリ(pH7~9)		30回	5回

チューブ、ボトルでクレージング（ヒビ割れ）の発生したものは使用しないでください。

3. ロータの使用法

3.1 ボトル・チューブの準備

ボトル、チューブに割れ、変形がないか点検します。著しく変形したものや、割れの生じたものは使用しないでください。



警告：

- ・爆発性、引火性のある試料は、使用しないでください。
本ロータおよび遠心機は防爆構造になっておりません。
- ・遠心機において、病原体、DNA組み替えなど生物的隔離が必要な生体試料、およびRI物質などの使用は安全のうえから使用制限があります。これらの物質を含む試料を分離する場合には、十分な安全管理をおこなってください。



注意：

- ・別冊の「耐薬品性一覧」を参照してボトル、ボトル用キャップ、チューブ等の材質に対して使用不可となっている試料は使用しないでください。材料劣化を引き起こします。
- ・ボトル、チューブの強度や耐薬品性は、温度や回転速度などの影響で変わります。実試料で評価する前に、実際の遠心条件で予備試験を行い、問題が無いことを確認してください。
- ・ボトル、チューブは規定された実容量以下の液量で使用してください。
実容量を越えて試料を入れると、液漏れや変形を起こす場合があります。
- ・ボトル、チューブと試料はアダプタ・キャップを含めて許容インバランス以内にバランスをとってください。
許容量を超えたインバランス運転をすると、遠心機およびロータが損傷する場合があります。
- ・対称位置にセットする試料は、同じ組成、同じ密度の試料を使用してください。
組成や密度が異なると沈殿量に差が生じ、試料の重心位置が不一致となります。その結果インバランス運転となり、遠心機およびロータを損傷する場合があります。
- ・試料と同じ密度の溶液でバランスをとってください。試料間の密度が異なると、インバランス量が増加します。
- ・チューブおよびボトル用キャップはしっかり締付けてください。締付けが弱いと遠心中に液漏れが発生してインバランス運転となり、遠心機およびロータが損傷する場合があります。

ボトル、チューブに試料を入れ、フタをしっかりと締付けます。

フタを使用するボトル、チューブでもOリングが無い場合は、逆さにしたり、振ったりすると試料が漏れる場合があります。

また、試料を実容量を越えて入れますと漏れが生じます。実容量以下でご使用ください。

ロータの対称位置にセットするボトル、チューブのバランスを取ってください。

R13Aではロータの対称位置にセットするボトル、チューブの許容インバランス量(質量差)を4g以内としてください。

3.2 ボトル・チューブのロータへのセット



注意：

1本だけのセット、あるいは、回転軸に対して非対称にボトル、チューブをセットしないでください。過大なインバランス運転となり、遠心機およびロータを損傷する恐れがあります。

ロータのチューブ穴の中に異物が入っていないことを確認します。ボトル、チューブのセット例を下図に示します。ボトル、チューブの本数が偶数の場合、2本1組となるように回転軸に対して対称の位置にセットしてください。ボトル、チューブの本数が奇数の場合、ボトルが等間隔に並ぶようにセットしてください。ロータの運転温度が室温より低い場合、または高い場合はボトルをロータにセットする前にあらかじめロータを予冷または予熱してください。

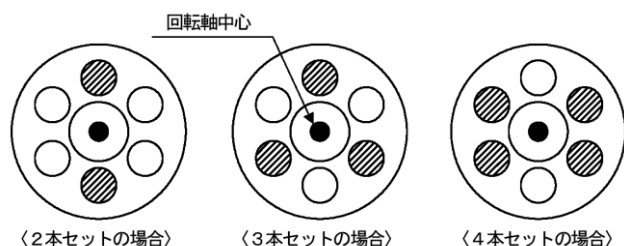


図3-1 ボトル・チューブのセット方法

3.3 ロータカバーの締付け



注意：

ロータカバーは必ず取付け、カバーハンドルをしっかりと締付けて使用してください。
ロータカバーを取付けていなかった場合や、カバーハンドルの締付けが不足していると回転中にロータまたはロータカバーが離脱し、遠心機およびロータを損傷します。

- (1) パッキン（カバー用）にシリコングリス（バキュームグリス）（遠心機本体付属）を塗布して、ロータカバーの溝部へ入れます。
パッキン（カバー用）に損傷、劣化が見られる場合は、新しいものと交換してください。
- (2) カバーハンドルのネジ部へ潤滑グリス（ネジ潤滑剤）（パーツNo.84810601）を塗布します。
ロータカバーをロータボディの上へ乗せます。カバーハンドルを回して、ロータボディにねじ込み、十分に締め付けてください。

3.4 運転

ロータを、静かに確実に遠心機の回転軸にセットします。ロータをセットした際、ロータカバーが取付けられていること、およびカバーハンドルが十分に締付けられていることを確認します。遠心機の取扱説明書に従って運転します。

3.5 試料の取り出し

回転が終わったら、ロータを静かに遠心機から取り出し、カバーハンドルを回してロータカバーを外します。ロータからボトルを取り出して、試料を回収します。

4. ロータの手入れ

4.1 ロータの耐食性



警告：

別冊の「耐薬品一覧表」において、ロータの材質に対して使用不可になっている試料は使用しないでください。

本ロータボディの材質はアルミ合金です。アルミ合金製ロータは、耐食性に優れた素材を使用し表面を陽極酸化被膜で保護しています。しかし、耐薬品性上で使用不可になっている試料を使用しますと腐食や材料の溶解を招き、ロータの強度を低下させます。別冊の「耐薬品性一覧表」を参照して、ロータの耐薬品性が問題ない試料をお使いください。

4.2 ロータの清掃

ロータ破損の原因となる腐食を防ぐため、使用後は手入れをおこなってください。

●通常の手入れ



注意：

ロータの回転軸挿入穴（クラウン穴）と遠心機の回転軸（クラウン）の表面を1回／月の割合で清掃してください。回転軸挿入穴や回転軸に汚れや付着物があると、ロータの回転軸への取付けが不完全となり、回転中にロータの離脱を引き起こす恐れがあります。

ロータの使用後は、水道水または中性洗剤の希釈溶液でよく洗い、蒸留水ですすぎます。柔らかい布で水滴を拭きとり、カバーをとったままロータを逆さまにして乾燥します。ロータが完全に乾いたことを確かめてから、シリコングリース（バキュームグリース）（遠心機本体付属）を薄く塗布し、乾燥した雰囲気の中で保管してください。

●腐食性の試料を用いた場合

使用後直ちに水道水でよくすすぎます。その後、通常の手入れをおこなってください。

●ロータに付着物がある場合



注意：








洗剤をお使いになる場合は、pH5～9の中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用しますと、変色、腐食の原因となります。

ロータを1～2時間温水に浸した後、チューブ穴や、ロータ底の回転軸挿入穴（クラウン穴）を柔らかいブラシでよく洗い、付着物を取り除いてください。とくにロータ底の回転軸挿入穴（クラウン穴）に付着物があると、ロータや回転軸を破損することがありますのでご注意ください。

4.3 ロータの滅菌

R13Aロータの滅菌は、オートクレーブ滅菌(121°C、20分間)、ガス滅菌(エチレンオキシド、ホルムアルデヒド)、薬液滅菌(70%エタノール、3%過酸化水素、3%ホルマリン)のいずれかの方法で行ってください。

プラスチックやゴム製のアダプタの滅菌は、ガス滅菌(エチレンオキシド、ホルムアルデヒド)、薬液滅菌(70%エタノール、3%過酸化水素、3%ホルマリン)のいずれかの方法で行ってください。

-  警告：オートクレーブ滅菌は、ロータカバーを必ずロータから外して行ってください。ロータカバーを取り付けたままオートクレーブ滅菌をすると、ロータやロータカバーが変形する場合があります。
-  警告：煮沸滅菌は強度低下を招くため、絶対に行わないでください。
-  注意：アダプタのオートクレーブ、煮沸滅菌は、絶対に行わないでください。アダプタが変形し、使用できなくなる場合があります。
-  注意：滅菌槽が室温まで下がってからロータおよびロータカバーを取り出してください。
-  注意：滅菌槽からの取り出しは慎重に行ってください。水滴が付いて滑りやすくなっているため、落としてけがをする場合があります。
-  注意：滅菌後はパッキン(カバー用)を点検してください。パッキン(カバー用)が劣化しますと回転中に破損したり、万一液漏れが生じた時の液封ができない場合があります。パッキン(カバー用)に損傷、劣化が見られる場合は新しいものと交換してください。
-  注意：3%ホルマリンでの浸漬滅菌は2時間以内としてください。

4.4 ロータの点検

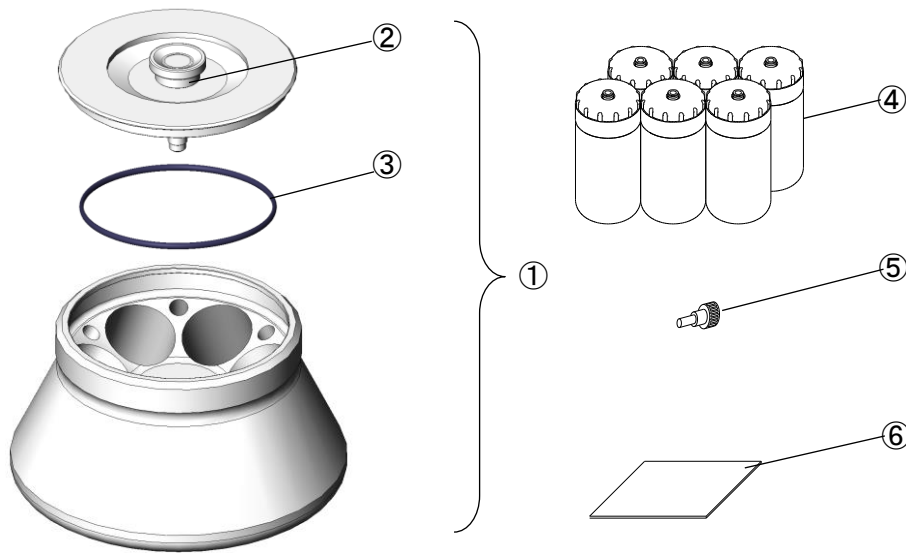
ロータは定期的(100時間使用毎または1回/月)に腐食をチェックしてください。特にロータのチューブ穴およびロータ底のクラウン穴等は、腐食した場合の強度低下が大きいので十分にチェックしてください。腐食は表面の変色、くぼみ、クラック等により見分けることができます。腐食をみつけた時にはその後のロータの使用をやめ、お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当に連絡しチェックを受けてください。

5. 部品・付属品一覧

ロータ受領時に、ロータの部品、付属品のチェックをおこなってください。万一、欠品または不良品がございましたら、お買い求めになられた販売店、または、当社のサービス担当までご連絡ください。

番号	部品名	個数	補給用部品パーツNo. (員数)
①	ロータ	1	—
②	パッキン (ハンドル用) (Oリング)	1*	84521017 (3)
③	パッキン (カバー用) (Oリング)	1*	S411569A (3)
④	250PP ボトルクミ	6	S306749A (10)
⑤	ボトルセッタ	1	84550301 (1)
⑥	取扱説明書	1	S999842

※ロータに組み込まれている個数



6. 補給用部品一覧

外観図	パーツ No.	品名	入数
	84521017	パッキン (ハンドル用) (Oリング)	3
	S411569A	パッキン (カバー用) (Oリング)	3
	84810601	ネジ潤滑剤	1
	483719	シリコングリース (バキュームグリース)	1
	84550301	ボトルセッタ	1
	S999842	ロータ取扱説明書	1

7. 汚染除去について

警告：

- 装置、ロータ、および付属品が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料で汚染された場合には必ず使用者の定める適切な汚染除去の手順に従って処理してください。
- お買い求めいただいた販売店もしくは当社のサービス担当に修理を依頼される場合、装置、ロータ、または付属品等が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料により、人の健康に被害を生ずる汚染された状態またはそのおそれがあるときは、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。
この消毒・汚染除去が完了するまで、当社は装置の修理ができません。
- 装置、ロータ、および部品等を返送される場合は、必ず事前に、装置使用者の責任において適切な消毒・汚染除去を行ってください。尚、ロータに付属している汚染除去書をコピーしご記入の上、修理・返却品等に添付してください。
当社施設で遠心機、ロータ、または付属品等を受け取り、当社の見解として有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料による汚染が除去されていないと判断した場合、装置の処理について指示をいただくためにお客様にご連絡させていただきます。
装置、ロータ、および部品等の消毒・汚染除去等の処理にかかる費用は、お客様にご負担いただきます。この消毒、汚染除去が完了するまで、当社は修理や調査等ができません。
- ご相談、ご質問は、裏表紙の遠心機お客様相談センターにお問い合わせください。

8. ロータのリタイアメント

ロータを長年使用し続けると、経年劣化や腐食等が徐々に進行し、ロータの外観上に変化が見られなくてもロータの強度が低下している可能性があります。このようなロータを使い続けることにより破壊事故等を起こす恐れがありますので、以下に示すリタイアメント年数を過ぎたロータは廃棄されるようお願いいたします。

ロータ種類	材質	リタイアメント年数
高速冷却遠心機用ロータ	アルミ合金 ステンレス鋼	15年

9. ロータの廃棄について

- ・廃棄物は、お使いになったお客様が自らの責任において適正に処理することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法）で定められております。ロータ（バケット、チューブ、ボトル、アダプタなども同様です）を廃棄するときは、産業廃棄物処理の許可を持った廃棄物処理業者に廃棄処理を委託してください。なお、ロータ（バケット、チューブ、ボトル、アダプタなども同様です）が有害物質、放射性物質、病原性物質あるいは感染性が否定できない血液等の試料などで、人の健康に被害を生ずるような汚染が生じていたり、またはその恐れがあるときは、廃棄物処理業者に汚染物質を使用された旨ご通知願います。
- ・ロータの廃棄でお困りの場合は、裏表紙の遠心機お客様相談センターにお問い合わせください。

付録. K ファクタについて

・分離時間の求め方

粒子の沈降時間を推定するために必要なファクターとして、試料固有のファクターである Svedberg unit (S) とロータ固有のファクターである K ファクタがあります。

1S の粒子が Rmin. から Rmax. まで沈降される時間が、K ファクタとなります。

K ファクタは次式により求められます。

$$K = \frac{\ln(R_{\max.}) - \ln(R_{\min.})}{\omega^2} \cdot \frac{10^{13}}{3600}$$

ω : 角速度 $\omega = 2\pi/60 \times N$

N : 回転速度 (rpm)

Rmin. : ロータの回転中心から溶液上面までの距離 (cm)

Rmax. : ロータの回転中心からチューブ底面までの距離 (cm)

K ファクタを用いることにより沈降時間 t (hr) は、

$$t = \frac{K}{S}$$

と表わされます。

例えば、R13A ロータ、250PP ボトルの最高回転速度 13,000rpm での K ファクタは 1,111 であり、このロータを用い 1,000S の粒子を Rmin. から Rmax. まで沈降させるには

$$t = \frac{1,111}{1,000} = 1.1 \text{ 時間}$$

かかり、また同一ロータで 8,000rpm で 1,000S の粒子を分離するには

$$K = \left[\frac{13,000}{8,000} \right]^2 \times 1,111 = 2,934 \quad t = \frac{2,934}{1,000} = 2.9 \text{ 時間}$$

かかることとなります。

MEMO

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060番地

遠心機お客様相談センター **フリーダイヤル** (0120) 02 - 4125 (無料)
(土・日・祝日・弊社特別休業日を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)

(URL <https://www.himac-science.jp>)