



New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation

Manuel d'utilisation

Copyright

Copyright © 2014 Eppendorf AG, Germany. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the copyright owner.

The company reserves the right to change information in this document without notice. Updates to information in this document reflect our commitment to continuing product development and improvement.

Trademarks

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.

New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.

Slo-Blo® is a trademark owned and registered by Littlefuse, Inc. Corporation Illinois, USA.

Phillips® is a registered trademark of Phillips Screw Company in the United States and other countries.

Allen® is a registered trademark of Allen Manufacturing Company, USA.

Sticky Pad® is a registered trademark of American Covers, Inc., USA.

Trademarks are not marked in all cases with ™ or ® in this manual.

Eppendorf has attempted to identify the ownership of all trademarks from public records. Any omissions or errors are unintentional.

1 Instructions d'installation de la plate-forme

1.1 Introduction

Eppendorf a récemment modifié la procédure d'installation et de retrait pour le Agitateur New Brunswick™ I26/26R. Ce manuel vous donne des instructions d'installation étape par étape qui peuvent différer du manuel d'utilisation du I26/26R.



ATTENTION ! Cet appareil doit être utilisé comme décrit dans ce manuel. Si vous ne suivez pas les consignes d'utilisation, des dommages matériels et des blessures peuvent se produire.

- ▶ Veuillez lire le manuel d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil.
 - ▶ Ne pas utiliser cet équipement dans une atmosphère dangereuse ou avec des substances dangereuses pour lesquelles il n'est pas conçu.
-

Instructions d'installation de la plate-forme

New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation
Français (FR)

1.2 Pour charges standard ou légères

Eppendorf recommande d'utiliser cette procédure d'installation de plate-forme si vous prévoyez d'utiliser l'agitateur I26/26R avec une charge utilisant des flacons de 1 L ou moins.

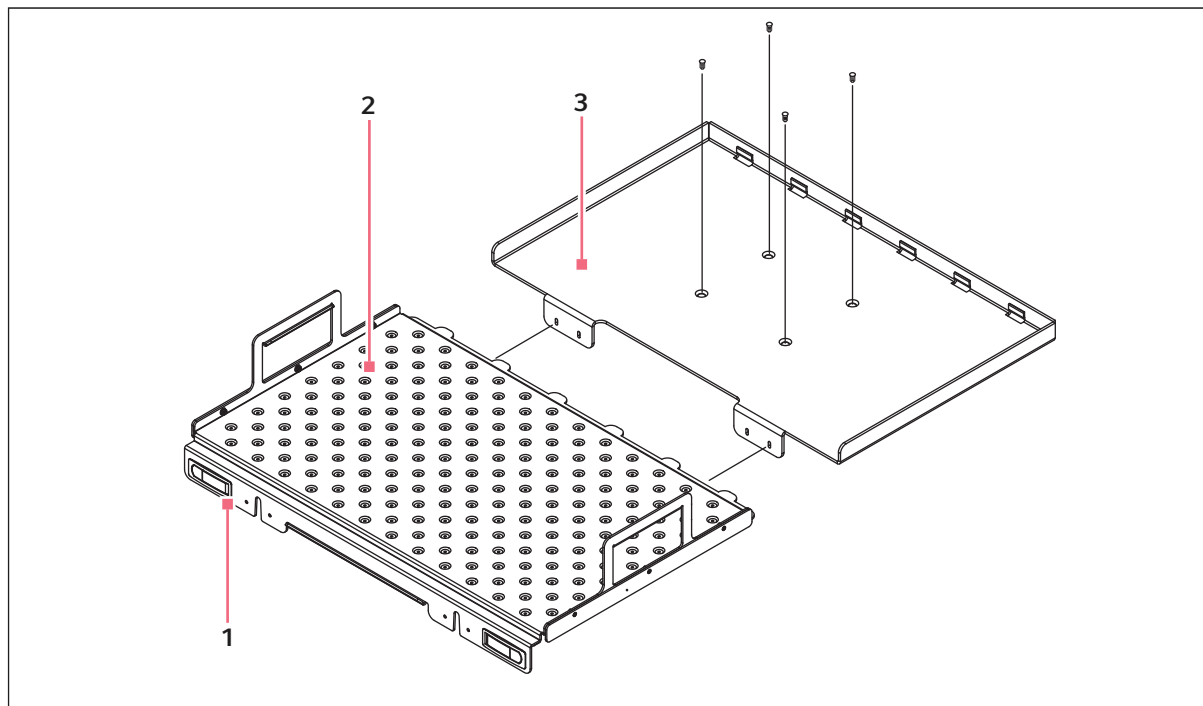


Fig. 1-1: Installation de la plate-forme - charges standard et légères

1 Loquet**3 Sous-plateforme****2 Plate-forme**

Toutes les plate-formes, une fois installées, coulissent facilement dans et hors de l'agitateur.

1. Appuyer sur les boutons à l'avant de la plate-forme pour faire sortir les deux loquets.
2. Avec la poignée au milieu à l'avant de la plate-forme, la tirer vers l'avant pour qu'elle repose sur le guide de la porte. Les deux goupilles d'arrêt de la porte empêchent que la plate-forme tombe de la sous-plate-forme.
3. La faire coulisser à l'intérieur et veiller à bien fermer les loquets avant de réutiliser l'agitateur.

1.3 Pour charges lourdes

Si vous utilisez des charges plus lourdes, il est recommandé d'utiliser les boutons pour attacher la plate-forme. Les plate-formes dédiées universelles, 2 L et 2,8 L comprennent les pièces suivantes :

- 2x P0220-9341 – BOUTON, TROU FILETÉ, 5/16-18, NYLON, BLK
- 2x S1224-2206 – CAPUCHON À VIS ALN 5/16-18X1-1/4BLK
- Rondelles plates et rondelles de blocage

Pour attacher les boutons sur la plate-forme existante :

1. Retirer la sous-plate-forme et la rabattre.
2. Insérer la vis comme représenté(voir Fig. 1-2 à la page 5).

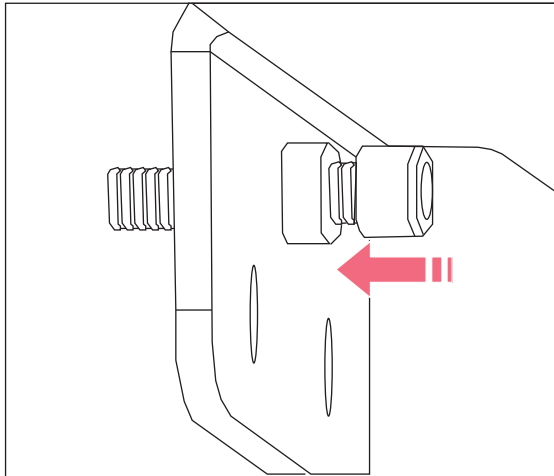


Fig. 1-2: Vis

3. Réinstaller la sous-plate-forme.

Instructions d'installation de la plate-forme

New Brunswick™ I26/26R Shaker Platform Installation
Français (FR)

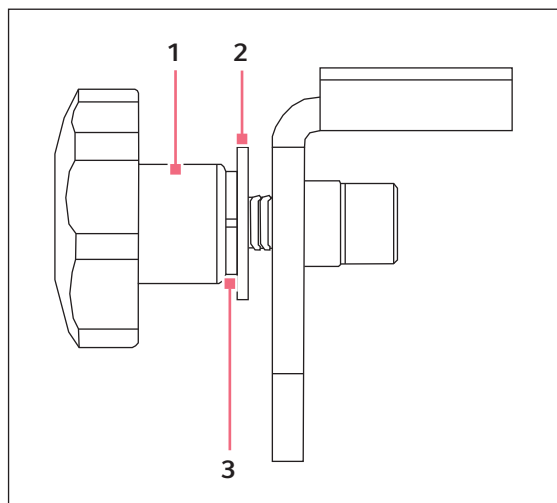


Fig. 1-3: Bouton

1 Bouton

3 Rondelle de blocage

2 Rondelle plate

4. Avec les poignées latérales de la plate-forme (voir Fig. 1-4 à la page 7), placer la plate-forme sur les barres de guidage sur le plat de la porte ouverte.
5. Pousser la plate-forme vers l'arrière de l'unité, en alignant le bas de la plate-forme avec le haut de la sous-plate-forme et en s'assurant que les côtés soient recouverts par les côtés de la sous-plate-forme.
6. Une fois que la plate-forme est complètement insérée et accouplée à la sous-plate-forme, installer la rondelle plate et la rondelle de blocage comme indiqué puis visser le capuchon amovible sur la vis ; serrer comme il se doit(voir Fig. 1-3 à la page 6).
7. Vérifier que la plate-forme est bien attachée à la sous-plate-forme et à l'entraînement.

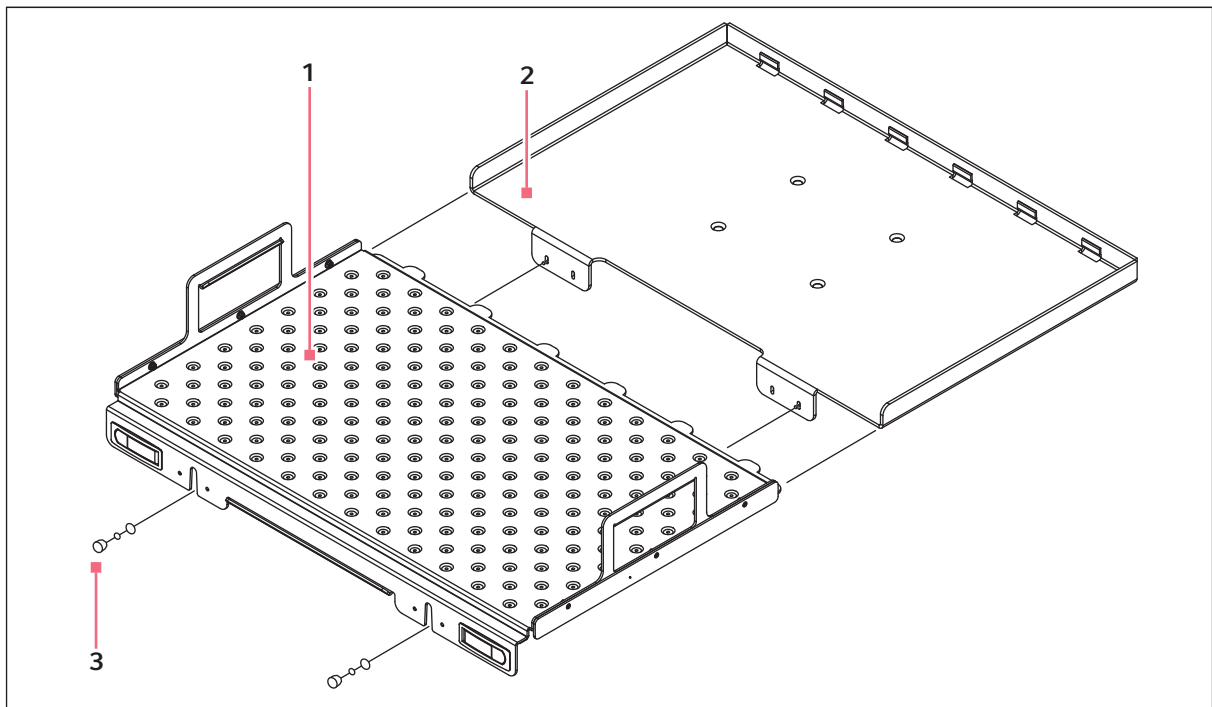


Fig. 1-4: Installation de la plate-forme

1 Plate-forme

3 Bouton

2 Sous-plate-forme

1.4 Élimination

Au cas où ce produit devrait être éliminé, les réglementations en vigueur devront être observées.

Informations sur l'élimination des appareils électriques et électroniques :

Au sein de l'Union Européenne, l'élimination des appareils électriques est régie par les lois nationales basées sur la Directive Européenne 2012/19/EU relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Selon ces règles, certains appareils vendus après le 13 août 2005 en B2B seulement ne peuvent plus être éliminés avec les ordures ménagères ni ramassés avec les encombrants. Cela est indiqué par l'identifiant suivant :



Comme les règles d'élimination peuvent différer d'un pays à l'autre dans l'UE, veuillez contacter le cas échéant votre fournisseur.

En Allemagne, cela est obligatoire depuis le 23 mars 2006. Depuis cette date, le fabricant doit proposer une méthode adéquate pour retourner tous les appareils vendus avant le 13 août 2005. Pour les appareils vendus avant cette date, c'est le dernier utilisateur qui est responsable de l'élimination dans les règles.

Evaluate Your Manual

Give us your feedback.

www.eppendorf.com/manualfeedback

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany

eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com