



Effortless Every Time

Ridefinite la centrifugazione con SpinPro® 6 R

Ridefinite la centrifugazione con SpinPro® 6 R

SpinPro® 6 R è stata progettata pensando agli scienziati moderni, eliminando le questioni critiche e le inefficienze associate alla centrifugazione. Ottimizza i flussi di lavoro, riduce i tempi di inattività e migliora la produttività complessiva del vostro laboratorio. Che eseguiate operazioni di routine o complessi protocolli sperimentali, SpinPro® 6 R è lo strumento sul quale potete contare, in grado di garantire risultati precisi e costanti ogni giorno e ad ogni ciclo, rendendo la centrifugazione veramente semplice.



Semplicemente versatile

- > Diversi rotori, recipienti e adattatori
- > Dalle provette alle piastre e ai flaconi
- > Un solo rotore – diverse applicazioni

Semplicemente affidabile

- > Gestione del ciclo di vita del rotore
- > Riconoscimento RFID del rotore

Semplicemente ergonomica

- > Coperchio elettrico
- > Coperchi rotore Eppendorf QuickLock® Pro

Semplicemente intuitiva

- > Display adattivo e indicatore luminoso a barra
- > Preferiti personalizzabili
- > Login utente senza contatto
- > 19 lingue

Semplicemente conforme

- > Gestione utenti
- > Documentazione avanzata
- > Facile integrazione in sistemi LIMS

Semplicemente sostenibile

- > Certificazione ACT 2.0
- > Funzione di standby
- > Raffreddamento basato su CO₂



La vostra SpinPro® 6 R

Eppendorf SpinPro® 6 R racchiude sostanzialmente oltre 60 anni di eccellenza nella progettazione di centrifughe e orientamento all'utente senza compromessi. È una prova del nostro impegno nei confronti dell'innovazione e della qualità, che supera i limiti di ciò che una centrifuga è in grado di fare. Scegliendo SpinPro® 6 R, investite non solo in un apparecchio, bensì nel futuro della ricerca e nel successo del vostro laboratorio.



Leggerezza ben studiata

Semplicemente versatile

- > Diversi rotori, recipienti e adattatori
- > Dalle provette alle piastre e ai flaconi

Semplicemente ergonomica

- > Azionamento elettrico del coperchio
- > Coperchi rotore Eppendorf QuickLock® Pro

Semplicemente conforme

- > Gestione utenti
- > Documentazione avanzata
- > Facile integrazione in sistemi LIMS

Semplicemente affidabile

- > Gestione del ciclo di vita del rotore (Rotor Lifetime Management, RLM)
- > Riconoscimento RFID del rotore

Semplicemente sostenibile

- > Certificazione ACT 2.0
- > Funzione di standby
- > Raffreddamento basato su CO₂ (GWP 1)

Semplicemente intuitiva

- > Display adattivo e indicatore luminoso a barra
- > Preferiti personalizzabili
- > Login utente senza contatto
- > 19 lingue

SpinPro® 6 R semplifica come non mai le seguenti applicazioni:

- > Raccolta delle colture cellulari
- > Raccolta di batteri/lieviti
- > Trattamento di campioni clinici
- > Isolamento di DNA/RNA/proteine
- > Isolamento di PBMC e dissociazione tissutale







Rotori e loro caratteristiche

Gamma di rotorì versatile

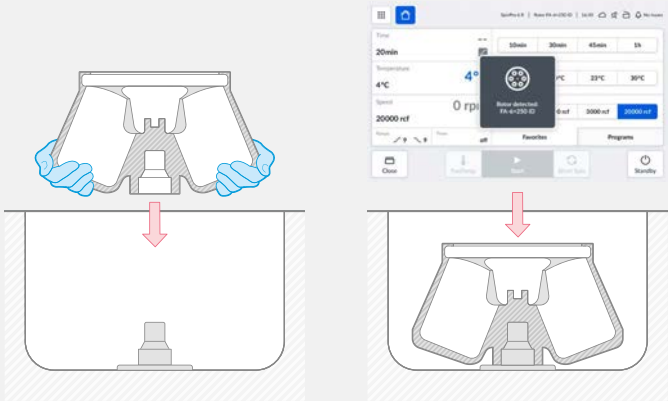
Con la nostra scelta completa di rotorì, avrete a disposizione lo strumento giusto per ogni applicazione. L'ampia gamma di rotorì vi consente di utilizzare diversi tipi di recipienti e volumi, rendendo SpinPro® 6 R adatto a soddisfare numerose esigenze di laboratorio. Che stiate lavorando con campioni delicati o effettuando applicazioni standard come la raccolta cellulare, i nostri rotorì offrono affidabilità e prestazioni costanti.



Gestione del ciclo di vita del rotore

Ottimizzate l'uso del rotore e aumentate la sicurezza con il nostro sistema di gestione del ciclo di vita del rotore. Ogni rotore traccia il suo utilizzo e i cicli in modo indipendente rispetto alla centrifuga. Un allarme viene generato quando si sta avvicinando la fine della vita utile del rotore, garantendo che le sue condizioni siano sempre ottimali. Tale monitoraggio proattivo dell'invecchiamento del rotore previene tempi di inattività inaspettati e contribuisce a mantenere un ambiente sicuro in laboratorio.

Device Health			Rotors		Rotor S-2×Universal ID 16:30		No Issues	
			FA-48×2 ID (5595HQ773729)	good (11%)				
			FA-6×250 ID (5595HQ631804)	marginal (10%)				
			S-2×Universal ID (5495HQ700854)	good (100%)				
			S-2×Universal ID (5495HQ270365)	action required (1%)				
			S-4×400 ID (5495HQ556282)	good (39%)				
Open			FastTemp	Start	Short Spin		Standby	



Coperchi rotore Eppendorf QuickLock® Pro

Il nuovo meccanismo di Eppendorf QuickLock® Pro ottimizza l'uso del coperchio del rotore con una mano sola, all'insegna della praticità e velocità. La guarnizione migliorata riduce al minimo le perdite e il ricorso ai ricambi, mantenendo ben serrato il rotore a velocità elevate, a garanzia di una maggiore sicurezza. Questi miglioramenti snelliscono la preparazione e aumentano l'efficienza del laboratorio.

Riconoscimento istantaneo del rotore:

Utilizzate la tecnologia RFID per l'identificazione automatica istantanea del rotore. Questa funzione riduce in modo significativo il rischio di errore dell'utente, in quanto la centrifuga regola automaticamente i parametri di funzionamento selezionabili in base al rotore installato.





Utilizzo senza intoppi



Software multilingue:

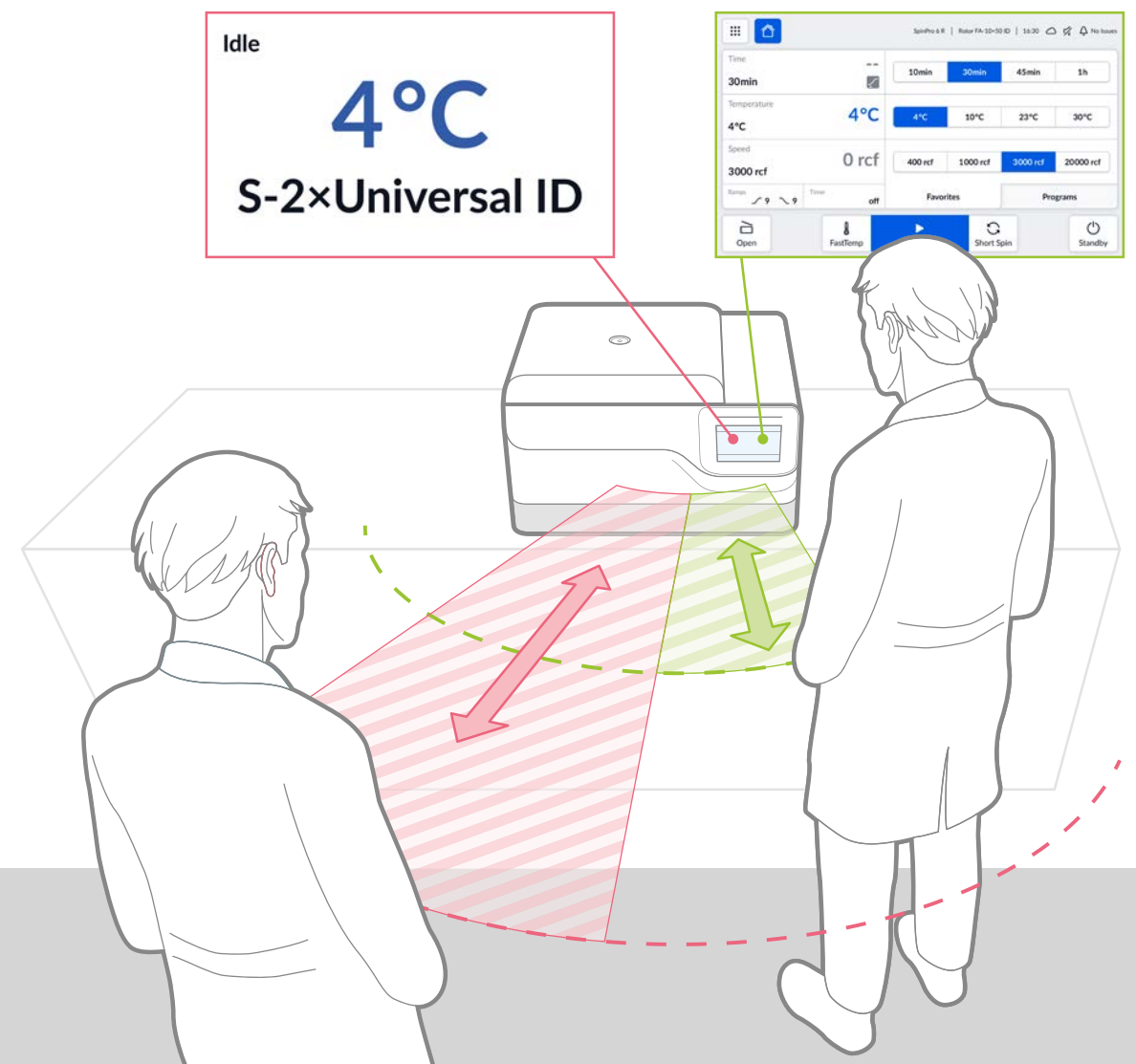
Utilizzate SpinPro® 6 R nella vostra lingua di preferenza grazie a 19 lingue supportate. Gli utenti con diversa provenienza potranno usare facilmente la centrifuga, riducendo il rischio di equivoci ed errori.

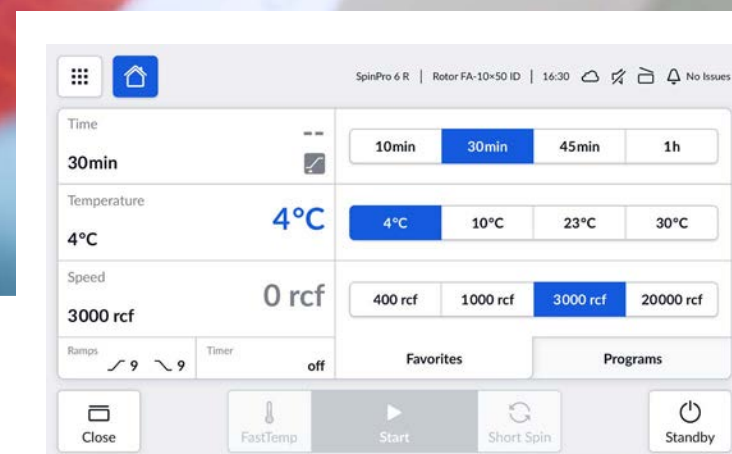
Login utente senza contatto e sistema di gestione utenti:

Il chip RFID offre un accesso facile e sicuro e un login senza intoppi, garantendo che solo il personale autorizzato possa usare l'apparecchio. Il login ne viene semplificato, in quanto si eliminano i passaggi manuali, si risparmia tempo e si personalizzano automaticamente impostazioni come lingua, preferiti e programmi per soddisfare le preferenze dell'utente. Adattate con facilità la centrifuga ai vostri requisiti, monitorate l'accesso con VisioNize® Lab Suite e mantenete la sicurezza nel vostro laboratorio.

Sensore di movimento con display adattivo:

Il display adattivo reagisce alla vostra presenza rilevando la distanza tra voi e lo schermo. Questa tecnologia intelligente garantisce che le informazioni più importanti siano sempre visibili e accessibili – anche da lontano.





Connettività e controllo

Possibilità di integrazione

Ottimizzate i vostri dati e utilizzate parametri misurati come la velocità e la temperatura con sistemi di monitoraggio o di registrazione dati di terzi. I sistemi informativi e gestionali per laboratori (LIMS) o i quaderni di laboratorio elettronici (ELN) possono, ad es., accedere direttamente ai dati utilizzando l'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) all'interno della vostra rete.

Rimanete al passo con i tempi e traete vantaggio dalle innovazioni e funzioni più recenti: grazie alla funzione integrata di aggiornamento wireless, la vostra centrifuga evolverà nel tempo.

VisioNize® Lab Suite

Per una connettività ottimale e senza intoppi, Eppendorf offre VisioNize® Lab Suite per tenere traccia dell'attività della vostra centrifuga, in ogni momento e in ogni luogo.

Collegando gli apparecchi Eppendorf alla VisioNize Lab Suite® potete:

- > monitorare da remoto le prestazioni degli apparecchi
- > ricevere notifiche se si verifica un evento
- > ottenere l'accesso ed esportare i dati dell'apparecchio, i registri degli accessi utente e dei parametri

Approfittate di un abbonamento base gratuito per i primi 3 apparecchi collegati.



Interfaccia touchscreen intuitiva:

Navigate con facilità nella nostra intuitiva interfaccia grafica utente, progettata per aumentare l'efficienza e la produttività con il touchscreen di facile utilizzo. La grafica chiara e i comandi reattivi vi consentono di configurare rapidamente e avviare i protocolli di centrifugazione con il minimo sforzo, anche quando si indossano i guanti.

Azionamento elettrico del coperchio

SpinPro® 6 R è dotato di un azionamento elettrico che apre e chiude automaticamente il coperchio premendo un pulsante. Rendendo automatico il funzionamento del coperchio, abbiamo ridotto le operazioni manuali, aumentato la sicurezza dell'utente e garantito un accesso rapido e semplice ai campioni, oltre ad aver migliorato l'efficienza complessiva del laboratorio.



Sperimentate la nostra VisioNize® Lab Suite
www.eppendorf.link/visionize

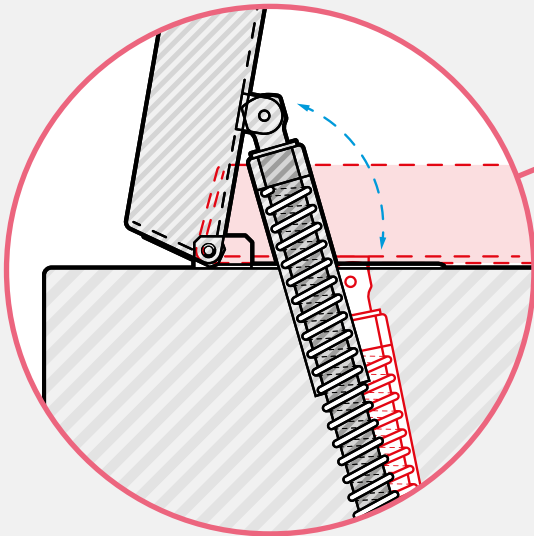
Testata per essere resistente

SpinPro® 6 R è stata progettata per un utilizzo prolungato senza preoccupazioni – anche in laboratori esigenti ad alta produttività. I suoi componenti principali sono sottoposti a test approfonditi lungo l'intero ciclo di vita in condizioni sia realistiche che più severe. Questi test si traducono in un funzionamento affidabile in contesti di utilizzo ridotto, moderato o intensivo, con la disponibilità di tutti i componenti più importanti come parti sostituibili dall'assistenza.

Un esempio dei nostri rigorosi regimi di prova è il test del sistema elettrico del coperchio (azionamento, cerniera e blocco), che viene eseguito su un numero di cicli nettamente superiore rispetto all'uso quotidiano per verificarne l'affidabilità delle prestazioni nel corso di molti anni.




Oltre 10 anni

- Azionamento del coperchio**
- > Testato per 150.000 cicli (da solo)
 - > Testato per 90.000 cicli (con coperchio)
 - > Vita utile equivalente: oltre 10 anni
 - > Sostituibile



Oltre 40 anni

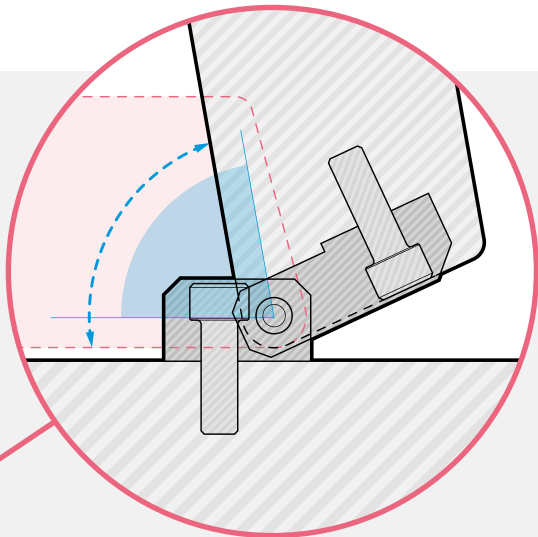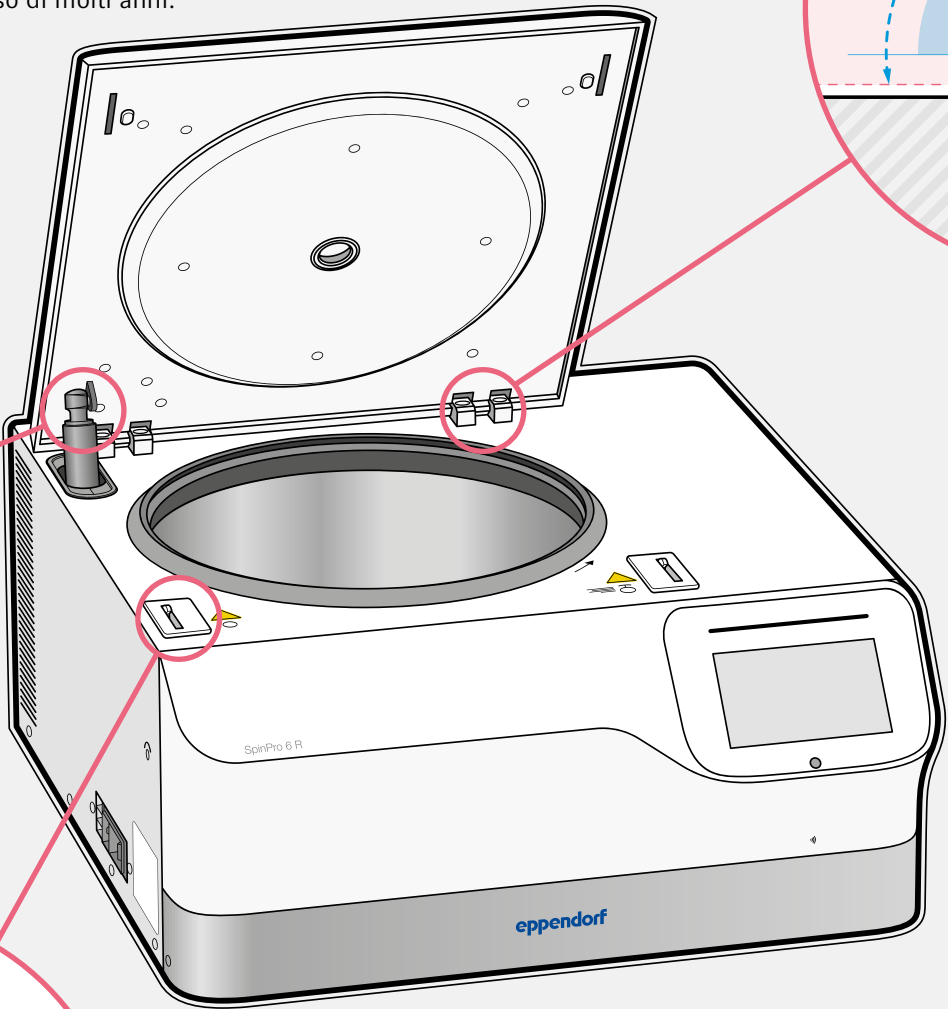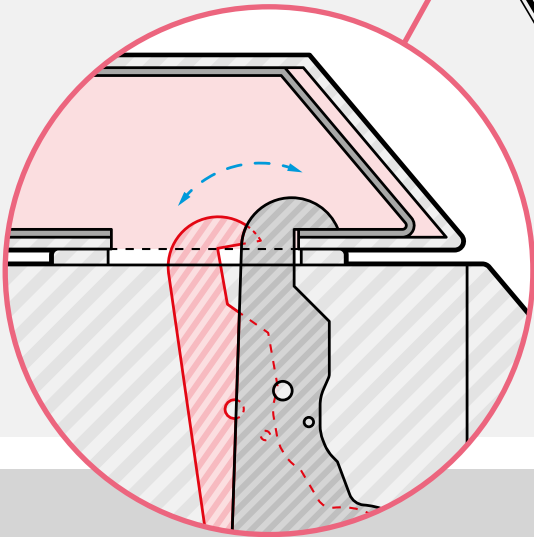- Blocco del coperchio**
- > Testato per 325.000 cicli (da solo)
 - > Vita utile equivalente: oltre 40 anni
 - > Sostituibile



Oltre 10 anni

- Cerniera del coperchio**
- > Testata per 90.000 cicli
 - > Vita utile equivalente: oltre 10 anni
 - > Sostituibile

Panoramica della vita utile

	Cicli	Utilizzo ridotto	Utilizzo moderato	Utilizzo intensivo
Azionamento del coperchio	90.000	Oltre 30 anni	Oltre 15 anni	Oltre 10 anni
Cerniera del coperchio	90.000	Oltre 30 anni	Oltre 15 anni	Oltre 10 anni
Blocco del coperchio	325.000	Oltre 120 anni	Oltre 60 anni	Oltre 40 anni

Calcolo dell'utilizzo

Uso	Cicli/giorno	Durata media ciclo	Giorni/settimana	Settimane/anno	Cicli/anno	Ore/anno
Ridotto	10	15 min	5	52	2.600	650 h
Moderato	20	15 min	5	52	5.200	1.300 h
Intensivo	30	15 min	5	52	7.800	1.950 h

Test speciali

Test di sollecitazione aggiuntivi, con centinaia di parametri casuali e cicli alla massima velocità, test di utilizzo con umidità elevata e test di stress del sistema di raffreddamento confermano che SpinPro® 6 R rimane sicura, stabile e completamente funzionale, consentendo agli utenti di concentrarsi sui campioni, non sulla centrifuga.

Panoramica dei rotori

Con SpinPro® 6 R potete scegliere i rotori più adatti alla vostra applicazione, che lavoriate con campioni delicati con volume ridotto o che eseguiate la raccolta in grandi volumi. La nostra selezione di rotori consente l'uso di un'ampia serie di recipienti. In più, permette un uso rapido e semplice con una mano sola con i coperchi rotore Eppendorf QuickLock® Pro, il riconoscimento automatico tramite chip RFID, una chiusura a tenuta di aerosol ed eccezionali prestazioni di raffreddamento.



Processate un'ampia serie di campioni diversi in tipi di recipienti differenti in questo rotore basculante, grazie al nostro adattatore universale.

Max. capacità: 2 x 1.000 mL
Max. RCF: 4.300
A tenuta di aerosol
Vita utile*: ~ 19 anni (50.000 cicli)



Questo rotore ad angolo fisso è la pratica combinazione di velocità elevate e ampie capacità per le vostre applicazioni.

Max capacità: 6 x 250 mL
Max. RCF: 10.000
A tenuta di aerosol
Vita utile*: ~ 25 anni (70.000 cicli)

Questo rotore ad angolo fisso consente diverse applicazioni a velocità elevate come la separazione dei batteri, degli acidi nucleici o delle proteine.

Max. capacità: 10 x 50 mL
Max. RCF: 15.000
A tenuta di aerosol
Vita utile*: ~ 30 anni (84.000 cicli)



Questo rotore ad angolo fisso ospita un numero elevato di campioni in provette da 1,5 mL e 2,0 mL.

Max. capacità: 48 x 2,0 mL
Max. RCF: 20.020
A tenuta di aerosol
Vita utile*: ~ 38 anni (100.000 cicli)



Questo rotore ad angolo fisso permette di posizionare comodamente un numero elevato di campioni in provette da 1,5 mL e 2,0 mL grazie al bordo ribassato.












Max. capacità: 30 x 2,0 mL
Max. RCF: 20.020
A tenuta di aerosol
Vita utile*: ~ 38 anni (100.000 cicli)

* Il calcolo della vita utile è basato su 10 cicli al giorno, 5 giorni alla settimana, 52 settimane all'anno.

Panoramica adattatori Rotore S-2×Universal ID



Informazioni per l'ordine	
Descrizione	Cod. ord.
Coperchi a tenuta di aerosol, per Rotore S-2×Universal ID, set da 2 pezzi	5910 750 005
Flacone a collo ampio da 750 mL, per Rotore S-4-104, S-4×750, S-4×1000, set da 2 pezzi	5820 708 000
Flacone a collo ampio da 1.000 mL, per Rotore S-4-104, S-4×750, S-4×1000, set da 2 pezzi	5910 770 006

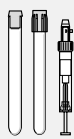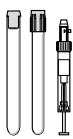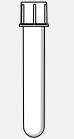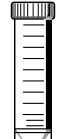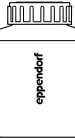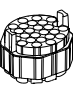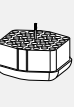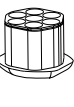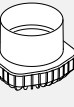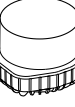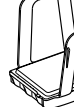										
Adattatori per Rotore S-2×Universal ID										
	4 mL – 8 mL	7,5 mL – 12 mL	9 mL	1,5 mL – 2 mL	12 x 75 mm, 5 mL FACS	50 mL conica, skirted	500 mL Corning®	750 mL	1.000 mL	Piastre MTP, DWP, PCR
Diametro max. provette	13 mm	16 mm	17,5 mm	11 mm	12 mm	31 mm	96 mm	102 mm	118 mm	–
Altezza max. recipiente	119 mm	120 mm	120 mm		112 mm	124 mm	148 mm	139 mm	133 mm	80 mm
Altezza max. recipiente per l'uso con tappo/coperchio ¹⁾	117 mm	118 mm	118 mm	43 mm	107 mm	121 mm	–	135 mm	133 mm	66 mm
Adattatore										
Numero di recipienti per adattatore/rotore	30/60	26/52	21/42	46/92	46/92	7/14	1/2	1/2	1/2	5/10
Fondo	rotondo	rotondo	rotondo	piatto	rotondo	piatto	conico	piatto	piatto	piatto
Raggio di centrifugazione	190 mm	195 mm	188 mm	187 mm	189 mm	185 mm	187 mm	188 mm	188 mm	170 mm
Max. RCF	4.300 x g	4.300 x g	4.256 x g	4.233 x g	4.279 x g	4.188 x g	4.234 x g	4.256 x g	4.256 x g	3.849 x g
Imballaggio	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi
Cod. ord.	5910 755 007	5910 754 000	5910 762 003	5910 763 000*8	5910 758 006	5910 764 006	5910 760 000	5910 757 000	5910 756 003	5910 753 004

¹⁾ Si prega di eseguire un test manuale per determinare l'attuale capacità di carico.

²⁾ Coperchi a tenuta di aerosol compatibili con MTP, DWP 96 500 µL, DWP 384 200 µL.

³⁾ Coperchi a tenuta di aerosol non compatibili con DWP 96 1.000 µL e 2.000 µL.

⁴⁾ Ordinare l'adattatore per provette coniche da 25 mL con tappo a pressione 5820 733 004.

⁴⁾ Se utilizzato con coperchi a tenuta di aerosol, la capacità max. è limitata a 20 x 50 mL (5 x 50 mL per adattatore).

⁵⁾ Ordinare l'adattatore per provette coniche da 25 mL con tappo a pressione 5820 734 000.

⁶⁾ Tenere presente che questi flaconi conici devono essere utilizzati insieme ad un inserto di forma conica fornito dal produttore.

Adattatori universali per Rotore S-2×Universal ID



Adattatore universale 1
Adatto per piastre deepwell ed Eppendorf Tubes® 5.0/15 mL.



Adattatore universale 2
Adatto per micropiastre e provette coniche da 25/50 mL.

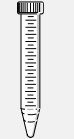
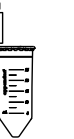
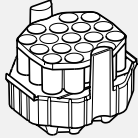

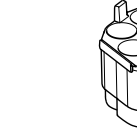
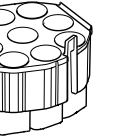


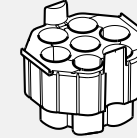
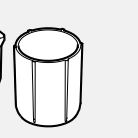




Adattatore universale 3
Adatto per provette coniche da 25/50 mL, flaconi da 250 mL e micropiastre.

Il Rotore S-2×Universal ID offre un'eccezionale versatilità a tutti quei clienti che devono centrifugare diverse provette e piastre. Tre innovativi adattatori universali ospitano provette, piastre e flaconi selezionati:

- > Adattatore 1: provette coniche da 5,0 mL e 15 mL, MTP/DWP
- > Adattatore 2: provette coniche da 25 mL e 50 mL, MTP
- > Adattatore 3: provette coniche da 25 e 50 mL, flaconi da 250 mL, MTP

Per i clienti che hanno bisogno dell'opzione di impilaggio, di una velocità più elevata o di una centrifugazione a tenuta di aerosol di determinati formati di piastre, è disponibile un porta piastre a parte.

												
Eppendorf Tubes® 5,0 mL	15 mL conica	MTP, DWP	25 mL tappo a pressione ³⁾	25 mL tappo a vite ⁵⁾	50 mL tappo a vite	Micropiastra da 96/384 pozzetti	25 mL tappo a pressione ³⁾	25 mL tappo a vite ⁵⁾	50 mL conica	45 mL tappo a pressione	Micropiastra da 96/384 pozzetti	250 mL piatto 175–225 mL conico ⁶⁾
17 mm	17 mm	–	30 mm	30 mm	30 mm	–	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	–	62 mm
124 mm	124 mm	64 mm	83 mm	78,5 mm	116 ⁴⁾ mm	16 mm	83 mm	78,5 mm	124 mm	133 mm	16 mm	146 mm
122 mm	122 mm	²⁾	83 ⁴⁾ mm	78,5 ⁴⁾ mm	116 ⁴⁾ mm	–	83 mm	78,5 mm	121 mm	133 mm	–	139 mm
												
17/34	17/34	1/2	9/18	9/18	9/18	1/2	7/14	7/14	7/14	7/14	1/2	1/2
conico	conico	piatto	conico	conico	conico	piatto	conico	conico	conico	conico	piatto	piatto
191 mm	191 mm	143 mm	107 mm	156 mm	192 mm	115 mm	107 mm	155 mm	191 mm	188 mm	115 mm	187 mm
4.300 x g	4.300 x g	3.237 x g	3.758 x g	3.531 x g	4.300 x g	2.604 x g	3.735 x g	3.509 x g	4.300 x g	4.256 x g	2.604 x g	4.234 x g
set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi	set da 2 pezzi
5910 752 008			5910 769 008				5910 751 001					



Le tue opzioni di assistenza

I nostri contratti di assistenza – i vostri vantaggi

Con le soluzioni offerte in merito ai contratti di assistenza, vi supportiamo semplificando il processo di ordinazione e la gestione del budget per diversi servizi per l'intera vita utile dei vostri apparecchi.

I vostri costi diventano così più bassi e prevedibili e questo garantisce una produttività continua e una lunga durata di utilizzo. Inoltre, i nostri contratti includono i costi di riparazione, integralmente o in parte, e sconti per altri servizi.

Servizi di qualificazione

Servizi IQ e OQ – conformità GxP supportata

Lavorate in un ambiente regolamentato? Offriamo servizi di Installation Qualification (IQ) e Operational Qualification (OQ) appositamente concepiti, inclusa la documentazione a supporto della conformità alle normative GxP. Questi documenti

sono conformi ai complessi standard e alle normative GxP, riducendo il carico di lavoro amministrativo, e vi forniscono la certezza che il vostro strumento è installato e funziona secondo le specifiche del produttore.

Contratti di assistenza Eppendorf



Contratto di assistenza	AdvancedCare	PremiumCare
Manutenzione preventiva completa	1/anno	1/anno
Assistenza con priorità*1	■	■
Ricambi, manodopera, trasferte per riparazioni	Sconto del 20%	inclusi
Sconto su servizi aggiuntivi (ad es. IQ/OQ)	10%	10%

*1 Soggetta a condizioni commerciali locali e basata su una "best effort practice". Per maggiori informazioni, contattare l'organizzazione di assistenza locale.



Servizi di Installation Qualification e Operational Qualification	GxP IQ/OQ	GxP OQ
Controllo dello stato di consegna e dell'ambiente di installazione	■	–
Installazione incl. configurazione e controlli funzionali	■	–
Rapporto IQ dettagliato	■	–
Test di funzioni di notifica	■	■
Verifica di parametri dell'apparecchio (ad es. temperatura, velocità)	■	■
Rapporto OQ dettagliato e gestione dell'elenco degli scostamenti	■	■
Approvazione firmata da parte del cliente e del tecnico di manutenzione	■	■

Vista d'insieme di SpinPro® 6 R

Caratteristiche principali	Caratteristiche aggiuntive
Sostenibilità	> Interfaccia multilingue a sfioramento da 7 pollici per un utilizzo semplice
> Sistema di raffreddamento basato su CO ₂ (GWP 1)	> Sensore di movimento e di luce ambientale
> ACT 2.0 ecolabel	> Indicatore luminoso a barra per monitorare visivamente lo stato
Praticità e compliance	> Riconoscimento automatico dello sbilanciamento
> Maggiore sicurezza grazie al riconoscimento del rotore tramite RFID e al tracciamento dei cicli del rotore	> Documentazione avanzata che supporta la conformità al codice CFR 21 parte 11
> Funzione Preferiti per impostare i parametri in una manciata di secondi	
> Azionamento automatico del coperchio	
> Gestione utenti avanzata	
Versatilità	
> Rotore S-2xUniversal ID per centrifugare un'ampia gamma di recipienti senza dover sostituire il rotore o i cestelli	
> Rotore 6x250 ID a capacità elevata, con coperchio rotore Eppendorf QuickLock® Pro a tenuta di aerosol	

Specifiche tecniche	
Velocità massima	
Max RCF	
> Rotori ad angolo fisso	20.020 × <i>g</i>
> Rotore basculante	4.300 × <i>g</i>
Max. velocità	13.500 rpm
Capacità max.	2 × 1 L
Massima potenza assorbita	2.160 W
Livello di rumorosità	< 70 dB(A)
Intervallo di temperatura	da –11 °C a 40 °C

Dimensioni	
L x P x A	706 × 745 × 385 mm
Altezza con coperchio aperto	867 mm
Ingombro	
> Piastra base	700 × 700 mm
> Distanza piedini	515 × 598 mm
Peso (senza accessori)	100 kg
Peso di spedizione	132 kg

Materiali di costruzione e refrigeranti	
Alloggiamento	Acciaio zincato verniciato a polvere resistente agli agenti chimici
Parte anteriore e coperchio esterno	Materiale termoplastico ignifugo
Caldaia del rotore	Acciaio inossidabile
Rotori ad angolo fisso	Alluminio
Rotori basculanti	Alluminio
Refrigerante	R744 (250 g)

Informazioni per l'ordine

Informazioni per l'ordine	
Descrizione	Cod. ord.
Centrifuga SpinPro® 6 R, refrigerata	Vedere codice QR sotto alla tabella
Rotore	
Rotore S-2xUniversal ID	5595 700 001
Rotore FA-6x250 ID	5595 705 003
Rotore FA-30x2 ID	5595 707 005
Rotore FA-48x2 ID	5595 709 005
Rotore FA-10x50 ID	5595 703 002

Per le informazioni per l'ordine, consultare il nostro sito Internet o contattare il rappresentante di zona.

www.eppendorf.link/spinpro6r-centrifuge

Questo prodotto è disponibile come dispositivo diagnostico in vitro/dispositivo medico in determinati paesi. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante di zona.

www.eppendorf.link/contact

Il tuo distributore locale: www.eppendorf.com/contatto

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano 1
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com

Corning® is a registered trademark of Corning Inc., USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, SpinPro®, VisioNize®, Eppendorf Tubes® and Eppendorf QuickLock® Pro are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2026 by Eppendorf SE.
Order No.: AA01 054 150/IT1/PDF/0426/SSO