

新製品 コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ、タンパク質低吸着タイプ

高い品質と優れた性能でご愛顧いただいております、エッペンドルフのコニカルチューブに新タイプが加わります！

コニカルチューブシリーズ製品特長

- ✓ 密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン
- ✓ 回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ
- ✓ 最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能
- ✓ 可塑剤、スリッパ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制

サンプルのご依頼はこちら：info@eppendorf.jp



内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ


光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。

エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。

チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。



Application note 403

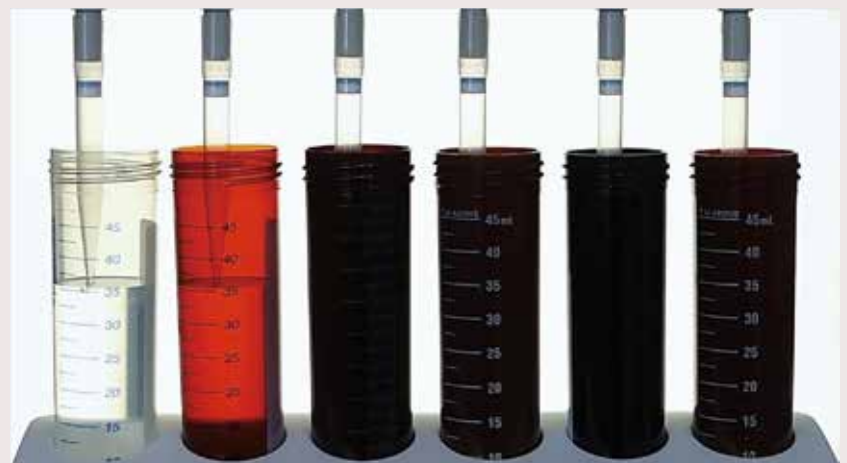

Eppendorf clear Eppendorf Amber Gr社 V社 Ar社 Lc社

タンパク質の回収率を高める低吸着性チューブ


生物学的なサンプルを保存すると、プラスチックの表面への吸着により、24 時間以内に 90% 以上が失われてしまう場合があります。

エッペンドルフの低吸着性チューブが、タンパク質サンプルの表面への結合を大幅に減らし、回収率を最大限に高めます。

コーティングは一切しておりませんので、酵素活性が失われたりタンパク質が変性したりする恐れはありません。




Application note 404

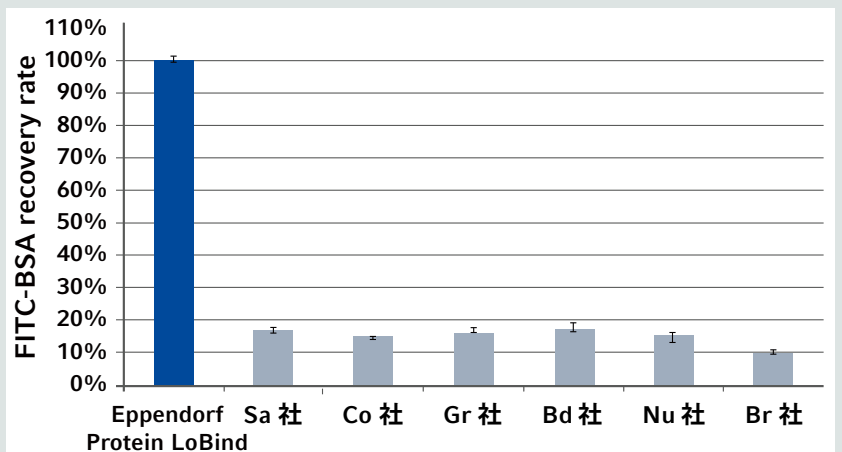

テクニカルデータ

	コニカルチューブ 15 mL	コニカルチューブ 50 mL
サイズ:長さ	121 mm	116 mm
直径	17 mm	30 mm
材質:チューブ	ポリプロピレン (USP class 6 原料)	
スクリューキャップ	高密度ポリエチレン (HDPE)	
オートクレーブ耐性	無し	
使用温度範囲	-86°C ~ 100°C	
耐遠心力	最大19,500 x g*	

* 遠心耐性試験条件: 冷却遠心機5810 R、アングルローターFA-45-6-30および15 mLコニカルチューブ用アダプターを使用。サンプルは生理食塩水 (密度: 1.0 g/mL) を用い、25°Cで90分間遠心しました。

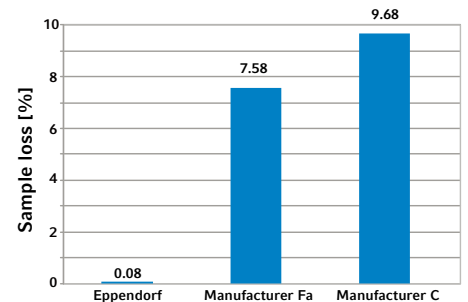

蓋の密閉性の比較。96% エタノールを -86°C で 24 時間保存後の重量変化を比較しました。

注文案内

品名	販売単位	Order no.	希望小売価格	備考
エッペンドルフコニカルチューブ15 mL	500本 (50本×10袋)	0030 122.151	¥ 18,300	*1
" 、ラック入	500本 (25本×20ラック)	0030 122.160	20,100	*1
" 、茶	200本 (50本×4袋)	0030 122.194	7,300	*1、遮光性
" 、Forensic DNA Grade	100本 (個別包装)	0030 122.259	9,000	*2、ISO 18385に適合
" 、Protein LoBind	200本 (50本×4袋)	0030 122.216	10,400	*2、タンパク質低吸着性
" 、DNA LoBind	200本 (50本×4袋)	0030 122.208	8,900	*2、核酸低吸着性
エッペンドルフコニカルチューブ50 mL	500本 (25本×20袋)	0030 122.178	21,900	*1
" 、ラック入	300本 (25本×12ラック)	0030 122.186	17,100	*1
" 、茶	200本 (25本×8袋)	0030 122.224	8,900	*1、遮光性
" 、Forensic DNA Grade	48本 (個別包装)	0030 122.267	5,100	*2、ISO 18385に適合
" 、Protein LoBind	200本 (25本×8袋)	0030 122.240	12,100	*2、タンパク質低吸着性
" 、DNA LoBind	200本 (25本×8袋)	0030 122.232	10,700	*2、核酸低吸着性
チューブラック5.0/15 mL	2個	0030 119.827	5,800	*3、12本用
チューブラック5.0/15/50 mL	2個	0030 119.835	5,800	*3、12本用 (5.0/15 mL×6本、50 mL×6本)
ストレージボックス5×5	2個	0030 140.583	2,500	*4、15 mLチューブ25本用
ストレージボックス3×3	2個	0030 140.591	2,500	*4、15 mLチューブ×4本および50 mLチューブ×9本用

*1 滅菌済 (SAL 10⁻⁶)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free

*2 human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

*3 ポリプロピレン製、オートクレーブ可能

*4 ポリプロピレン製、オートクレーブ可能、-86°Cまでの冷凍用

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2019年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。



ラック入りの 15 mL コニカルチューブと 50 mL コニカルチューブ。



チューブラック 5.0/15/50 mL。15 mL コニカルチューブと 50 mL コニカルチューブを 6 本ずつ立てられます。



ストレージボックス 3 × 3。15 mL コニカルチューブ 4 本と 50 mL コニカルチューブ 9 本を保存できます。