

リキッドハンドリングキャンペーン

2020年2月3日～ 6月30日



For your perfect start

リキッドハンドリングキャンペーン

エッペンドルフの大人気製品がキャンペーンに登場!

分注回数の多いアプリケーションや、粘性・揮発性の高い液体の正確な分注に最適な、**手動/電動連続分注器**を **25% OFF** で提供いたします。

また、実験台の整頓に欠かせない**ピペットスタンド**も **25% OFF** で提供いたします。

さらに、**手動マイクロピペット3本パック**に**お好きなピペット**を**1本プレゼント!**

このチャンスをお見逃しなく!



手動連続分注器 Multipette M4 25% OFF



YouTube



使い方はこちら

エッペンドルフの連続分注器 Multipette M4 は、ポジティブディスプレイメント式を採用し、扱いづらい液体も正確性高く分注できる、ラボに必須のピペットです。通常の Multipette M4 に加え、各容量コンビチップアドバンス 1 本+コンビチップアドバンス用ラックが付属したスターターキットも **25%OFF** の特別価格でご提供致します！


- > 最大 100 回まで連続的に分注
- > 1 μ L ~ 10 mL までの連続分注
- > 通常のピペットでは扱いにくい液体を正確に分注できます
- > 繰り返しの分注作業にかかる時間を短縮します

粘性のある液体や有機溶媒は「正確に分注できない」？

粘性、揮発性のある液体、界面活性剤の入った液体を正確に分注できていますか？

Multipette M4 があれば、扱いづらい液体もきわめて正確・安全に分注できます。

90%グリセロールの分注精度

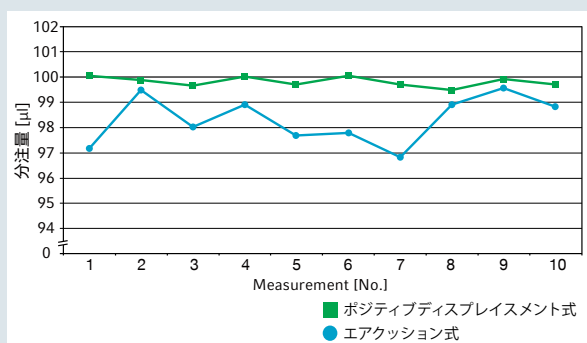

アクション式ピペット、ポジティブディスプレイメント式ピペットにて分注量を比較した結果、ポジティブディスプレイメント式ピペットはより正確に再現性良く分注できることが示されました。


Application note no. 211 Eppendorf AG

96 ウェルプレートに PCR Mastermix を分注するとき、どれくらいの時間をかけていますか？

連続分注器 Multipette M4 は、連続的な分注をスピーディーに実行でき、ラボ全体の作業効率の UP に貢献します。

さらに、ステップカウンター付きで作業を中断してもミスなく続けられます。

96ウェルプレートへの分注の所要時間

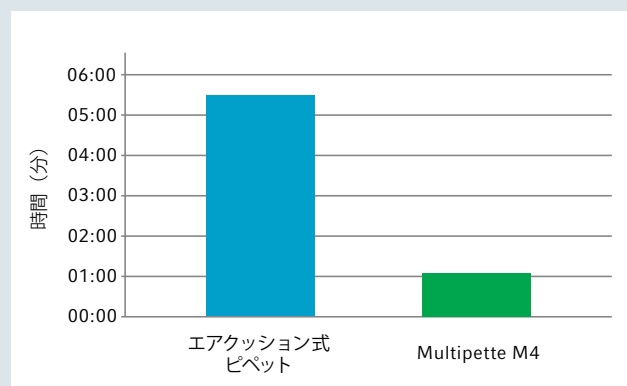

プレートへの分注に Multipette M4 を使うと、約 1/5 の時間で作業が完了。ルーチンワークを短時間で終えて、効率よく実験を行えます。

注文案内

品名	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格
Multipette M4	4982 000.012	¥51,600	¥38,700
Multipette M4 Starter Kit	4982 000.314	¥53,000	¥39,750

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格は 2020 年 1 月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

電動連続分注器 Multipette E3 / E3x **25% OFF**

Multipette E3 / E3x 製品特長

- > ルーチン作業にかかる時間を大幅に短縮する連続分注機能
- > マニュアルタイプと比較して、より柔軟な容量設定
- > 1 μ Lから50 mLまで、最大100回の分注が可能
- > ポジティブディスプレイメント方式により、粘性・揮発性の高い液体、界面活性剤を含む液体も精度よく分注可能
- > 連続分注だけでなく、1 μ Lから50 mLの精度の高いピペティングにも使用可能
- > 日本語表示可能な大きなカラーディスプレイで、より使いやすく
- > 各モード、各チップ容量につき5件の設定を保存可能

一目でわかるMultipette E3 / E3x	Multipette E3	Multipette E3x
連続分注: 1度に最大100ステップまでの連続分注	■	■
自動連続分注: 0.1~10秒の一定の間隔で連続分注	■	■
ピペティング: 最大50 mLの正確なピペティング	■	■
シークエンシャル連続分注: 最大16ステップの個別容量設定をした連続分注		■
連続吸引: 上清の回収		■
滴定: 液体を慎重に排出し、容量を表示		■
吸引+連続分注: 容量が不明な液体を吸引して容量を測定し、そのまま設定した容量での連続分注		■



注文案内

品名	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格
Multipette E3	4987 000.010	¥88,900	¥66,675
Multipette E3, 充電スタンド付き	4987 000.371	¥101,000	¥75,750
Multipette E3x	4987 000.029	¥114,000	¥85,500
Multipette E3x, 充電スタンド付き	4987 000.380	¥122,000	¥91,500

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格は2020年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

ピペットスタンド - 2 **25% OFF**



実験台にこぼれた化学物質からピペットを守るためには、ピペットをスタンドに掛けて保管する必要があります。ホルダーを交換することで、現行のピペットおよび連続分注器はもちろん、前の世代の機種も掛けられます。ホルダーは工具なしで簡単に交換できます。

注文案内

品名	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
回転ピペットスタンド-2 (6本架)	3116 000.015	¥19,600	¥14,700	マニュアルピペット用
回転充電スタンド-2 (6本架)	3116 000.023	¥62,300	¥46,725	電動ピペットXplorer / Xplorer plus用*
ピペットスタンド-2 (1本架) Multipette M4用	3116 000.058	¥15,300	¥11,475	
ピペットホルダー -2 Multipette M4用	3116 000.147	¥5,300	¥3,975	スタンドへの装着または壁掛け用
充電ホルダー -2 電動Multipette用	3116 603.003	¥6,900	¥5,175	充電スタンドへの装着用

*Multipette E3 / E3xの充電には、充電ホルダー -2 電動 Multipette 用が別途必要となります。

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格は2020年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

3本パック+1専用ご注文用紙

- ①ご購入いただくピペット3本パックと②ご希望のピペット、③お客様情報をご記入の上、代理店にお渡し下さい。
 ④代理店様は必要事項をご記入の上、弊社業務部(03-6657-5046)までFAXをお送りください。
 ご注文の3本パックに、ご希望のピペット1本をプレゼント致します!

リファレンス2 / リサーチプラス 3本パック + 1本プレゼント



ピペットパック内容：リファレンス2パック、リサーチプラスパックには各機種の本体3本およびepT.I.P.S. Box（チップ96本、オートクレーバブルボックス1個）またはチップサンプルが含まれます。詳細は以下をご参照ください。

①ご購入いただくピペット3本パックを下記よりお選び下さい。

ピペットパック内容

パック1: マイクロピペット 0.5-10, 10-100, 100-1,000 μL 各1本
epT.I.P.S. Box 0.1-20, 2-200, 50-1,000 μL 各1箱

パック2: マイクロピペット 2-20y, 20-200, 100-1,000 μL 各1本
epT.I.P.S. Box 2-200 μL x 2箱, 50-1,000 μL x 1箱

パック3: マイクロピペット 100-1,000 μL , 0.5-5 mL, 1-10 mL 各1本
epT.I.P.S. Box 50-1,000 μL x 1箱, 5 mL, 10 mLチップサンプル

Order no.	品名	希望 小売価格	ご購入数
4920 000.903	リファレンス2 パック 1	¥97,600	
4920 000.911	リファレンス2 パック 2	¥97,600	
4920 000.920	リファレンス2 パック 3	¥97,600	
3120 000.909	リサーチプラス パック1	¥96,200	
3120 000.917	リサーチプラス パック2	¥96,200	
3120 000.925	リサーチプラス パック3	¥96,200	

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格は2020年1月現在の価格で、消費税は含まれておりません。

②ご希望のプレゼントを下記よりお選び下さい。

リファレンス 2/V

0.1-2.5 μL 0.5-10 μL 2-20 μL / クリスタル2-20 μL / イエロー10-100 μL 20-200 μL 30-300 μL 100-1000 μL

0.25-2.5 mL

0.5-5 mL

1-10 mL

リサーチプラス V

0.1-2.5 μL 0.5-10 μL 2-20 μL / クリスタル2-20 μL / イエロー10-100 μL 20-200 μL 30-300 μL 100-1000 μL

0.25-2.5 mL

0.5-5 mL

1-10 mL



リファレンス 2/V

- > ワンボタンチップイジェクト
- > 見やすい容量表示とロックボタン
- > より堅牢でクリーニングも容易

リサーチプラス V

- > 超軽量ピペット
- > 見やすい容量表示
- > スピーディーな容量ダイヤル

※ プレゼント品のピペットにチップは付属しておりません。

③お客様情報ご記入欄

お名前	お電話番号	メールアドレス
ご勤務先/学校名	ご所属	

※ ご記入いただきましたお客様の個人情報は法令に従い、Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社の業務遂行またはサービスのためにのみ利用し管理しています。Eppendorf AGおよびエッペンドルフ株式会社から、製品やサービスに関する新しい情報などをお届けすることがあります。お客様がこうしたお知らせのためのDM、メーリングリストから外れることを希望される場合、その旨のご連絡をいただければ、リストから削除させていただきます。

④代理店様ご記入欄

貴社名	支店名/営業所名
ご担当者名	お電話番号

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2020 by Eppendorf AG. 4D0120P Printed in Japan