


マルチチャンネルピペットキャンペーン 期間：2023年 10月2日～2024年 3月29日

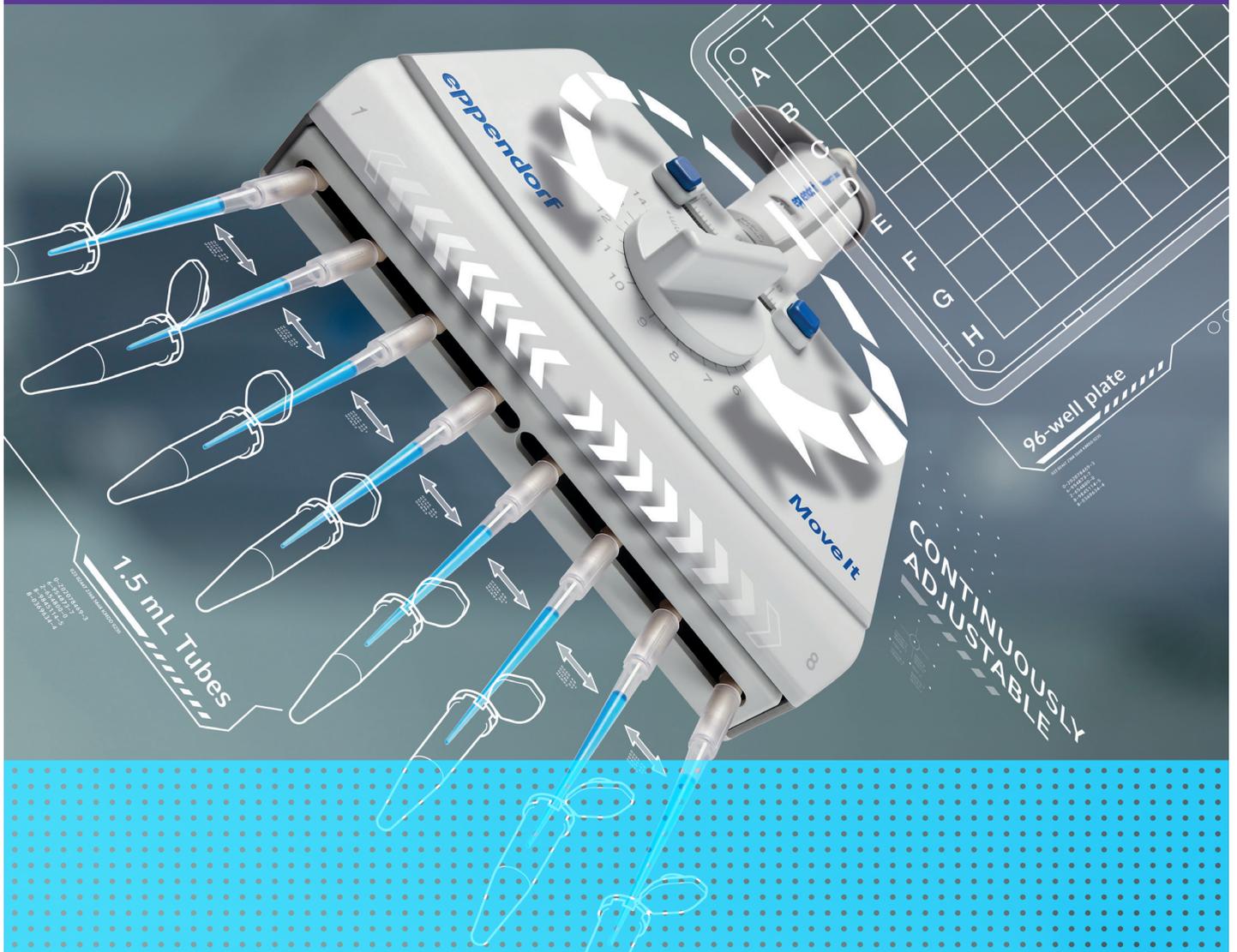

Versatile, high performance

Move It, 16/24ch, マルチチャンネルピペットキャンペーン

マルチチャンネルピペットといえば、96ウェルプレートや8連 PCR チューブ等への分注用に8または12チャンネルピペットがあります。エッペンドルフでは、これらに加えて384ウェル用の16または24チャンネルピペット、チップ間隔を自由に調整できるピペット等、多様なマイクロピペットを取り揃えています。

本キャンペーン期間中、**マルチチャンネルピペット**をご購入の方に**豪華プレゼント**をご用意させていただきました！お見逃しなく！！

キャンペーン内容


下記 A~C いずれかの対象製品および本数をご購入で、**豪華プレゼント3点セット**をゲット！

- A. チップ間隔可変マルチチャンネルピペット「Move It」を1本購入
- B. 384 wellプレートへの分注に「16/24チャンネルピペット」を1本購入
- C. その他のマルチチャンネルピペットを2本購入

プレゼント3点セットの内容

1. 手動シングルチャンネルピペット × 1本
2. ピペットチップ×480本+チップボックス×1箱
3. 96ウェルプレート or PCRチューブ8連 or 6本架ピペットスタンド

様々な容器間の分注に対応
チップ間隔可変ピペット「Move It」

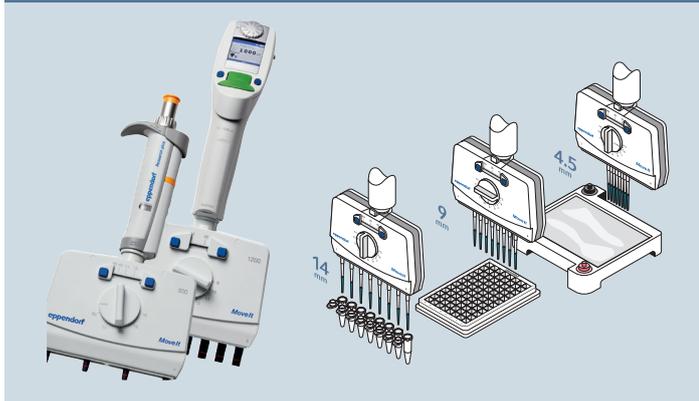

384ウェルプレートに最適
「16/24チャンネルピペット」



身体への負担を抑えるピペッティングを 8/12チャンネルピペット

手動タイプ

- ・リサーチプラス
- ・リファレンス2



電動タイプ

- ・Xplorer
- ・Xplorer plus



大好評のMove It、16/24 chピペットいずれか1本ご購入

or

その他の8/12チャンネルピペットいずれか2本ご購入いただきますと、

手動シングルチャンネルピペット1本
& チップ480本+チップボックス1箱
プレゼント！！

※epT.I.P.S 384 を用いるピペットの場合は
チップ 1,920 本+チップボックス1箱



それだけではございません…

下記製品の中から、いずれかご希望の製品1箱をさらにプレゼント！

マイクロプレート 96ウェル
(U底, 滅菌済み, 80枚)



PCRチューブ 0.2 mL
(8連×120)



6本架ピペットスタンド



高い再現性と信頼性のピペットチップ epT.I.P.S.



マイクロピペットに最適な状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合しています。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。



製品カタログはこちら

透明度が高くサンプルやウェル位置がわかりやすいマイクロプレート



識別しやすい英数字ラベルによって、目的のウェルを見つけやすくなり、分注ミスを低減できます。高い透明度を持っており、サンプルの視認性が非常に良好です。また、 $6,000 \times g$ までの優れた遠心耐久性があります。



明確な刻印でウェル位置がわかりやすい



製品カタログはこちら

サンプルを守ってくれる 0.2 mL PCRチューブ 8連



コンタミネーション防止用シールドによって、蓋内側表面への接触を防ぎます。



書き込みスペース

特別なヒンジにより蓋は一定の角度で止まります。

ポリプロピレン製。壁の厚みが薄くて一定かつ表面の凹凸が少ないため、サンプルに効率良く一様に熱が伝わります。チューブ側面と蓋のフロスト加工により、書き込みやすくなっています。



製品カタログはこちら

ピペットスタンド



ホルダーを交換することで、現行のピペットおよび連続分注器はもちろん、前の世代の機種も架けられます。ホルダーは工具なしで簡単に交換できます。

プレゼントお申し込み方法

対象製品ご購入後、右のQRコードまたはURLの申し込みフォームより、下記で登録ください

- > お客様情報
- > ご購入いただいた販売店様
- > ご購入日
- > ご購入いただいたマルチチャンネルピペットのシリアル番号
- > ご希望のプレゼントの選択



シリアルNo.記載箇所



申し込みフォームのQRコードとURL

<https://bit.ly/multi-ch-2023>

※応募フォームはキャンペーン終了後1ヶ月間有効となります。

1本購入でプレゼントゲット!

チップ間隔が調整可能なピペット「Move It」

新しいピペット「Move It」とは

チューブラックに立てたチューブから抽出キットへ、96 ウェルから 24 ウェルへのピペッティングに時間がかかっていませんか? 「Move It」なら様々な容器の種類に合わせてチップ間隔を調整できるため、より短時間で容易に分注操作を行うことができます。

調整ノブ

- > チップ間隔はノブを手動で回すだけで調整可能
- > 電動式のように振動しないため、液体がポタポタ落ちずに移送可能

チューブレスシステム

- > エアクッション容積が小さくなり、上部パーツにまでつながっていないので、手の熱の影響を受けず精度が安定
- > 簡単にオートクレーブ可能*
- > チューブの摩耗や裂けのリスクが無く、頻繁なメンテナンスが不要

* Xplorer plus 下部のみ、Research plus は全体をオートクレーブ可能



360° 回転可能なピペットヘッド

- > ディスプレイが読みやすく快適
- > 人間工学的でリラックスした体の姿勢が保てます

間隔コントロール

- > 分注元と分注先のフォーマットをあらかじめ設定し、すばやくチップ間隔を切り替えることが可能
- > 384、96、48、24 または 12 ウェルプレートへの容易な分注

調整可能なチップ間隔

- > マイクロプレート、チューブサンプル、アガロースゲルへの分注に
- > チップ間隔は 4.5 ~ 33 mm の間で自由に選択可能

チップのタイプ	epT.I.P.S.			epT.I.P.S. 384	
	4	6	8	8	12
チャンネル数	4	6	8	8	12
容量 (μL)	300 / 1,200	300 / 1,200	300 / 1,200	20 / 100	20 / 100
チップ間の距離 (mm)	9-33	9-20	9-14	4.5-14	4.5-9
384 ウェル (チップ間の距離 4.5 mm)	—	—	—	■	■
96 ウェル (チップ間の距離 9 mm)	■	■	■	■	■
48 ウェル (チップ間の距離 13 mm)	■	■	■	■	—
24 ウェル (チップ間の距離 19 mm)	■	■	—	—	—
12 ウェル (チップ間の距離 26 mm)	■	—	—	—	—
0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 / 5.0 mL チューブ	*	*	*	*	—
15 ~ 50 mL コニカルチューブ	■	■	■	■	—
アガロースゲル	*	*	*	■	■

*チップの容量とサイズにより、適合性に制限があります。



チューブラックに立てたマイクロチューブから96 ウェルプレートへ、またその逆の分注もすぐにできます。



製品カタログはこちら



動画はこちら

1本購入でプレゼントゲット！

384 ウェルプレートも1分で分注可能「16/24 チャンネルピペット」

エッペンドルフの新しい 16-, 24- チャンネルピペットと epT.I.P.S.® 384 によって、384 ウェルプレートでの作業がより早く、身体への負担も軽減できます。

自動分注システムの不具合時のためのバックアップ、96 から 384 ウェルへのスルーピット向上にも最適です。

手動・電動タイプがございます。

> リサーチプラス：手動ピペット

> Xplorer plus：電動ピペット



完璧な同一直線状にチップが並ぶため
384 ウェルでのハンドリングが容易



NEW：epT.I.P.S. 384

ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィットを可能にします。

メリット：

- > チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
- > チップの着脱にかかる力を削減



製品カタログはこちら



動画はこちら

ピペットの修理・校正サービスのご案内



長年の使用によるマイクロピペットパーツの摩耗や液体の吸い込みによるダメージは、精度に影響を与えてしまいます。マイクロピペットをいつも最高の状態でご利用いただくために、バリデーションサポートをご活用ください。

エッペンドルフの検定・校正サービスは全メニュー ISO8655 準拠です。**GLP/GMP 等の品質管理、臨床検査 (ISO15189) 等の各種 ISO 運用時にご利用いただけます。**

JCSS 校正や他社ピペットの検定・校正サービスも実施中！

本サービスの資料請求・お問い合わせ：info@eppendorf.jp

2本購入でプレゼントゲット！

多くのサンプルを負担なく迅速に分注「8/12 チャンネルピペット」



エッペンドルフのマルチチャンネルピペットは 0.5～1,200 μL の広い容量範囲をカバーします。

チップ装着・排出にかかる力を最小限に

1日に何本のチップを使いますか？作業に必要な力のわずかな違いでも、日々繰り返し行うことで、身体への大きな負担になってしまいかねません。


エッペンドルフのマルチチャンネルピペットなら、チップの装着・排出時にかかる力が最適化され、最小限の力で行うことができます。



ピペットの総合カタログはこちら

スプリング式ノーズコーンによる再現性の高いチップフィッティング

チップ装着部にスプリングが入っているため、軽く押し当てただけで適切にチップが取り付けられたことが直感的に確認できます。各チャンネルに均等にチップが装着されるため、マルチチャンネルでも、再現性が高く、より均一な結果を得ることができます。

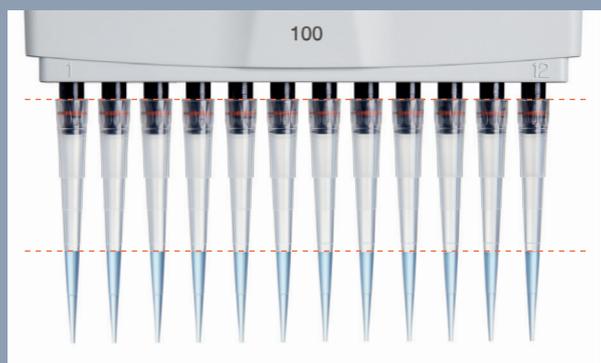

1本購入でプレゼントがもらえるピペット対象製品

注文案内

注文番号	品名	形式	容量範囲	希望小売価格	備考	
3122000078	リサーチプラス M	16チャンネル	1-20 μL *	¥152,000	384ウェルプレート用	
3122000094			5-100 μL *	¥152,000		
3122000086		24チャンネル	1-20 μL *	¥161,000		
3122000108			5-100 μL *	¥161,000		
4861000778	Xplorer plus	16チャンネル	1-20 μL *	¥264,000	384ウェルプレート用、電動ピペット	
4861000792			5-100 μL *	¥264,000		
4861000779		24チャンネル	1-20 μL *	¥292,000		
4861000793			5-100 μL *	¥292,000		
3125000150	リサーチプラス Move It	4チャンネル	30-300 μL	¥222,000	チップ間隔可変	
3125000184			120-1,200 μL	¥222,000		
3125000168		6チャンネル	30-300 μL	¥232,000		
3125000192			120-1,200 μL	¥232,000		
3125000117		8チャンネル	1-20 μL *	¥231,000		
3125000133			5-100 μL *	¥231,000		
3125000176			30-300 μL	¥241,000		
3125000206			120-1,200 μL	¥241,000		
3125000125		12チャンネル	1-20 μL *	¥257,000		
3125000141			5-100 μL *	¥257,000		
4861000816			4チャンネル	15-300 μL		¥334,000
4861000833				50-1,200 μL		¥334,000
4861000817	6チャンネル	15-300 μL	¥345,000			
4861000834		50-1,200 μL	¥345,000			
4861000781	Xplorer plus Move It	8チャンネル	1-20 μL *	¥355,000	チップ間隔可変、電動ピペット	
4861000794			5-100 μL *	¥355,000		
4861000818		15-300 μL	¥355,000			
4861000835		50-1,200 μL	¥355,000			
4861000782		12チャンネル	1-20 μL *	¥376,000		
4861000795			5-100 μL *	¥376,000		

表示価格に消費税は含まれておりません

*epT.I.P.S. 384 を使用します

2本購入でプレゼントがもらえるピペット対象製品

注文案内

注文番号	品名	形式	容量範囲	希望小売価格	備考
4922000013			0.5-10 µL	¥130,000	在庫限り
4926000018			0.5-10 µL	¥130,000	
4922000030			10-100 µL	¥130,000	在庫限り
4926000034		8チャンネル	10-100 µL	¥130,000	
4922000056			30-300 µL	¥130,000	在庫限り
4926000050	リファレンス 2 /M		30-300 µL	¥130,000	
4926000026			0.5-10 µL	¥142,000	
4922000048			10-100 µL	¥142,000	在庫限り
4926000042		12チャンネル	10-100 µL	¥142,000	
4922000064			30-300 µL	¥142,000	在庫限り
4926000069			30-300 µL	¥142,000	
3125000010			0.5-10 µL	¥130,000	
3125000036			10-100 µL	¥130,000	
3125000052		8チャンネル	30-300 µL	¥130,000	
3125000214	リサーチプラス M		120-1,200 µL	¥130,000	
3125000028			0.5-10 µL	¥142,000	
3125000044			10-100 µL	¥142,000	
3125000060		12チャンネル	30-300 µL	¥142,000	
3125000222			120-1,200 µL	¥142,000	
4861000104			0.5-10 µL	¥167,000	
4861000120	Xplorer		5-100 µL	¥167,000	
4861000147		8チャンネル	15-300 µL	¥167,000	
4861000163			50-1,200 µL	¥167,000	
4861000767			0.5-10 µL	¥202,000	
4861000783	Xplorer plus		5-100 µL	¥202,000	
4861000805		8チャンネル	15-300 µL	¥202,000	
4861000821			50-1,200 µL	¥202,000	
4861000112			0.5-10 µL	¥196,000	電動ピペット
4861000139			5-100 µL	¥196,000	
4861000155	Xplorer		15-300 µL	¥196,000	
4861000171		12チャンネル	50-1,200 µL	¥196,000	
4861000775			0.5-10 µL	¥237,000	
4861000791	Xplorer plus		5-100 µL	¥237,000	
4861000813		12チャンネル	15-300 µL	¥237,000	
4861000830			50-1,200 µL	¥237,000	

表示価格に消費税は含まれておりません

エッペンドルフの製品登録プログラム

ご登録いただきますと、製品ごとに epPoints をプレゼントいたします！

epPoints はエッペンドルフ製品のポイントプログラムです。集めたポイントは、素敵な景品と交換できます。



epPoints とは

景品例



1. 本プログラムはエッペンドルフによる提供です。本プログラムについての問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。エッペンドルフ (info@ependorf.jp) までお願いいたします。
2. Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

マルチチャンネルピペットキャンペーン 期間：2023年 10月2日～2024年 3月29日

New!! ピペットマネージャー



電動ピペットXplorer/plusの容量や操作モード等を遠隔で設定可能！

有線ですぐことなく大きなタッチパネル画面で素早く変更できます。さらに作業履歴を記録することができます。



詳細はこちら

関連製品のご紹介



詳細はこちら

**チューブ・プレートの温度コントロール & ミキシング
サーモミキサー C & スマートブロック各種**

- > 酵素反応や小容量の培養などに最適
- > 水を介さないため衛生的
- > 工具不要、片手で交換可能な 13 種類のブロック



詳細はこちら

**シンプルズベストな設計でコンタミレスな培養を
CO₂ インキュベーター CellXpert C170i**

- > ファン・UVを無くし、汚染源の隠れ場所を排除
- > 1分でも取り外せる庫内アクセサリ
- > 180℃ 高温滅菌機能付き



詳細はこちら

**PCR 作業により高い再現性と信頼性を
マスターサイクラー X50 シリーズ**

- > 温度制御精度 ±0.15℃ 加熱速度：10℃ / 秒 (X50s)
- > タッチパネル画面で直感的な操作が可能
- > 384 ウェルモデルもご用意



詳細はこちら

微量卓上～大容量床置遠心機まで豊富なラインアップ

- > 15/50 mL遠沈管はもちろん、マイクロ/ディープウェルプレートも豊富なローターやアダプターで遠心分離可能
- > デリケートな培養細胞の分離に適したスイングタイプも