

25% OFF!



# Galaxy<sup>®</sup> 170 CO<sub>2</sub> インキュベーター クリアランスキャンペーン

シームレスチャンバー、ダイレクトヒーティング、ファンレス構造。  
世界に先駆けて最先端の技術を導入した CO<sub>2</sub> インキュベーター  
Galaxy 170 シリーズ。

モデルチェンジによる販売終了に伴い、国内在庫限りで  
**25% OFF** の特別価格にてご提供いたします!

## 対象製品：

- > Galaxy 170S                    **¥589,500-**
- > Galaxy 170S, 高温滅菌 **¥636,000-**
- > Galaxy 170R                    **¥765,000-**
- > Galaxy 170R, 高温滅菌 **¥855,000-**




Galaxy 170 R (左) と 170 S (右)

## CO<sub>2</sub>インキュベーター Galaxy 170 シリーズ クリアランスキャンペーン



### シームレスチャンバー

拭き取り洗浄や滅菌作業時、庫内に凹凸があると作業が煩雑になるうえ、汚れや細胞の残留リスクになります。Galaxy 170 は庫内の凹凸を極力削減したモデルです。

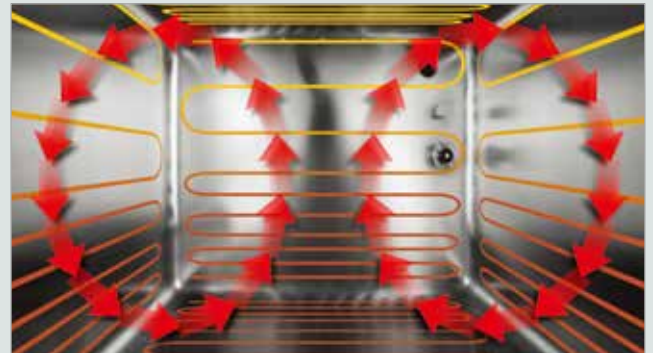

### ダイレクトヒーティング

扉面を含む庫内6面全てにヒーティングエレメントを配置し、さらに独自の機構により庫内ガスの循環を促すことで、庫内環境を均一に維持しています。



### ファンレス構造

フィルターを交換する必要がなく、メンテナンスがより簡便になります。さらに、最上段を含む全てのシェルフを使用でき、庫内空間を最大限に活用できます。

### テクニカルデータ

シリーズ名	Galaxy 170 S	Galaxy 170 R
容量	170 L	
内寸 (W × D × H)	53.3 × 44.4 × 69.1 cm	
外寸 (W × D × H)	68.6 × 67.8 × 84.3 cm	
シェルフの数	4 枚 (8 枚まで増設可)	
シェルフラックの数	4 個 (8 個まで増設可)	8 個
オンボードデータロギング	-	可
温度範囲	室温プラス 4°C ~ 50°C	
温度均一性	± 0.3°C	
CO <sub>2</sub> 濃度範囲	0.2 ~ 20%	
CO <sub>2</sub> 濃度均一性	± 0.1%	
高温滅菌	可 (オプション)	

### 注文案内

製品名
Galaxy 170 S
Galaxy 170 S, 高温滅菌
Galaxy 170 R
Galaxy 170 R, 高温滅菌

Order no.	希望小売価格	クリアランス特別価格
CO17001005	¥786,000	¥589,500
CO17011005	¥848,000	¥636,000
CO17201005	¥1,020,000	¥765,000
CO17211005	¥1,140,000	¥855,000

別途据付調整費を申し受けます。製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。早期完売の際はご容赦ください。

### New! CO<sub>2</sub> インキュベーター後継製品



CellXpert C170i

### CellXpert C170i/C170

- ☑ 最上段の棚まで庫内空間をフル活用
  - ☑ 5分で迅速に温度とCO<sub>2</sub>濃度が回復
  - ☑ 両手が塞がっていても開閉が容易
  - ☑ 庫内メンテナンスが簡単で確実
  - ☑ 一目でわかるグラフ表示 (C170iのみ)
- 本体価格：¥1,010,000 ~  
詳しくはお問い合わせ下さい。

### シェーキング機能も搭載 CO<sub>2</sub> インキュベーターシェーカー



### New Brunswick S41i

- ☑ 浮遊系細胞の培養に最適
  - ☑ 安定した庫内環境
  - ☑ コンタミネーションの低減
  - ☑ 再現性の向上
  - ☑ 高温滅菌標準装備
- 本体価格：¥1,920,000  
詳しくはお問い合わせ下さい。