

The Next Level

Tubes coniques Eppendorf 25 mL avec capuchons à vis et SnapTec™

Tubes coniques Eppendorf 25 mL


Avec les nouveaux tubes coniques Eppendorf 25 mL, nous passons à un niveau supérieur.

Lorsqu'il faut préparer, centrifuger, mélanger ou entreposer des volumes d'échantillons supérieurs à 15 mL, mais bien inférieurs à 50 mL, les chercheurs n'ont souvent d'autre choix que d'utiliser des tubes coniques traditionnels à capuchon vissé d'un volume de 15 mL ou 50 mL. Ce dilemme est maintenant résolu avec les nouveaux tubes coniques Eppendorf de 25 ml avec bouchon vissé ou bouchon innovant SnapTec™.

Des matières premières de première qualité, sans l'utilisation de plastifiants et de biocides pendant la fabrication, garantissent la plus grande intégrité des échantillons. Une haute stabilité de centrifugation g-Safe® jusqu'à 17 000 x g*, étanchéité du couvercle -86 °C jusqu'à 100 °C* et une visibilité optimale des échantillons et des palettes.



> Pour plus d'informations sur les tubes 25 mL :
Cliquez ou scannez le lien : www.eppendorf.com/25mL

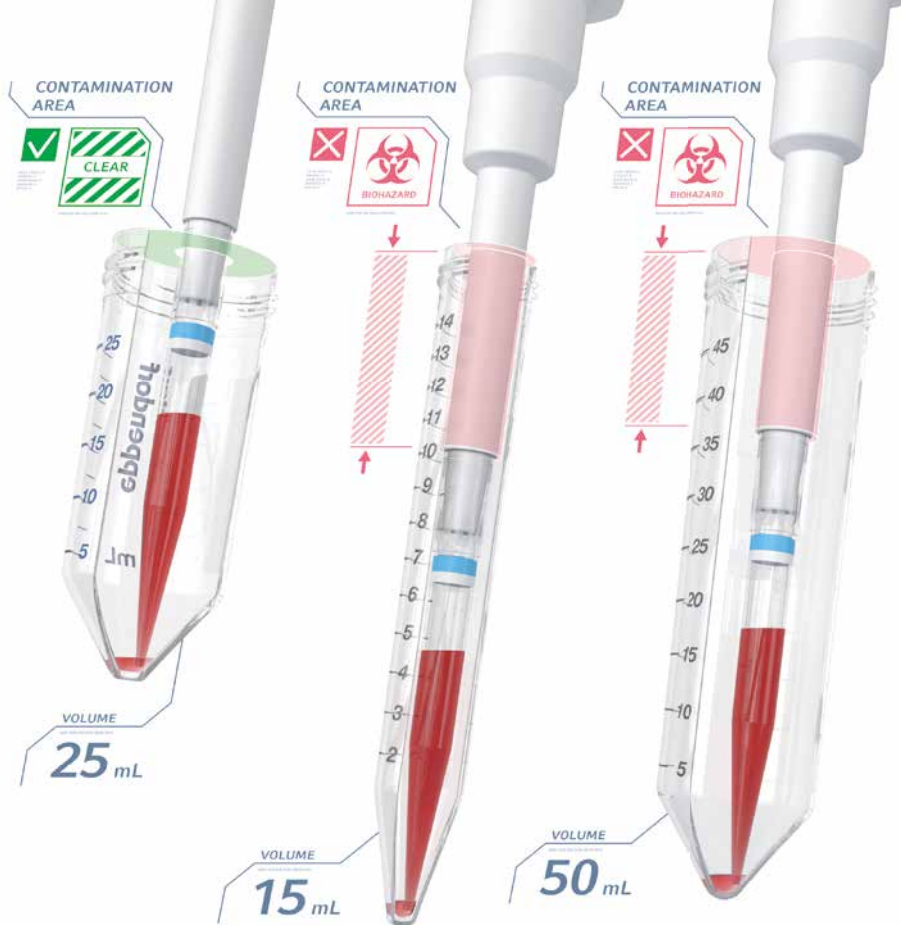

Risque de contamination réduit

Hauteur plus basse

Grâce à une hauteur de tube inférieure d'environ 20%, la profondeur d'insertion de la pipette dans le tube est beaucoup plus courte qu'avec les tubes coniques de 15 ml ou 50 ml. La possibilité que le cône de la pipette touche la paroi interne du tube et le risque de contamination croisée entre le tube et le système de pipetage sont ainsi réduits au minimum

Utilisation d'une seule main

Ouverture et fermeture fiables avec le capuchon Snap Tec™ innovant

La version à bouchon à pression du nouveau tube conique de 25 mL permet l'ouverture et la fermeture d'une seule main pour l'extraction ou l'addition rapide de liquide. Cette solution de couvercle brevetée est unique sur le marché des tubes coniques. Elle optimise et accélère la manipulation de solutions d'échantillons, en particulier dans les protocoles à plusieurs étapes.





Hauteur plus basse - meilleure disponibilité des échantillons

Accès facile aux volumes faibles

Surtout lorsque l'on travaille avec des volumes compris entre 15 et 50 mL, il est souvent impossible de récupérer la totalité de l'échantillon. Avec le même diamètre que le tube conique de 50 mL et une hauteur inférieure à celle des tubes coniques de 15 mL et 50 mL, ce nouveau format de tube facilite l'accès aux échantillons et accélère la remise en suspension des granulés après la centrifugation.

Gain de place

Flexible et stable

Le concept modulaire des boîtes de stockage de tubes Eppendorf a été complété par la version 25 mL, avec des dimensions extérieures de 133 mm, pour une compatibilité avec les systèmes de rayonnages pour congélateurs courants. La hauteur plus basse permet d'économiser de l'espace de rangement de jusqu'à 9 x 25 mL. Autoclavable pour la stérilisation. Le couvercle transparent permet l'inspection rapide et simple des échantillons.



> Note d'application 404 – »Récupération totale des échantillons dans les Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes«
> Cliquer ou scanner : www.eppendorf.com/appnote404



> **Hauteur réduite – manipulation améliorée**

La hauteur de ~20% inférieure à celle des tubes coniques 15 mL / 50 mL vous aide à prévenir la contamination et permet la récupération rapide des solutions d'échantillon

> Économisez l'espace de stockage : vous pouvez utiliser des boîtes et racks de réfrigérateur de 3,5 pouces au lieu des formats 5 pouces exigés pour les tubes coniques 15 et 50 mL

Directement applicable

> Le diamètre identique aux tubes coniques de 50 mL assure l'intégration aisée dans l'environnement de laboratoire existant
 > Étanchéité garantie du joint de -86 °C à 100 °C *
 > Stabilité de centrifugation jusqu'à 17 000 x g *

Capuchon SnapTec™ innovant

> Capuchon pression fiable pour tubes coniques
 > Protégé par 2 brevets techniques
 > Le tube SnapTec est autoclavable *



Utilisation d'une seule main

> Permet la manipulation optimisée et plus rapide des solutions d'échantillon, en particulier dans les protocoles à plusieurs étapes

* Veuillez noter la notice d'utilisation pour les détails (www.eppendorf.com/manuals) :
 »Tubes coniques Eppendorf 25 mL, snap cap « et » tubes coniques Eppendorf 15, 25 et 50 mL«

Informations pour la commande **

Description	Référence
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec™	
Qualité Eppendorf™, incolore, 200 tubes (5 sacs × 40 tubes)	0030 118 405
PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sacs × 40 tubes)	0030 118 413
Stérile, sans pyrogènes, ADNase, ARNase ni ADN humain ou bactérien, incolore, 150 tubes (6 sacs × 25 tubes)	0030 118 421
Kit de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour 1 tube, 6 adaptateurs de centrifugation	0030 118 502
Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon vissé	
Qualité Eppendorf™, incolore, 200 tubes, (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 410
PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes)	0030 122 429
Stérile, sans pyrogènes, ADNase, ARNase ni ADN humain ou bactérien, incolore, 200 tubes (8 sacs × 25 tubes)	0030 122 437
Kit de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour 1 tube, 6 adaptateurs de centrifugation	0030 122 500

** Informations de commande pour les composants du système disponibles sur notre site Internet.

Un système complet de composants

Centrifugation

Centrifugeuses à rotor pour tubes coniques de 50 mL :

Deux versions d'adaptateur pour capuchon pression pour tubes de 25 mL (voir : 5820 733 004) et pour capuchon vissé (réf. : 5820 734 000) permettent la centrifugation dans des godets



Chauffage et mélange

Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat™ C :

L'adaptateur pour tubes 25 mL tubes permet la compatibilité avec l'Eppendorf SmartBlock™ 50 mL (Réf : 5365 000 109)



MixMate®:

Support de tube 25/50 mL, pour 4 tubes coniques × 25/50 mL (Réf : 5353 040 156)



Stockage des échantillons

Support pour un tube :

Idéal pour peser des échantillons sur la balance et pour manipuler individuellement les échantillons. La fente de visualisation permet d'observer le niveau de remplissage à tout moment. (Réf. : 0030 119 860)

Rack de tube 25 mL :

Les racks Eppendorf pour tubes coniques de 50 mL peuvent être utilisés avec les nouveaux tubes 25 mL (Réf. : 0030 119 835)

Boîte de rangement en polypropylène :

La hauteur inférieure permet le stockage à faible encombrement de jusqu'à 9 tubes de 25 mL dans des boîtes de rangement Eppendorf de 3,5 pouces (Réf : 0030 140 729)

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Ch.teau d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.com/25mL