

epMotion 5070シリーズクリアランスキャンペーン

期間：2026年5月11日～12月11日

台数限定 Last Buy!



# Don't miss the Final Opportunity!

## epMotion 5070 シリーズクリアランスキャンペーン

コンパクトでご好評いただいております“自動分注機epMotion 5070シリーズ”が終売となり、特別価格でお求めいただけるラストチャンスです! この機会にラボオートメーションデビューしてみませんか?

### キャンペーン内容

> epMotion 5070 PCR Solution **30% OFF**

### ラボの「お困りごと」解決

#### 主なアプリケーション

- ✓ PCR/qPCRセットアップ
- ✓ Normalization/希釈 Cherry Picking等のランダム分注
- ✓ プレートのリフォーマッティング

キャンペーン期間中、対象製品を特別価格でご提供いたします。

そのピペティング、ロボットに任せて『自由』を手に入れませんか？  
 ～エッペンドルフの自動分注システムepMotion®シリーズ～

ラボの「お困りごと」解決

- ✓ ヒューマンエラーの解消：液量ミス・泡立ちリスク
- ✓ 身体への負担軽減：腱鞘炎(RSI)リスクの回避、384ウェル作業からの解放
- ✓ 圧倒的な再現性：0.2 μLからの高精度で誰が実行しても同じ結果

多彩なアプリケーションに柔軟に対応

PCR / qPCRセットアップ | DNA / RNA精製 | NGSライブラリー調製 | ELISA | セルベースアッセイ

ラボの成長に合わせた拡張性 (The epMotion Family)

予算、人手不足、ラックスペース、そしてスループット。  
 あなたのラボに最適な自動化のスケールが必ず見つかります。



	96 Flex	5070	5073	5075
ワークテーブル	2ポジション	4ポジション	6ポジション	最大15ポジション
容量範囲	0.5 ~ 1,000 μL	0.2 ~ 1,000 μL	0.2 ~ 1,000 μL	0.2 ~ 1,000 μL
最適アプリケーション	96/384一括処理	PCRセットアップ	NGS前処理 (ロー)	NGS前処理 (ハイ)
拡張オプション	1台で2ヘッドを使用可能	エントリーモデル	グリッパー、サーマルモジュール、サーモミキサー、UVランプ&Airフィルター	グリッパー、サーマルモジュール、サーモミキサー、UVランプ&Airフィルター、バキューム
価格帯目安	266万円～ (本体+ヘッド)	本体定価279万円～	本体定価651万円～	本体定価978万円～

## epMotion 5070シリーズクリアランスキャンペーン

期間：2026年5月11日～12月11日

### epMotion 5070 PCR Solution

# 30% OFF

epMotion 5070 の特徴：必要最低限のシンプル構成で、初めてでも迷わない！

- > 4 ポジションのワークテーブル
- > 容量範囲：0.2 ～ 1,000  $\mu$ L（使用する分注ツールにより異なる）
- > 2 つのツールの自動交換
- > 65 × 48 cm の小さな設置面積が実験台にフィット
- > 直感的なドラッグ&ドロップベースのソフトウェア

※epMotion 5070のサポート終了期間は2031年12月末を予定しております。



### epMotionシリーズの主要な特徴とアクセサリ




#### 液面センサー

ワークテーブルへのロード時に、チップ（種類と本数）、ラボウェアの種類、さらには容器内の液面の高さまで確認し、安全に操作できるようにします。



#### Automatic Tool Exchange

お使いのアプリケーションに必要なツールを、各種分注ツールとグリッパーから自動交換が可能です。epMotion の機種に応じて、ワークテーブル上には自動交換用として 2～4 本の分注ツールを搭載することができます。

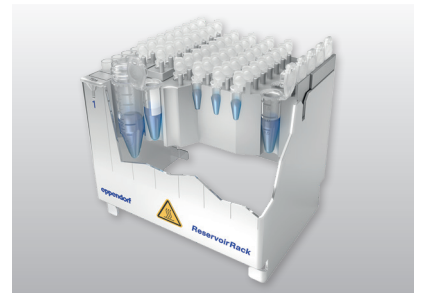

#### リザーバーラックモジュールPCR

下記のラボウェアがワークテーブルの1カ所に設置可能です。

- > 1.5/2.0mL チューブ 最大12本
- > PCRチューブ 最大48本
- > index tubes 最大16本
- > 5.0mL Screw Capチューブ 1本

### 妥協なき精度と信頼性（ISO 8655-6 準拠）

Eppendorfが誇るエアクッション式ピペティングテクノロジー。手作業によるブレを排除し、アッセイの完全な再現性を保証します。



チップ仕様	系統誤差 (Systematic)	偶然誤差 (Random)
50 $\mu$ L チップ (5 $\mu$ L分注時)	$\leq 4.5\%$	$\leq 2.5\%$
300 $\mu$ L チップ (30 $\mu$ L分注時)	$\leq 2.5\%$	$\leq 1.5\%$
1,000 $\mu$ L チップ (100 $\mu$ L分注時)	$\leq 1.5\%$	$\leq 1.5\%$

#### 品名・形式

epMotion 5070 PCR Solutionパッケージ, MultiCon

#### 注文番号

5070000948

#### 単位

1 セット

#### 希望小売価格

¥2,790,000

#### キャンペーン価格

¥1,953,000


※セット内容：分注ツールTS 50、リザーバーラック、リザーバーラックモジュールPCR、サーモブロック96  
※別途据え付け調整費を申し受けます

## epMotion 5070のアプリケーション例

### PCR・リアルタイムPCRのセットアップ

- ✓ 微量でも正確にピペティングできることから、反応系のスケールダウンが可能になるため、試薬コストを削減できます。
- ✓ 各種チューブ（0.2～50 mL）、プレート（6～384ウェル）に対応しています。
- ✓ 分注ツールの自動交換により、幅広い容量レンジに対応できます。


出典：Application Note No. 368

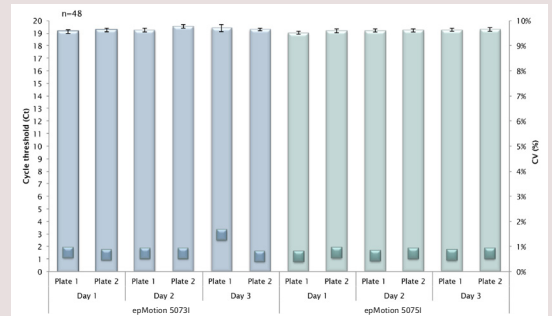

epMotion 50731、50751を用いて調製したリアルタイムPCRの結果。プレート間の平均Ct値の差は±1.11%と、高い再現性が示されました。（n=48）

### Normalization

- ✓ CSV importや専用コマンドによる簡易的なプログラム化
- ✓ 分注ツールの自動交換により、幅広い容量レンジに対応できます。
- ✓ マニュアル作業に比べ、再現性の高い結果が得られます。

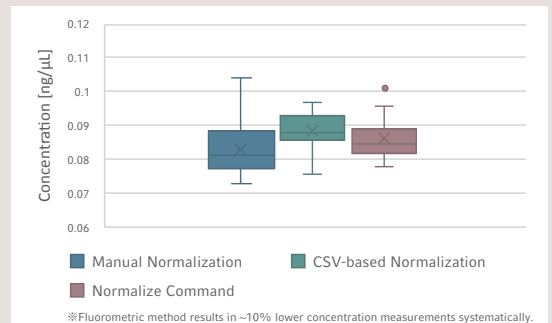


96ウェルプレート中の8段階の濃度のトリPLICATE（計24ウェル）のヒトgDNAを、目標値0.1 ng / μLに標準化しました。マニュアルでの作業に比べ、高い再現性が得られました。


## 関連製品のご案内

### セミオートピペティングシステム epMotion 96 Flex

- > 0.5 ~ 300 μL および 5 ~ 1,000 μL の交換可能なディスペンシングヘッド
- > チップサイズの自動光学検出
- > 5 インチタッチスクリーン
- > マルチステップのピペティングタスクをプログラム可能
- > プリセットアプリケーション: 吸引、希釈、連続分注、マルチ分注、小容量、プレウェット、リバースピペティング

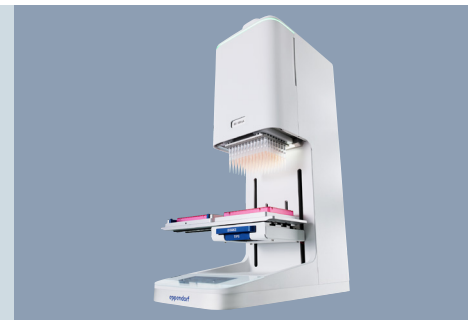

## Eppendorf twin.tec PCR Plates

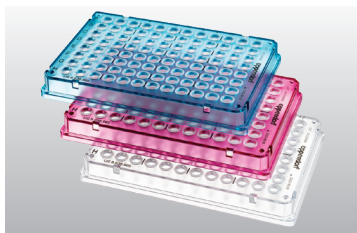

Eppendorf twin.tec® PCRプレートは、あらゆるPCRアッセイで安心してお使いいただけるプレートです。高い純度と剛性、カラーバリエーションなどの工夫により、オートメーションやハイスループットにも適しており、ワークフローの各ステップを整理しやすく、日々の作業を効率化します。

#### バリエーション

- > 96および384ウェル
- > フルスカート/セミスカート/ノンスカート
- > 低吸着仕様
- > バーコードオプション

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

エッペンドルフ株式会社 141-0001 東京都品川区北品川 6-7-29 ガーデングレイス品川御殿山 6F Tel: 0120-024-125 (代表) Email: [info@eppendorf.jp](mailto:info@eppendorf.jp)

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on [www.eppendorf.com/ip](http://www.eppendorf.com/ip). All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2026 by Eppendorf SE.

本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2026年4月現在の価格で、消費税は含まれておりません。