




# Out of the Box

## Die neuen Eppendorf Storage Boxes

Die komplette Systemlösung für die Lagerung Ihrer Proben! Mit Hilfe dieses umfassenden modularen Konzepts können Sie die Boxen optimal für individuelle Lagerungsanforderungen zusammenstellen. Die Außenmaße der Boxen sind mit den herkömmlichen Racksystemen der Tiefkühlgeräte kompatibel. Außerdem bieten die verschiedenen inneren Rastervarianten eine perfekte Passform für alle gängigen Gefäßformate: Cryogefäße, Reaktionsgefäße (0,5 mL - 5 mL), konische Gefäße (15 mL und 50 mL) und andere Laborgefäße.

Dieser platzsparende Ansatz verbunden mit zahlreichen Anwendungsvorteilen hilft Ihnen dabei, die Lagerung und Archivierung Ihrer Proben zu optimieren.

- > Die Kombination aus hochwertigem Polypropylen (PP) und einem optimierten Design sorgt für eine hohe Formbeständigkeit und ermöglicht somit ein leichtgängiges Öffnen und Schließen
- > Optimale Ausnutzung des Platzes im Tiefkühlgerät durch flexible Kombination von verschiedenen Boxenformaten
- > Alphanumerische Laserbeschriftung zur eindeutigen Kennzeichnung jeder Probenposition
- > Transparenter Deckel für eine einfache und schnelle Überprüfung der Proben

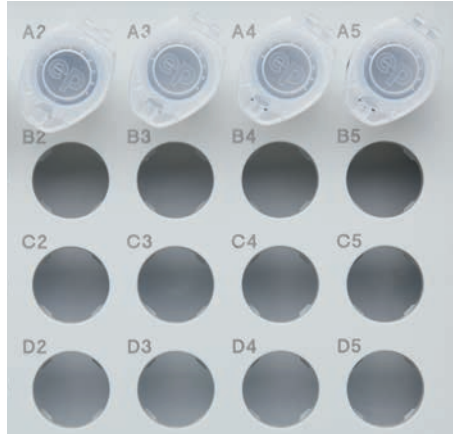

### Flexibel und stabil

- > Den Raum im Tiefkühlgerät voll ausnutzen dank flexibler und optimaler Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Boxenformaten.
- > Ob Gefrieren bis -86 °C für Probenlagerung oder Autoklavieren bei 121 °C für 20 min zur Sterilisation – die Lagerungsboxen von Eppendorf bleiben in Form!

### Zuverlässig

- > Einfache Probenzuordnung dank alphanumerischer Laserbeschriftung für jeden Probenplatz:
  - > Minimierung von Zuordnungsfehlern
  - > Kontrastreiche Lesbarkeit
  - > Dauerhafte Beständigkeit
- > Fünf zusätzliche Beschriftungsfelder auf dem Deckel zur individuellen Kennzeichnung.

### Innovativ und sicher

- > Lüftungsöffnungen in den Boxen für 15 mL- und 50 mL-Gefäße gewährleisten einen gleichmäßigen Gefrierprozess. Dadurch wird ein Beschädigen oder gar Zerschlagen der Gefäße verhindert. Dieses wird häufig beobachtet, wenn langgestreckte Gefäßformate in geschlossenen Boxen eingefroren werden.

### Bestellinformationen

#### Beschreibung

**Eppendorf Storage Box 10 x 10**, für 100 Cryogefäße mit Innengewinde, 3 Stck., Höhe 52,8 mm, 2 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

#### Best.-Nr.

0030 140.508

**Eppendorf Storage Box 9 x 9**, für 81 (Cryo-) Gefäße mit Schraubdeckel 1-2 mL, 3 Stck., Höhe 52,8 mm, 2 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.516

**Eppendorf Storage Box 9 x 9**, für 81 (Cryo-) Gefäße mit Schraubdeckel 3 mL, 2 Stck., Höhe 76,2 mm, 3 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.540

**Eppendorf Storage Box 9 x 9**, für 81 (Cryo-) Gefäße mit Schraubdeckel 4-5 mL, 2 Stck., Höhe 101,6 mm, 4 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.567

**Eppendorf Storage Box 8 x 8**, für 64 Gefäße 1-2 mL, 3 Stck., Höhe 52,8 mm, 2 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.524

**Eppendorf Storage Box 5 x 5**, für 25 Gefäße 5 mL mit Schnappdeckel, 4 Stck., Höhe 63,5 mm, 2,5 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.532

**Eppendorf Storage Box 5 x 5**, für 25 Gefäße 5 mL mit Schraubdeckel, 2 Stck., Höhe 76,2 mm, 3 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.613

**Eppendorf Storage Box 5 x 5**, für 25 Gefäße 15 mL, 2 Stck., Höhe 127 mm, 5 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.583

**Eppendorf Storage Box 3 x 3**, für 9 Gefäße 50 mL und 4 Gefäße 15 mL, 2 Stck., Höhe 127 mm, 5 Zoll, Polypropylen, zum Gefrieren bis -86 °C, autoklavierbar, mit Deckel und alphanumerischem Code

0030 140.591

Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)