



Effortless Every Time

Redefina la centrifugación con la SpinPro® 6 R

Redefina la centrifugación con la SpinPro® 6 R

La SpinPro® 6 R se ha diseñado pensando en los científicos modernos, abordando los puntos débiles y las ineficiencias asociadas a la centrifugación. Está diseñada para agilizar sus flujos de trabajo, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad general de su laboratorio. Tanto si realiza tareas rutinarias como protocolos experimentales complejos, la SpinPro® 6 R es su aliada de confianza, ya que garantiza resultados precisos y consistentes cada día y en cada marcha, haciendo que la centrifugación resulte realmente sencilla.



Flexible sin esfuerzo

- > Múltiples rotores, recipientes y adaptadores
- > Desde tubos a placas y botellas
- > Un rotor, múltiples aplicaciones

Fiable sin esfuerzo

- > Gestión de la vida útil del rotor
- > Reconocimiento del rotor mediante RFID

Ergonómica sin esfuerzo

- > Tapa eléctrica
- > Tapas de rotor Eppendorf QuickLock® Pro

Intuitiva sin esfuerzo

- > Pantalla adaptativa y barra luminosa
- > Favoritos individuales
- > Inicio de sesión de usuario sin contacto
- > 19 idiomas

Cumple las normas sin esfuerzo

- > Gestión de usuarios
- > Documentación avanzada
- > Fácil integración en sistemas LIMS

Sostenible sin esfuerzo

- > Certificación ACT 2.0
- > Función de standby
- > Refrigeración basada en CO₂



Su SpinPro® 6 R

En esencia, la Eppendorf SpinPro® 6 R encarna más de 60 años de excelencia en ingeniería de centrífugas y una orientación al usuario sin concesiones. Es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la calidad, ampliando los límites de lo que una centrífuga puede hacer por usted. Al elegir la SpinPro® 6 R, no solo está invirtiendo en un equipo, sino también en el futuro de su investigación y en el éxito de su laboratorio.



Ligereza bien pensada



Flexible sin esfuerzo

- > Múltiples rotores, recipientes y adaptadores
- > Desde tubos a placas y botellas

Ergonómica sin esfuerzo

- > Tapa con accionamiento eléctrico
- > Tapas de rotor Eppendorf QuickLock® Pro

Cumple las normas sin esfuerzo

- > Gestión de usuarios
- > Documentación avanzada
- > Fácil integración en sistemas LIMS

Fiable sin esfuerzo

- > Gestión de la vida útil del rotor (Rotor Lifetime Management, RLM)
- > Reconocimiento del rotor mediante RFID

Sostenible sin esfuerzo

- > Certificación ACT 2.0
- > Función de standby
- > Refrigeración basada en CO₂ (PCG 1)

Intuitiva sin esfuerzo

- > Pantalla adaptativa y barra luminosa
- > Favoritos individuales
- > Inicio de sesión de usuario sin contacto
- > 19 idiomas

La SpinPro® 6 R hace que las siguientes aplicaciones sean más sencillas que nunca:

- > Recolección de cultivos celulares
- > Recolección de bacterias/levaduras
- > Procesamiento de muestras clínicas
- > Aislamiento de ADN/ARN/proteínas
- > Aislamiento de PBMC y disociación de tejidos



Rotores y características del producto

Gama de rotores versátil:


Una amplia selección de rotores le garantiza que dispondrá de la herramienta adecuada para cada aplicación. Nuestra variada gama de rotores le permite manipular varios tipos de recipientes y volúmenes, lo cual hace que la SpinPro® 6 R pueda adaptarse a una amplia variedad de necesidades de laboratorio. Tanto si trabaja con muestras delicadas como si ejecuta aplicaciones estándar como la recolección de células, nuestros rotores ofrecen un rendimiento y una fiabilidad constantes.



Gestión de la vida útil del rotor

Optimice el uso del rotor y aumente la seguridad con nuestro sistema de gestión de la vida útil del rotor. Cada rotor realiza un seguimiento de su uso y sus ciclos de manera independiente de la centrifugación. Se generan alertas cuando el rotor se acerca al final de su ciclo de vida, lo que garantiza que sus rotores estén siempre en condiciones óptimas. Esta supervisión proactiva del estado del rotor evita tiempos de inactividad inesperados y ayuda a mantener un entorno de laboratorio seguro.

Device Health			Rotors			Rotor S-2xUniversal ID 16:30 No Issues		
FA-48x2 ID (5595HQ773729)			good (11%)			>		
FA-6x250 ID (5595HQ631804)			marginal (10%)			>		
S-2xUniversal ID (5495HQ700854)			good (100%)			>		
S-2xUniversal ID (5495HQ270365)			action required (1%)			>		
S-4x400 ID (5495HQ556282)			good (39%)			>		
Open			FastTemp			Start		
						Short Spin		
						Standby		

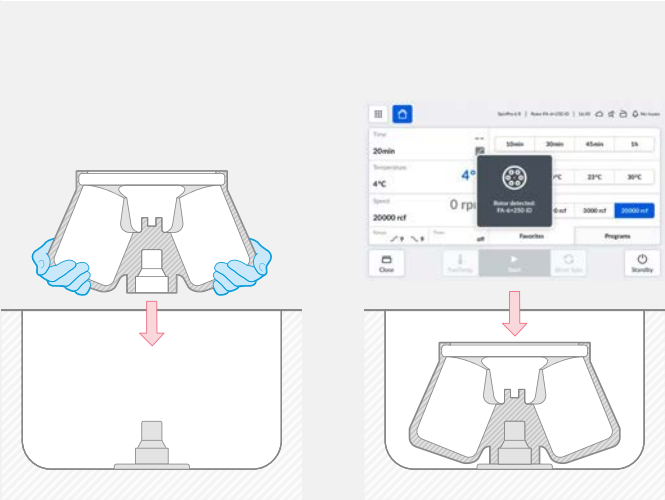

Tapas de rotor Eppendorf QuickLock® Pro:

El nuevo mecanismo Eppendorf QuickLock® Pro mejora el manejo de la tapa del rotor con una sola mano para un uso rápido y cómodo. El sellado mejorado minimiza las fugas y reduce la necesidad de sustituciones, al tiempo que bloquea de forma segura el rotor a altas velocidades para aumentar la seguridad. Estas mejoras agilizan la puesta en marcha y aumentan la eficiencia del laboratorio.

Reconocimiento instantáneo del rotor

La tecnología RFID permite identificar los rotores de forma automática e instantánea. Esta característica reduce significativamente el riesgo de errores por parte del usuario, ya que garantiza que la centrifuga ajuste automáticamente los parámetros de funcionamiento seleccionables para que se adapten al rotor instalado.





Funcionamiento fluido



Sistema de inicio de sesión y gestión de usuarios sin contacto:


La tecnología de chip RFID permite un acceso seguro y sencillo, así como una experiencia de inicio de sesión fluida, lo que garantiza que solo el personal autorizado utilice el equipo. Esta característica simplifica el inicio de sesión al eliminar los pasos manuales, ahorrar tiempo y personalizar automáticamente ajustes como el idioma, los favoritos y los programas para adaptarse a las preferencias de los usuarios. Ajuste fácilmente la centrifuga a sus necesidades, monitoree el acceso con VisioNize® Lab Suite y mantenga la seguridad del laboratorio.


Software multilingüe:

Utilice la SpinPro® 6 R en el idioma que prefiera, ya que es compatible con 19 idiomas. Usuarios de diversas procedencias pueden manejar fácilmente la centrifuga, lo que reduce el riesgo de malentendidos y errores.

Sensor de movimiento con pantalla adaptativa:

La pantalla adaptativa reacciona a su presencia detectando la distancia a la que se encuentra de la pantalla. Esta tecnología inteligente garantiza que la información importante esté siempre visible y accesible, incluso desde lejos.

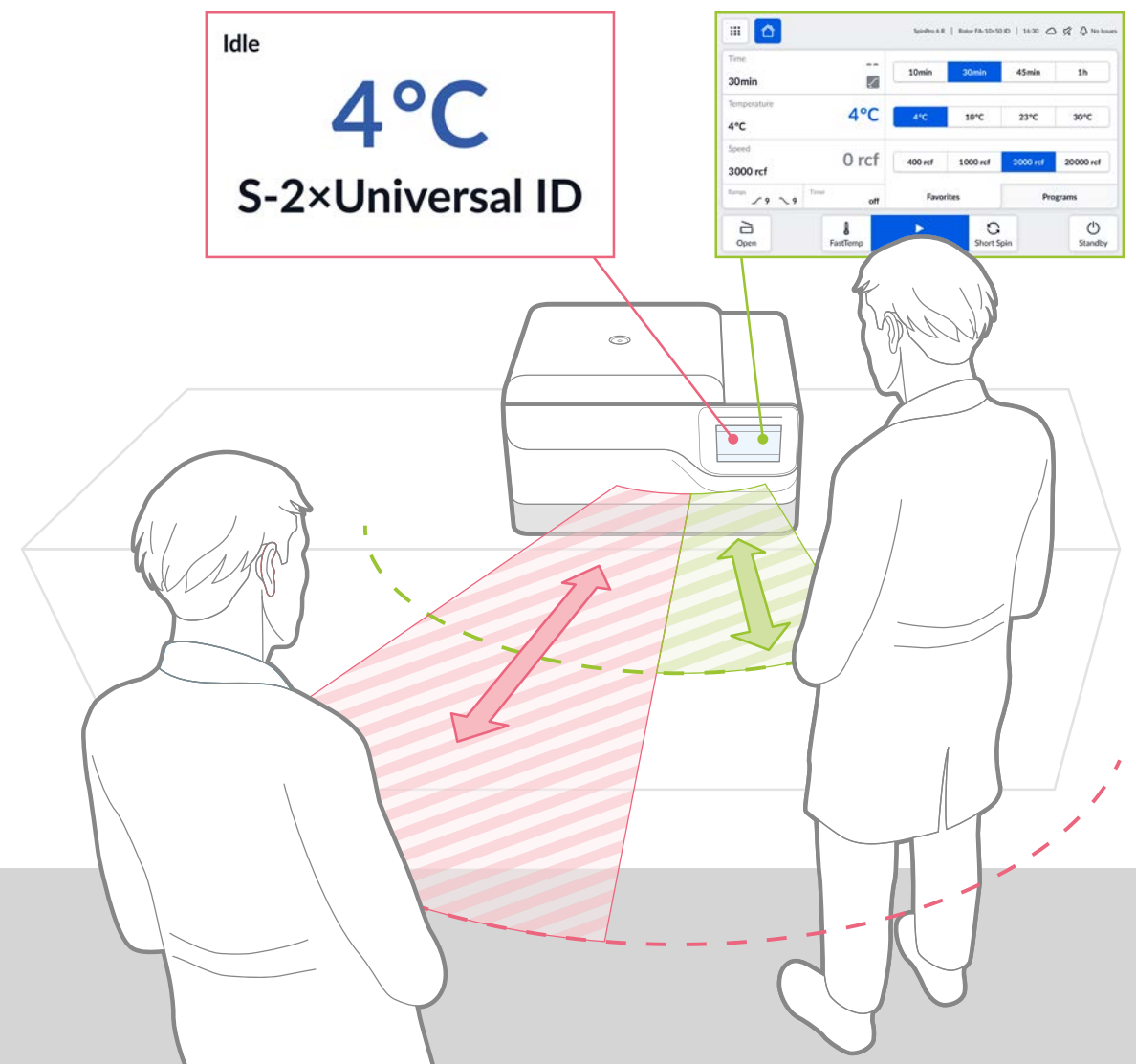

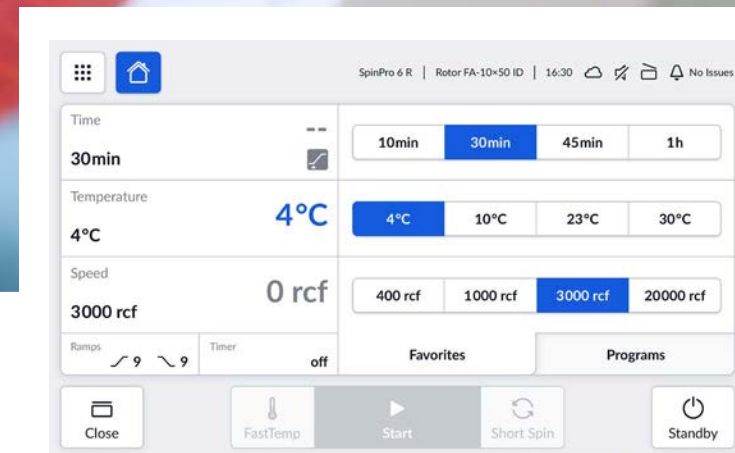

Conectividad y control

Opciones de integración:

Optimice sus datos y utilice parámetros medidos, como la velocidad y la temperatura, con sus sistemas de monitorización o registro de datos de terceros. Los sistemas de gestión e información del laboratorio (LIMS) o los cuadernos electrónicos de laboratorio (ELN) pueden, por ejemplo, acceder directamente a los datos utilizando la interfaz de programación de aplicaciones (API) dentro de su red.

Manténgase a la vanguardia y aproveche las últimas innovaciones y funciones: gracias a la función integrada de actualizaciones inalámbricas, su centrífuga irá evolucionando con el tiempo.

VisioNize® Lab Suite:

Para una experiencia de conectividad óptima y fluida, Eppendorf ofrece VisioNize® Lab Suite para hacer un seguimiento de su centrifugación, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Conectando los equipos Eppendorf a VisioNize® Lab Suite, usted podrá:

- > Supervisar a distancia el rendimiento del equipo
- > Recibir notificaciones ante cualquier evento
- > Acceder a la información del equipo y a los registros de acceso de usuarios y parámetros, así como exportar dichos datos

Disfrute de una suscripción básica gratuita para los 3 primeros equipos conectados.



Interfaz de pantalla táctil intuitiva:

Navegue con facilidad por nuestra interfaz gráfica de usuario intuitiva, diseñada para mejorar la eficiencia y la productividad gracias a su pantalla táctil de fácil manejo. Los elementos visuales claros y los controles de gran capacidad de respuesta permiten configurar y ejecutar protocolos de centrifugación rápidamente y con el mínimo esfuerzo, incluso utilizando guantes.

Tapa con accionamiento eléctrico:

La SpinPro® 6 R cuenta con una tapa eléctrica que se abre y se cierra automáticamente con solo pulsar un botón. Al automatizar el funcionamiento de la tapa, reducimos el manejo manual, aumentamos la seguridad de los usuarios, garantizamos un acceso rápido y seguro a las muestras y mejoramos la eficiencia general del laboratorio.



Descubra nuestra VisioNize® Lab Suite
www.eppendorf.link/visionize


Sometida a pruebas de robustez:

La SpinPro® 6 R ha sido diseñada para un funcionamiento prolongado y sin problemas, incluso en laboratorios exigentes y con un alto volumen de trabajo. Sus componentes esenciales se someten a exhaustivas pruebas de durabilidad en condiciones de uso real y de máxima exigencia. Estas pruebas garantizan un funcionamiento fiable en situaciones de uso bajo, medio e intensivo, y todas las piezas esenciales están disponibles como componentes sustituibles por el servicio técnico.

Como ejemplo de nuestros rigurosos regímenes de pruebas, el sistema eléctrico de la tapa (accionamiento, bisagra y cierre) se somete a ciclos de funcionamiento que superan con creces el uso diario habitual, con el fin de verificar su fiabilidad a lo largo de muchos años.



Más de 10 años

- Accionamiento de la tapa**
- > Probado en 150.000 ciclos (solo)
 - > Probado en 90.000 ciclos (con la tapa)
 - > Tiempo de vida útil equivalente: más de 10 años
 - > Sustituible

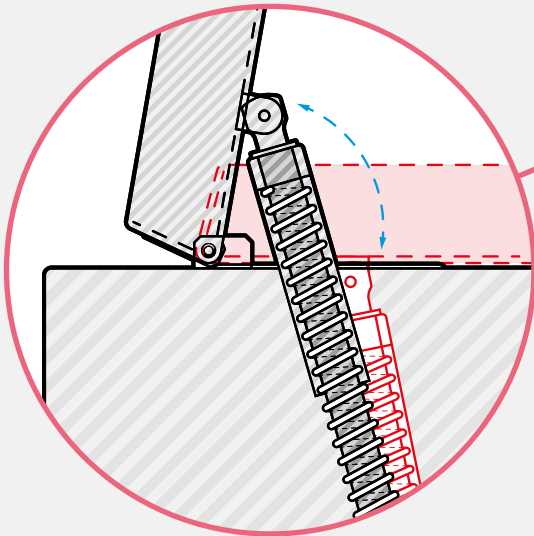

Más de 40 años

- Cierre de la tapa**
- > Probado en 325.000 ciclos (solo)
 - > Tiempo de vida útil equivalente: más de 40 años
 - > Sustituible

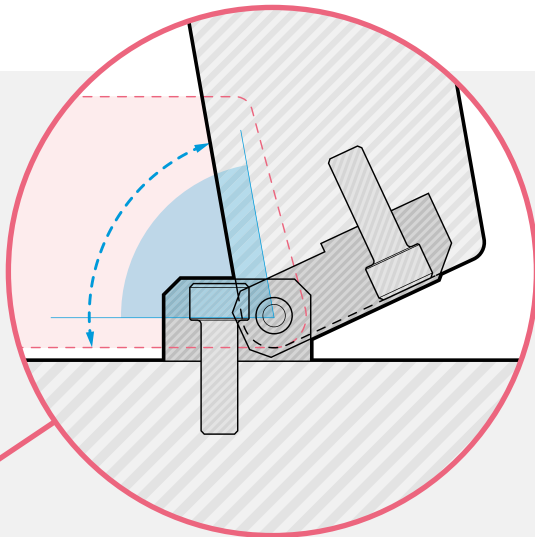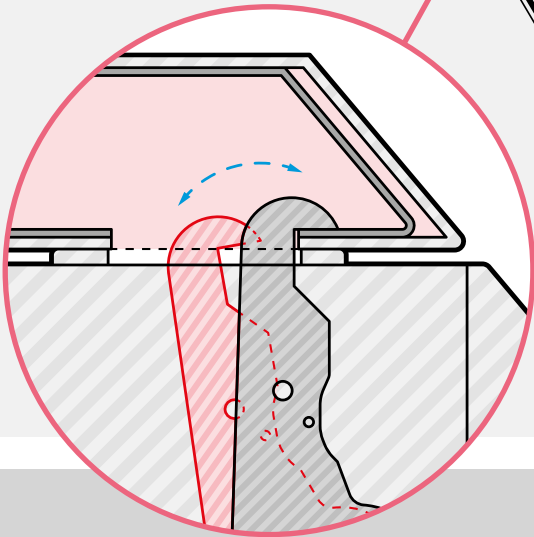

Más de 10 años

- Bisagra de la tapa**
- > Probada en 90.000 ciclos (solo)
 - > Tiempo de vida útil equivalente más de 10 años
 - > Sustituible

Vista general de la vida útil

	Ciclos	Uso bajo	Uso medio	Uso intensivo
Accionamiento de la tapa	90.000	Más de 30 años	Más de 15 años	Más de 10 años
Bisagra de la tapa	90.000	Más de 30 años	Más de 15 años	Más de 10 años
Cierre de la tapa	325.000	Más de 120 años	Más de 60 años	Más de 40 años

Cálculo del uso

Uso	Ciclos/día	Duración media del ciclo	Días/semana	Semanas/año	Ciclos/año	Horas/año
Bajo	10	15 min	5	52	2.600	650 h
Medio	20	15 min	5	52	5.200	1.300 h
Intensivo	30	15 min	5	52	7.800	1.950 h

Pruebas especiales

Pruebas de estrés adicionales – que incluyen cientos de ciclos con parámetros aleatorios y a máxima velocidad, funcionamiento en condiciones de alta humedad y pruebas de resistencia del sistema de refrigeración – confirman que la SpinPro® 6 R se mantiene segura, estable y totalmente operativa, por lo que los usuarios pueden centrarse en sus muestras en lugar de en su centrífuga.

Vista general de rotores

Con la SpinPro® 6 R, elija los rotores que mejor se adapten a sus aplicaciones, ya sea para manipular muestras delicadas de bajo volumen o para aplicaciones de recolección de grandes volúmenes. Nuestra selección de rotores permite utilizar una amplia gama de recipientes. Además, ofrecen un manejo rápido y sencillo con una sola mano gracias a las tapas de rotor Eppendorf QuickLock® Pro, reconocimiento mediante chips RFID, cierre hermético a los aerosoles y un rendimiento de refrigeración excepcional.



Procese una amplia gama de muestras diversas en distintos tipos de recipientes con este rotor basculante, aprovechando nuestro concepto de adaptador universal.

Máx. capacidad: 2 x 1.000 mL
Máx. FCR: 4.302
Hermético a los aerosoles
Vida útil*: ~ 19 años (50.000 ciclos)



Este rotor de ángulo fijo ofrece una combinación ideal de altas velocidades y gran capacidad para su aplicación.

Máx. capacidad: 6 x 250 mL
Máx. FCR: 10.000
Hermético a los aerosoles
Vida útil*: ~ 25 años (70.000 ciclos)

Este rotor de ángulo fijo permite diversas aplicaciones a alta velocidad, como la separación de bacterias, ácidos nucleicos o proteínas.

Máx. capacidad: 10 x 50 mL
Máx. FCR: 15.000
Hermético a los aerosoles
Vida útil*: ~ 30 años (84.000 ciclos)



Este rotor de ángulo fijo permite el manejo de un elevado número de muestras en formato de tubos de reacción de 1,5 mL y 2,0 mL.

Máx. capacidad: 48 x 2,0 mL
Máx. FCR: 20.020
Hermético a los aerosoles
Vida útil*: ~ 38 años (100.000 ciclos)



Este rotor de ángulo fijo permite un manejo cómodo de muestras en formato de tubos de reacción de 1,5 mL y 2,0 mL, gracias a su borde de carga bajo.

Máx. capacidad: 30 x 2,0 mL
Máx. FCR: 20.020
Hermético a los aerosoles
Vida útil*: ~ 38 años (100.000 ciclos)

* El cálculo de la vida útil se basa en 10 ciclos al día, 5 días a la semana, 52 semanas al año.

Vista general de adaptadores para Rotor S-2×Universal ID



Información para pedidos	
Descripción	N.º de ped.
Tapones herméticos a los aerosoles, para rotor S-2×Universal ID, set de 2 uds.	5910 750 005
Botella de cuello ancho de 750 mL, para rotor S-4-104, S-4×750, S-4×1000, juego de 2 uds.	5820 708 000
Botella de cuello ancho de 1.000 mL, para rotor S-4-104, S-4×750, S-4×1000, juego de 2 uds.	5910 770 006

Adaptadores para rotor S-2×Universal ID	4 mL–8 mL	7,5 mL–12 mL	9 mL	1,5 mL–2 mL	12 x 75 mm, 5 mL FACS	50 mL cónico, con faldón	500 mL Corning®	750 mL	1.000 mL	Placas MTP, DWP, PCR
Máx. diámetro del tubo	13 mm	16 mm	17,5 mm	11 mm	12 mm	31 mm	96 mm	102 mm	118 mm	–
Máx. altura del tubo	119 mm	120 mm	120 mm		112 mm	124 mm	148 mm	139 mm	133 mm	80 mm
Altura máx. del recipiente para su uso con tapón/tapa ¹⁾	117 mm	118 mm	118 mm	43 mm	107 mm	121 mm	–	135 mm	133 mm	66 mm
Adaptador										
Número de tubos por adaptador/rotor	30/60	26/52	21/42	46/92	46/92	7/14	1/2	1/2	1/2	5/10
Forma del fondo	redondo	redondo	redondo	plano	redondo	plano	cónico	plano	plano	plano
Radio de centrifugación	190 mm	195 mm	188 mm	187 mm	189 mm	185 mm	187 mm	188 mm	188 mm	170 mm
Máx. FCR	4.300 x g	4.300 x g	4.256 x g	4.233 x g	4.279 x g	4.188 x g	4.234 x g	4.256 x g	4.256 x g	3.849 x g
Paquete	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.
N.º de ped.	5910 755 007	5910 754 000	5910 762 003	5910 763 000*8	5910 758 006	5910 764 006	5910 760 000	5910 757 000	5910 756 003	5910 753 004

¹⁾ Realice una comprobación manual para determinar la capacidad de carga real.
²⁾ Tapones herméticos a los aerosoles compatibles con MTP, DWP 96 500 µL, DWP 384 200 µL.
³⁾ Tapones herméticos a los aerosoles no compatibles con DWP 96 1.000 µL y 2.000 µL.
⁴⁾ Por favor, pida el adaptador para tubos cónicos de 25 mL con tapón a presión 5820 733 004.

Adaptadores universales para rotor S-2×Universal ID



Adaptador universal 1 Configuración para placas deepwell y Eppendorf Tubes® 5.0/15 mL.	Adaptador universal 2 Configuración para microplacas y tubos cónicos de 25/50 mL.	Adaptador universal 3 Configuración para tubos cónicos de 25/50 mL, botellas de 250 mL y microplacas.
--	---	---

El rotor S-2×Universal ID ofrece una versatilidad excepcional a aquellos clientes que necesitan centrifugar una variedad de recipientes y placas. Tres adaptadores universales innovadores acomodan una selección de tubos, placas y botellas:

> Adaptador 1: tubos cónicos de 5,0 mL y 15 mL, MTP/DWP

> Adaptador 2: tubos cónicos de 25 mL y 50 mL, MTP

> Adaptador 3: tubos cónicos de 25 mL y 50 mL, botellas de 250 mL, MTP

Para clientes que necesiten capacidad de apilado, mayor velocidad o una centrifugación hermética a los aerosoles de ciertos formatos de placas, está disponible un soporte de placas por separado.

Eppendorf Tubes® 5,0 mL	15 mL cónico	MTP, DWP	25 mL tapón a presión ³⁾	25 mL tapón de rosca ⁵⁾	50 mL tapón de rosca	Microplaca de 96/384 pocillos	25 mL tapón a presión ³⁾	25 mL tapón de rosca ⁵⁾	50 mL cónico	45 mL tapón a presión	Microplaca de 96/384 pocillos	250 mL plano, 175–225 mL cónico ⁶⁾
17 mm	17 mm	–	30 mm	30 mm	30 mm	–	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	–	62 mm
124 mm	124 mm	64 mm	83 mm	78,5 mm	116 ⁴⁾ mm	16 mm	83 mm	78,5 mm	124 mm	133 mm	16 mm	146 mm
122 mm	122 mm	²⁾	83 ⁴⁾ mm	78,5 ⁴⁾ mm	116 ⁴⁾ mm	–	83 mm	78,5 mm	121 mm	133 mm	–	139 mm
17/34	17/34	1/2	9/18	9/18	9/18	1/2	7/14	7/14	7/14	7/14	1/2	1/2
cónico	cónico	plano	cónico	cónico	cónico	plano	cónico	cónico	cónico	cónico	plano	plano
191 mm	191 mm	143 mm	107 mm	156 mm	192 mm	115 mm	107 mm	155 mm	191 mm	188 mm	115 mm	187 mm
4.300 x g	4.300 x g	3.237 x g	3.758 x g	3.531 x g	4.300 x g	2.604 x g	3.735 x g	3.509 x g	4.300 x g	4.256 x g	2.604 x g	4.234 x g
juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.	juego de 2 uds.
5910 752 008			5910 769 008				5910 751 001					

⁴⁾ Cuando se utilizan con tapones herméticos a los aerosoles, la capacidad máx. se reduce a 20 x 50 mL (5 x 50 mL por adaptador). ⁵⁾ Por favor, pida el adaptador para tubos cónicos de 25 mL con tapón de rosca 5820 734 000.
⁶⁾ Tenga en cuenta que estas botellas cónicas se tienen que utilizar junto con un inserto de forma cónica proporcionado por el fabricante.



Sus opciones de servicio

Nuestros contratos de servicio – Sus ventajas

Con nuestra cartera de soluciones de contratos de servicio le quitamos un peso de encima al simplificar el proceso de pedidos y elaboración de presupuestos de varios servicios durante toda la vida útil de sus instrumentos.

Sus costes se reducen y son predecibles, asegurando así una productividad continua y una larga vida útil. Adicionalmente, nuestros contratos incluyen costes de reparación – total o parcialmente – y descuentos en otros servicios.

Servicios de cualificación

Servicios de IQ y OQ – Asistencia para el cumplimiento de las normas GxP

¿Trabaja en un entorno regulado?

Ofrecemos servicios de cualificación de la instalación (IQ) y de cualificación operativa (OQ) diseñados específicamente, que incluyen la documentación de apoyo conforme a las normas GxP. Estos documentos

cumplen con las complejas normas y reglamentos GxP, lo que reduce su carga de trabajo administrativo y le proporciona la garantía cualificada de que su equipo se ha instalado y funciona de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Contratos de servicio Eppendorf



	AdvancedCare	PremiumCare
	Para garantizar la fiabilidad y el tiempo de servicio de los equipos	Para garantizar la fiabilidad, el tiempo útil y la previsión financiera
Contratos de servicio		
Mantenimiento preventivo completo	1/año	1/año
Soporte prioritario*1	■	■
Piezas de recambio, mano de obra, desplazamiento para reparaciones	20 % de descuento	incluido
Descuento en servicios adicionales (p. ej., IQ/OQ)	10 %	10 %

*1 Sujeto a las condiciones comerciales locales y basado en una práctica de «mejor esfuerzos». Para más información, contacte con su organización de servicio local.



Servicios de cualificación de la instalación y cualificación operacional	IQ/OQ GxP	OQ GxP
Comprobación del estado de la entrega y del entorno de la instalación	■	–
Instalación incl. configuración y comprobaciones funcionales	■	–
Informe detallado de la IQ	■	–
Comprobación de las funciones de notificación	■	■
Verificación de los parámetros del equipo (p. ej., temperatura, velocidad)	■	■
Informe detallado de la OQ y gestión de la lista de desviaciones	■	■
Aprobación firmada por el cliente y el técnico de servicio	■	■

SpinPro® 6 R de un vistazo

Características principales	
Sostenibilidad	
> Sistemas de refrigeración basados en CO ₂ (PCG 1)	
> Etiqueta ecológica ACT 2.0	
Comodidad y conformidad	
> Seguridad mejorada con reconocimiento de rotor mediante RFID y seguimiento de la vida útil del rotor	
> Función de favoritos para la configuración de parámetros en cuestión de segundos	
> Accionamiento automático de la tapa	
> Gestión de usuarios avanzada	
Versatilidad	
> El rotor S-2xUniversal ID permite centrifugar una amplia gama de recipientes sin necesidad de cambiar el rotor ni los cestillos	
> Rotor 6x250 ID de alta capacidad con tapa de rotor Eppendorf QuickLock® Pro hermética a los aerosoles	
Características adicionales	
> Interfaz táctil multilingüe de 7 pulgadas para un manejo sencillo	
> Sensor de movimiento y luz ambiental	
> Barra luminosa de estado para supervisión visual	
> Detección automática de desequilibrio	
> Las funciones de documentación avanzada permiten el cumplimiento de la norma CFR 21, Parte 11	
Certificaciones y registro	
Empresa	Centrífuga
> ISO 9001	> Declaración de conformidad de la UE
> ISO 14001	(incluidas todas las directivas y
> ISO 13485	normas de seguridad pertinentes)
	> Prueba de aceptación en fábrica/ informe de inspección
	> Certificado de ensayo de contención para rotores herméticos a los aerosoles

Especificaciones técnicas	
Velocidad máxima	
FCR máx.	
> Rotores de ángulo fijo	20.020 × <i>g</i>
> Rotor basculante	4.300 × <i>g</i>
Número de revoluciones máx.	13.500 rpm
Máx. capacidad	2 × 1 L
Máx. consumo de potencia	2.160 W
Nivel de ruido	< 70 dB (A)
Rango de temperatura	de -11 °C a 40 °C

Dimensiones	
An x Pr x Al	706 × 745 × 385 mm
Altura con tapa abierta	867 mm
Superficie requerida	
> Placa base	700 × 700 mm
> Distancia entre pies	515 × 598 mm
Peso (sin accesorios)	100 kg
Peso de transporte	132 kg



Información para pedidos

Información para pedidos	
Descripción	N.º de ped.
Centrifuge SpinPro® 6 R, refrigerada	Ver código QR debajo de la tabla
Rotores	
Rotor S-2xUniversal ID	5595 700 001
Rotor FA-6x250 ID	5595 705 003
Rotor FA-30x2 ID	5595 707 005
Rotor FA-48x2 ID	5595 709 005
Rotor FA-10x50 ID	5595 703 002

Para obtener información sobre pedidos, consulte nuestro sitio web local o póngase en contacto con su representante de ventas local.

www.eppendorf.link/spinpro6r-centrifuge

Este producto está disponible como dispositivo médico (MD) o dispositivo médico para diagnóstico in vitro (IVD) en determinados países. Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas local.

www.eppendorf.link/contact



Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburgo · Alemania
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com

Corning® is a registered trademark of Corning Inc., USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, SpinPro®, VisioNize®, Eppendorf Tubes® and Eppendorf QuickLock® Pro are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2026 by Eppendorf SE.
Order No.: AA01 054 040/ES1/PDF/0426/SS0