

NOUVEAU : Conical Tube SnapTec® 50




Done in a Snap

Manipulation d'échantillons rapide et sécurisé grâce aux Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Quand vous manipulez beaucoup d'échantillons, vous pouvez être submergé. Avec les nouveaux Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50, ce n'est pas le cas. Vous pouvez les ouvrir et les fermer rapidement et en toute sécurité d'une seule main, la gauche ou la droite, ce qui vous permet d'ajouter ou de retirer du liquide plus rapidement.

Le capuchon est fixé de manière sûre au tube d'essai, supprimant ainsi le risque de mélanger les couvercles lorsqu'ils sont sur le banc.

Intégrez facilement ce tube conique SnapTec 50 à votre routine de laboratoire quotidienne. Avec des dimensions comparables à un tube conique 50 mL classique, ils s'adaptent parfaitement à une large gamme d'équipement existant de votre laboratoire.

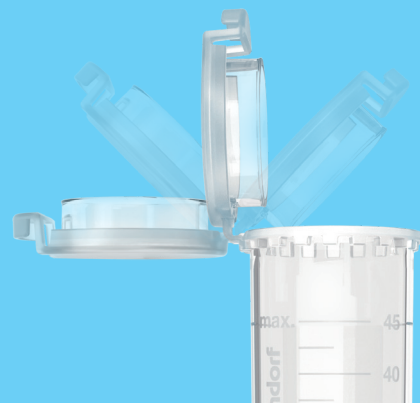

Découvrez la solution des capuchons SnapTec® 50

Capuchon innovant SnapTec
Protégé par deux brevets techniques (voir également les Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec)

Volume nominal de 45 mL*

Autoclavable à 121°C, 20 min*

Résistance à la centrifugation jusqu'à 17 000 x g*

L'étanchéité du joint de -86° C à 100° C*

Les nouveaux Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 sont recommandés pour :

- > La centrifugation
- > La préparation de solutions tampons, d'aliquotes, de solutions de travail
- > La préparation d'échantillons
- > La collecte d'échantillons
- > La température d'incubation des échantillons

Utilisation à une seule main
Le capuchon SnapTec assure une manipulation optimisée et plus rapide des solutions d'échantillons, par ex. dans les protocoles en plusieurs étapes

Réduction du risque de contamination
Le capuchon SnapTec évite le risque de mélanger les couvercles lorsque vous travaillez sur des protocoles en plusieurs étapes

Mise en œuvre immédiate
Les dimensions comparables aux tubes coniques 50 mL avec capuchon à vis permettent une intégration directe dans une large gamme d'équipement de laboratoire existant*

Qualifications:
guaranteed quality
sterile (pyrogen-free, sterile)
PCR clean (PCR inhibitor-free, human DNA-free, certified purity grade)

*Pour plus de détails, veuillez consulter la notice d'utilisation (www.eppendorf.com/manuals) : Eppendorf Conical Tubes 25 mL et SnapTec® 50

Moins de risques

Réduction du risque de contamination : Il n'est pas nécessaire de poser le couvercle de tube sur la paillasse, le capuchon est relié au tube en toute sécurité, même lorsqu'il est ouvert. Aucun risque de mélanger les couvercles.

Utilisation à une seule main

Avec le nouveau tube conique SnapTec 50, ouvrez et fermez le tube en toute confiance pour extraire ou ajouter rapidement des liquides d'une seule main.

Confort et sécurité maximum

Pour en savoir plus sur le capuchon à raccord sécurisé, la résistance à la centrifugation et les niveaux extractibles, consultez notre nouvelle note d'application*.

www.eppendorf.com/appnote445

*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling

Références

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Eppendorf Quality™, (240 tubes, 8x30 tubes/sachet)

PCR clean, (240 tubes, 8x30 tubes/sachet)

Sterile, (200 tubes, 10x20 tubes/sachet)

Code commande

0030 118 650

0030 118 669

0030 118 677

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d'Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.com/SnapTec50