



Find Your Best Fit

Con le nuove pipette Eppendorf Research® 3 neo. Personalizzazione, precisione e comfort: il tutto nelle vostre mani.



La vostra pipetta, il vostro stile.

Unitevi alla nostra missione di ottimizzare la manipolazione dei liquidi con la nuova generazione di pipette Eppendorf. Research 3 neo vi permette di lasciarvi alle spalle un approccio unico alla manipolazione dei liquidi e di personalizzare l'esperienza di pipettaggio in base alle vostre esigenze. Fate vostro il pipettaggio con una ampia serie di accessori e impostazioni personalizzabili e traete vantaggio da un'affidabilità e un'ergonomia senza pari.



Visitate la nostra pagina web dedicata
www.eppendorf.link/best-fit

Display a 4 cifre
Regolazione del volume facile e precisa e ampio angolo visivo.



Blocco del volume
Protegge da modifiche accidentali del volume.

Principio di funzionamento
Selezione del volume e pipettaggio con un unico pulsante: ergonomico per tutti, ancora più comodo per chi ha mani piccole.

Eccezionale regolazione rapida del volume
Modalità "fast": regolazione fino al 40 % più veloce; modalità "easy": messa a punto semplice con una mano sola.

Design ergonomico
Pipettaggio liscio come l'olio, applicando poca forza; comoda forma curva e look moderno.

Pipette Research 3 neo
Pipettaggio senza fatica con impostazioni personalizzabili, prestazioni superiori a ISO 8655, peso e forze richieste ridotti, alta affidabilità e completamente autoclavabile.

Regolazione temporanea
Regolazione in base al tipo di liquido, alla geometria del puntale, all'altitudine e molto altro per mantenere l'accuratezza senza dover ricalibrare. Lo sportello rigido sostituisce le etichette, evitandone la perdita.

Sistema del cono aperto
Ottimizzato per i puntali Eppendorf ma compatibile con altri. Il sistema a molla riduce le forze di fissaggio ed espulsione con i puntali Eppendorf.



Create per le vostre mani


La soluzione migliore e più comoda per voi

Con l'intento di migliorare la vita di laboratorio dei clienti, è stato ulteriormente approfondito e messo in pratica l'Eppendorf PhysioCare Concept®, un sistema che mette al centro l'ergonomia. Le pipette Research 3 sono delicate con le mani, ma non scherzano in fatto di precisione e ogni dettaglio è stato progettato pensando al comfort e alla semplicità di utilizzo.

- > Nuovo principio di funzionamento: pulsante di pipettaggio più corto con regolazione del volume integrata
- > Design perfettamente equilibrato, organico e di peso ridotto
- > Gancio ergonomico per le dita in modo da ridurre al minimo le sollecitazioni
- > Coni del puntale a molla per un fissaggio semplice dei puntali e forze di espulsione ridotte
- > Ergonomia complessivamente migliore rispetto a prima



Per saperne di più sull'Eppendorf PhysioCare Concept®: www.eppendorf.link/physiocare

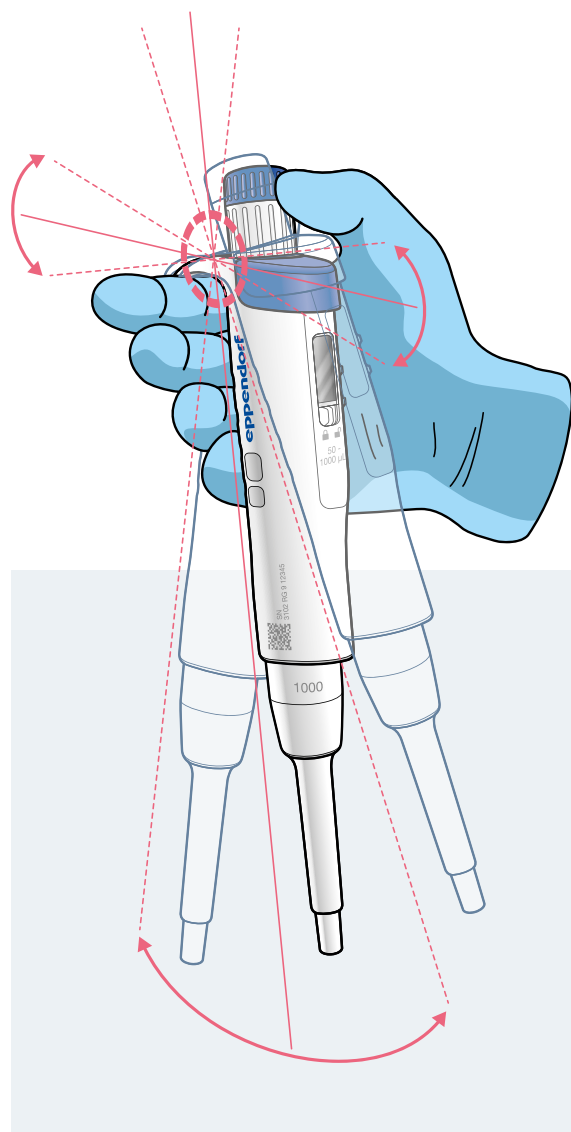

»fast«

»easy«

Fate vostro il pipettaggio

Regolatela!

Eppendorf Research 3 neo presenta un'innovativa regolazione rapida del volume a due velocità diverse. Scegliete l'impostazione »fast« per velocizzare la modifica del volume della pipetta con meno giri e risparmiate fino al 40 %* di tempo. In alternativa, scegliete la modalità »easy« per ridurre la forza richiesta per l'utilizzo e regolare il volume della pipetta in modo preciso e agevole con una mano sola, diminuendo l'affaticamento muscolare.

* Il risparmio di tempo dipende dal modello di pipetta utilizzato

Contrassegnetela!

Date il vostro nome alla vostra pipetta o riportate la sua data di calibrazione sugli appositi anelli ColorTag, disponibili in diversi colori e misure. Aggiornate con facilità nomi, date e qualsiasi altro dettaglio.

Attrezzatela!

Il puntale è un elemento cruciale della vostra esperienza di pipettaggio. Le pipette Research 3 neo e gli epT.I.P.S.® funzionano all'unisono, creando un sistema in grado di offrire la massima accuratezza e precisione. Il sistema del cono aperto rende inoltre le pipette compatibili anche con altri puntali.

Modificatela!

Adeguate temporaneamente le impostazioni della pipetta ai liquidi non acquosi, alle geometrie del puntale, al pipettaggio inverso e all'altitudine del laboratorio. Ciò consente un pipettaggio accurato senza l'inconveniente di una nuova calibrazione. Scaricate il manuale per saperne di più.



1. Visitate
www.eppendorf.link/newpipette



2. Immettete il numero di serie e scaricate il manuale



Guardate il tutorial
www.eppendorf.link/r3-pip



Scoprite tutte le caratteristiche del prodotto sulla pagina dedicata:
www.eppendorf.link/research3neo




Pipette su cui poter contare

Accuratezza e durezza ben note

Eppendorf Research 3 neo è stata realizzata perseguendo la stessa eccellenza nella manipolazione dei liquidi che ha reso le nostre pipette così popolari. Sottoposta ad ampi test e dotata di un alloggiamento monoblocco e materiali di qualità, Eppendorf Research 3 neo è fatta per durare nel tempo e offrire accuratezza e affidabilità.

Per garantire la nostra qualità premium, abbiamo implementato ampi test nella fase di sviluppo del prodotto. Test di accuratezza e precisione. Test climatici. Test di caduta. Test di resistenza al trattamento in autoclave, agli UV e agli agenti chimici. Utilizzo giornaliero per diversi anni simulato con robot. Test in ambienti di laboratorio reali. In breve: le testiamo a fondo.

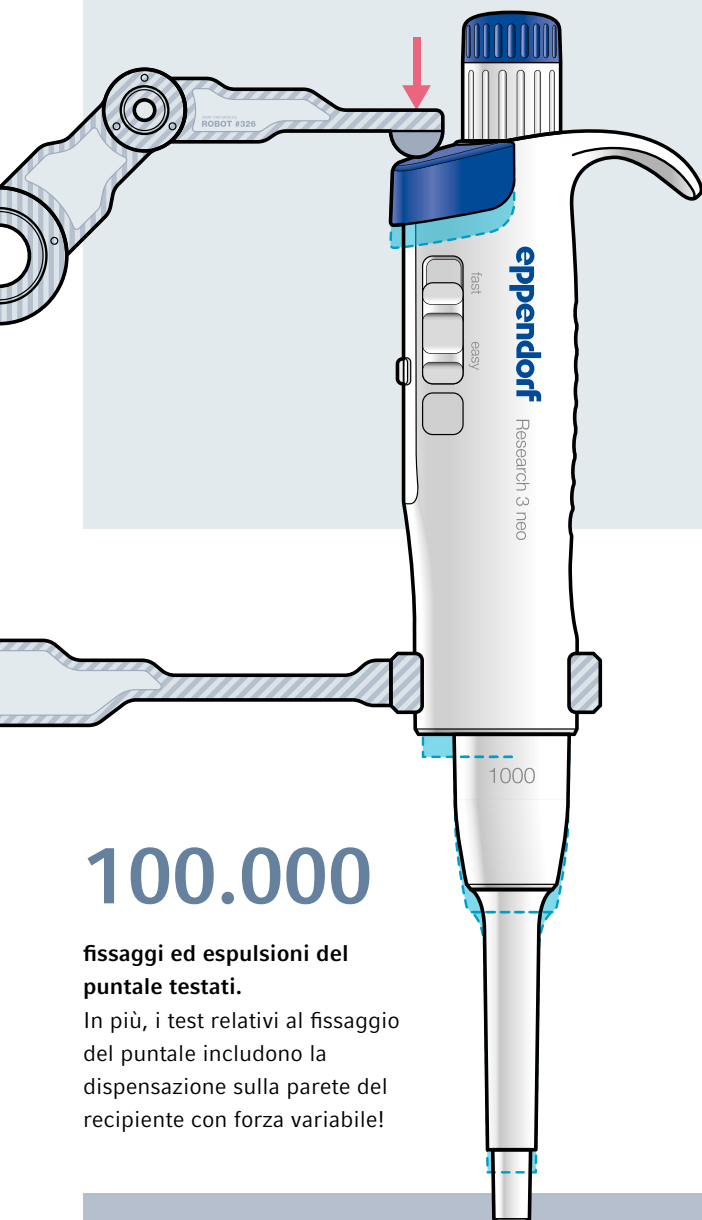

100.000


fissaggi ed espulsioni del puntale testati.

In più, i test relativi al fissaggio del puntale includono la dispensazione sulla parete del recipiente con forza variabile!

26.000

regolazioni del volume


testate dal volume nominale a quello minimo e ritorno; in modalità "fast" e modalità "easy"!

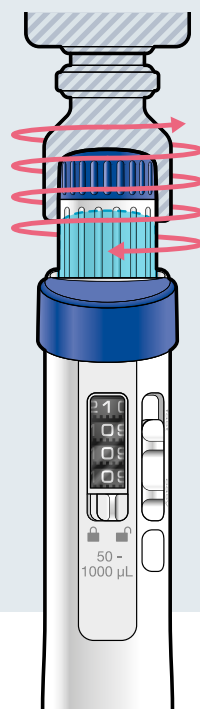

200.000

corse del pistone testate.

Ciò corrisponde a circa 5 anni di utilizzo quotidiano continuo.

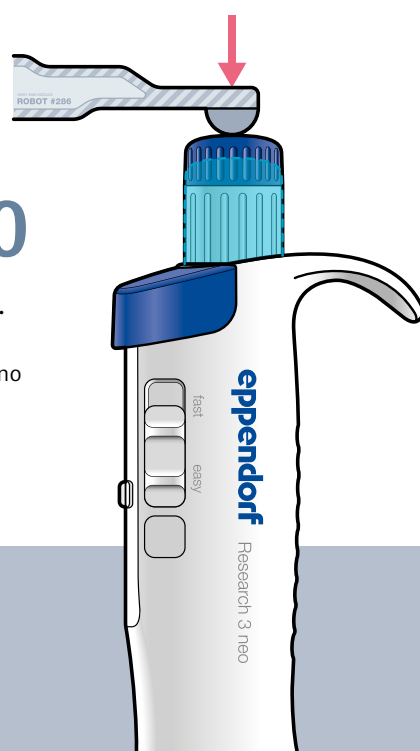

Il nostro impegno con la sostenibilità

Per Eppendorf, la sostenibilità non è solo un obiettivo, è un impegno preso. Contraddistinte da un livello elevato di qualità, durevolezza e riparabilità, le nostre pipette sono state progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e massimizzare le prestazioni. I nostri stabilimenti di produzione contano su energia rinnovabile al 100 %, sono certificati ISO 14001 e si distinguono per una gestione responsabile delle sostanze chimiche. Le pipette Research 3 neo sono dotate dell'etichetta ACT® con una validazione esterna indipendente delle nostre pratiche ecocompatibili. Le pipette vengono fornite in confezioni riciclate e riciclabili, più piccole delle precedenti versioni, diminuendo le emissioni di CO₂ nella vostra catena di approvvigionamento. Naturalmente, le pipette Research 3 neo sono compatibili anche con i nostri innovativi puntali epT.I.P.S.® BioBased, realizzati in polipropilene bio-based al 100 %, che consentono di ridurre in modo significativo l'impronta di carbonio relativa al prodotto.



La soluzione completa

La nostra dedizione al vostro successo va ben oltre alle pipette, ai puntali e ai servizi di calibrazione. Vi offriamo l'accesso a una grande varietà di risorse tra cui certificati, manuali in più lingue, note applicative, guide utente e istruttivi white paper: il tutto sempre disponibile. Avete bisogno di assistenza o di un orientamento? Il nostro servizio di assistenza per le applicazioni da parte di esperti, i webinar informativi e le varie risorse formative sono a vostra disposizione per fornirvi un supporto completo a ogni passo.

Contattate il rappresentante Eppendorf di zona per ulteriori dettagli, richieste di informazioni sui servizi e offerte locali.

Il potere della scelta

Unitevi alla rivoluzione del pipettaggio e scoprite come potete beneficiare di precisione e comfort come mai prima d'ora, grazie al potere della scelta.



Potete trovare materiale scaricabile e informazioni sui servizi sulla pagina del prodotto:
www.eppendorf.link/research3neo



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice colore	Cod. ord.
Eppendorf Research® 3 neo , 1 canale, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 puntali) ed ep Dualfilter T.I.P.S.® Rack "PCR clean e sterili" (x 96 puntali)		
0,1–2,5 µL, grigio scuro	■	3174 000 001
Eppendorf Research® 3 neo , 1 canale, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 puntali) ed ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Reload "PCR clean e sterili" (x 96 puntali)		
0,5–10 µL, grigio medio	■	3174 000 002
1–20 µL, grigio chiaro	■	3174 000 003
1–20 µL, giallo	■	3174 000 004
5–100 µL, giallo	■	3174 000 005
10–200 µL, giallo	■	3174 000 006
15–300 µL, arancione	■	3174 000 007
50–1.000 µL, blu	■	3174 000 008
Eppendorf Research® 3 neo , 1 canale, incl. busta di campioni di epT.I.P.S.® (x 10 puntali)		
0,1–2 mL, rosso	■	3174 000 009
0,25–5 mL, lilla	■	3174 000 010
0,5–10 mL, turchese	■	3174 000 011

Servizi di calibrazione per pipette¹ (la disponibilità varia a seconda del mercato, verificarla con il rappresentante di zona)

Nuova calibrazione per pipette ISO 17025 , solo per pipette monocanale nuove	0082 000 213
ISO 8655 con manutenzione preventiva inclusa , manutenzione e calibrazione secondo le specifiche Eppendorf/ISO 8655	0082 000 142

Accessori selezionati

Portapipette 2 , ospita 1 pipetta Research 3 neo nel supporto girevole 2 o nel supporto a parete	□	3116 000 295
Anelli ColorTag per contrassegnare le pipette , busta di campioni con 6 misure, ognuna in 2 colori (12 anelli) ²	12 colori	3102 666 000

¹ Per ulteriori servizi, consultare www.eppendorf.link/pipette-service

² Per ulteriori confezioni di ColorTag, consultare www.eppendorf.link/colortag



Scaricate la scheda tecnica del prodotto per le specifiche tecniche dettagliate



Trovate i puntali per pipetta, i servizi, gli accessori e i ricambi più adatti su
www.eppendorf.link/research3neo



Per saperne di più sui nostri innovativi epT.I.P.S.® BioBased, consultare

www.eppendorf.link/biobased-eptips



Il vostro rivenditore: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano 1
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.link/research3neo

ACT® is a registered trademark of My Green Lab®, USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf PhysioCare Concept®, epT.I.P.S.® and ep Dualfilter T.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. Bestell-Nr. AA01048450/IT1/PDF/0725/SSO · All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2025 by Eppendorf SE.