



Well within Reach

Sistema di supporto per pipette Eppendorf



Supporto pipette 2 e stand di ricarica 2



Protegete il vostro apparecchio per la manipolazione dei liquidi da possibili danni, contaminazioni o sostanze chimiche fuoriuscite sul banco. Gli stand per strumenti singoli hanno un design robusto e tengono saldamente un apparecchio manuale o elettronico. Con lo stand di ricarica 2, la vostra Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Xplorer plus o Multipipette® E3/E3x sarà sempre carica e pronta per l'uso.

Il supporto pipette 2 del tutto nuovo contiene una Eppendorf Multipipette M4. Questo supporto di sostegno è perfetto anche per una pipetta singola o multicanale Eppendorf Research® plus o Eppendorf Reference® 2, se usata con il supporto per pipette adatto.



Perfezione fino al minimo dettaglio

I supporti girevoli contengono tutte le pipette manuali Eppendorf attuali e la maggior parte dei predecessori.



I pittogrammi classificano chiaramente i supporti per pipette e gusci per la ricarica per facilitarne l'assegnazione in laboratorio.



Supporti per pipette e alloggiamenti per la ricarica quasi interscambiabili, senza uso di utensili.



Supporti retrocompatibili per Eppendorf Research e le pipette manuali Reference.



Grande manico per un facile trasporto dei portapipette girevoli da un banco all'altro.



I grandi piedini di gomma impediscono che fuoriescano liquidi da portapipette e supporto di sostegno sul banco da lavoro.



Supporto per pipette 2 e alloggiamento per la ricarica 2


Scegliete tra una vasta gamma di supporti per tutti gli strumenti attuali per la manipolazione dei liquidi manuale ed elettronica Eppendorf e la maggior parte dei predecessori. Posizionate le pipette e multipipette dove sono necessarie: montate su una parete,

su un ripiano sopra il banco da lavoro o dentro un armadietto di sicurezza biologico. Inoltre, tutti i supporti possono essere inseriti nel contenitore pipette 2. Sono disponibili anche gli alloggiamenti per la ricarica per l'installazione del caricabatterie girevole 2.

Contatti elettrici robusti progettati per un lungo funzionamento senza necessità di sostituzione.

I contatti per ricarica a forma V assicurano una connessione elettrica stabile tra l'alloggiamento per la ricarica e l'apparecchio elettronico.

La funzionalità avvolgicavo per cavi di alimentazione insoliti permette di tenere il banco da lavoro in perfetto ordine.

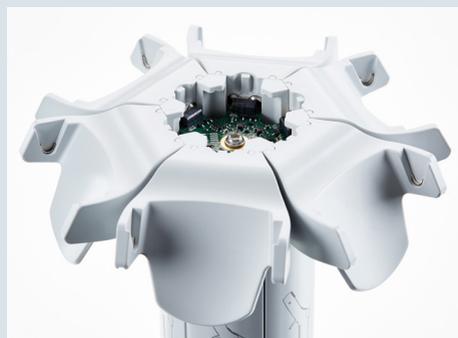

Un piccolo ingombro con un diametro di 18,5 cm rende i supporti di sostegno e i portapipette girevoli ideali in mancanza di spazio.

Gli intelligenti componenti elettronici di ricarica controllano fino a sei pipette Eppendorf Xplorer o Multipipette elettroniche.

Il connettore di alimentazione magnetico a rapida estrazione evita che le pipette e le multipipette cadano.

Contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole 2

Tenete tutte le pipette e Multipette Eppendorf a portata di mano.
Il contenitore pipette 2 per le pipette manuali e il caricabatterie girevole 2 per gli apparecchi elettronici offrono più flessibilità e capacità di prima.

Il caricabatterie girevole 2 Eppendorf contiene fino a sei pipette manuali singole o multicanale Eppendorf. In questo supporto girevole con un design completamente nuovo si possono sistemare tutte le ultime e meno recenti pipette manuali, comprese Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 e Biomaster®.

Il caricabatterie girevole 2 offre il 50% in più di capacità di prima e contiene fino a sei pipette elettroniche Eppendorf Xplorer o Xplorer plus. Se usato con alloggiamenti per la ricarica, il contenitore può contenere fino a sei Eppendorf Multipette E3/E3x o Multipette stream/Xstream. Oltre agli apparecchi elettronici, il caricabatterie girevole 2 è perfetto anche per pipette manuali Eppendorf, se usato con supporti per pipette opzionali.

Più flessibilità

- > I Carousel contengono tutti i tipi di pipette e Multipette Eppendorf
- > Tutte le pipette manuali Eppendorf vanno bene in un supporto girevole



Più capacità

- > Il caricabatterie girevole 2 per un massimo di sei apparecchi elettronici
- > I supporti contengono sia apparecchi manuali che elettronici

Più convenienza

- > Supporti per pipette intercambiabili, senza uso di utensili
- > Funzionalità avvolgicavo per i cavi di alimentazione non utilizzati

Più sicurezza per l'utente

- > Connettore di alimentazione magnetico per una connessione svelta e semplice
- > grandi piedini di gomma proteggono i Carousel dai liquidi versati sul banco di lavoro



> Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.eppendorf.com/pipetteholder


Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Carousel pipette 2 , per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, ulteriori supporti per pipette sono disponibili a scelta	3116 000.015
Carousel 2 , per 6 Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, incl. alimentatore, ulteriori alloggiamenti per la ricarica e supporti per pipette sono disponibili a scelta	3116 000.023
Stand di ricarica 2 , per un Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, funzionante con alimentatore fornito con Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus	3116 000.031
Stand di ricarica 2 , per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, funzionante con alimentatore fornito con Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream	3116 000.040
Supporto pipette 2 , per una Eppendorf Multipette® M4, senza funzione di ricarica, ulteriori supporti per pipette sono disponibili a scelta	3116 000.058
Supporto per pipette 2 , per una Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, per contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole Carousel 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso	3116 000.112
Supporto per pipette 2 , per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per contenitore pipette 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica	3116 000.120
Supporto per pipette 2 , per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, per contenitore pipette 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica	3116 000.139
Supporto per pipette 2 , per una Eppendorf Multipette® M4, per contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica	3116 000.147
Guscio per la ricarica 2 , per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per caricabatterie girevole 2, con funzione di ricarica	3116 602.007
Guscio per la ricarica 2 , per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, per caricabatterie girevole 2, con funzione di ricarica	3116 603.003

Scoprite il nuovo sistema di supporto per pipette

Il sistema di supporto per pipette Eppendorf offre dei portapipette girevoli, stand e agganci a parete molto flessibili per tutti gli strumenti Eppendorf per la manipolazione di liquidi, da quelli attuali a quelli meno recenti.

> www.eppendorf.com/pipetteholder

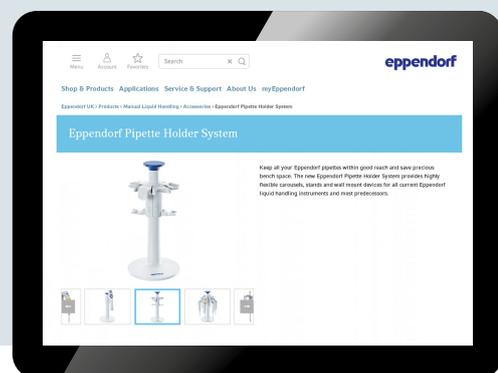

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com