

NOVITÀ: provetta
da 5,0 mL con tappo
a vite



L'elemento mancante

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, semplici e sicuri



Usati in combinazione con una vasta gamma di accessori, Eppendorf Tubes® 5.0 mL costituiscono l'alternativa ideale per il trattamento dei campioni con volumi medi!

Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Tappo a pressione

Utilizzo semplice, pratico ed ergonomico con una mano sola. Ampia superficie di scrittura

Purezza

Dipende dal tipo di applicazione, disponibile nei livelli di purezza Eppendorf, controllati e certificati per ogni lotto.

Sicurezza

Sistema g-Safe® a elevata stabilità di centrifugazione per protocolli affidabili, rapidi ed efficaci.



Tappo a vite

Le parti appiattite e scanalate favoriscono un funzionamento semplice e sicuro.

Materiale

Polipropilene chiaro della massima qualità, privo di biocidi, plastificanti o agenti di estrusione al fine di ottenere risultati sperimentali affidabili

Forma conica

Compatibilità con accessori per provette coniche da 15 mL: si può continuare a utilizzare gli adattatori e i rack già impiegati, risparmiando così sui costi.

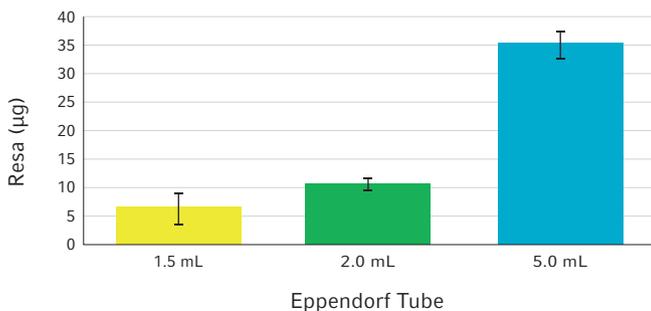


Fig. 1: resa maggiore durante l'isolamento di DNA; la resa di DNA plasmidico in caso di utilizzo di plasmidi low-copy può essere ottimizzata notevolmente aumentando il volume della cultura a 5 mL. Le Eppendorf Tubes da 5,0 mL consentono di effettuare la purificazione del DNA senza dover ripartire i campioni in diverse provette più piccole. I dati riportati nel grafico sono stati generati sulla base di un tipo di tappo a pressione per 5,0 mL; per ulteriori informazioni e la descrizione del protocollo, consultare la nota applicativa n. 262.

Intelligente e semplice, con metodo!

Linea completa di accessori

Il tipo di sistema Eppendorf per 5,0 mL rappresenta una soluzione completa per i flussi di lavoro nei laboratori. Le procedure di laboratorio possono essere eseguite senza problemi: in modo semplice, pratico ed economico!

Eppendorf offre una linea di accessori idonei. Un pipettaggio semplice ed efficiente, una delicata miscelazione, l'incubazione, un riempimento automatico, nonché una conservazione affidabile: tutto ciò funziona perfettamente anche con le provette Eppendorf Tube 5.0 mL!

La provetta conica è studiata per essere compatibile con gli accessori già utilizzati per le provette da 15 mL.

Accessori

- > Nuovi rotori ad alta velocità per le centrifughe Eppendorf 5430/R, 5427 R, 5804/R e 5810/R
- > Nuovi adattatori e inserti per tutti i rotori con fori per provette da 15 mL o 50 mL
- > Supporti funzionali dal design elegante per le postazioni del laboratorio
- > Scatole di conservazione per il congelamento
- > Nuovi termoblocchi da 5,0 mL per Eppendorf ThermoMixer® C e Eppendorf ThermoMixer® comfort, nonché Eppendorf ThermoStat™ C e Eppendorf ThermoStat™ plus
- > Nuovo modulo per rack per recipienti per 5,0 mL per il dispositivo automatico di pipettaggio epMotion®



Miscelazione e incubazione perfette con ThermoMixer C



Centrifugazione sicura con le centrifughe Eppendorf



Semplice implementazione del dispositivo automatico di pipettaggio epMotion



Nuovi tipi di supporti impilabili dal design elegante e scatole di conservazione per le basse temperature



Pipettaggio preciso in un solo passaggio con le pipette Eppendorf e gli epT.I.P.S.® da 5,0 mL



Adattatori ottimizzati per i rotori basculanti già esistenti

Scoprite l'elemento mancante: Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Con Eppendorf è iniziata oltre 50 anni fa l'evoluzione delle provette!
Da allora, le provette Eppendorf vengono impiegate nella pratica quotidiana in tutto il mondo. Attualmente i tubi Eppendorf rappresentano il culmine di tale sviluppo e sono lo standard per definizione nel trattamento dei campioni con volumi compresi tra 0,5 e 2,0 mL.

Per i volumi grandi sono disponibili provette coniche con tappo a vite (da 15 mL e 50 mL), mentre con i campioni di volume medio c'è un problema: non vi è altra scelta che utilizzare le grandi provette coniche con tappo a vite, un modo di lavorare poco pratico, dispendioso e che dà spesso luogo a contaminazioni.

Eppendorf è ora in grado di offrire «l'elemento mancante»: il tubo Eppendorf Tube 5.0 mL, che va a colmare la lacuna presente tra i vari tipi di provette già esistenti e consente un trattamento semplice e sicuro dei volumi fino a 5,0 mL.

Benefici di applicazione

- > Protocolli più semplici nel trattamento dei campioni fino a 5,0 mL
- > Rese maggiori durante l'isolamento di DNA/RNA, in particolare nel caso di campioni con una quantità ridotta di materiale di partenza
- > La disponibilità di tipi di tappo a pressione e a vite permette una selezione ottimale dei vari requisiti previsti per la preparazione, l'incubazione e la conservazione dei campioni o per altre applicazioni.
- > Pellet in piena sicurezza di sospensioni cellulari durante i passaggi
- > Preparazione e conservazione di Master Mix e soluzioni tampone
- > Sistema di conservazione che richiede poco spazio
- > Sicuro procedimento di lisi di cellule e tessuti
- > Tipo di provetta dal colore ambra per una conservazione al riparo dalla luce

- > www.eppendorf.com/5ml
- > www.eppendorf.com/consumables

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Cod. ord.
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™ , 200 provette (2 buste da 100)	0030 119.401
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean , 200 provette (2 buste da 100)	0030 119.460
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Sterile , 200 provette (10 buste da 20)	0030 119.487
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Biopur® , 50 provette (in confezioni singole)	0030 119.479
Eppendorf Tubi Protein LoBind da 5,0 mL, PCR clean , 100 provette (2 buste da 50)	0030 108.302
Eppendorf Tubi DNA LoBind da 5,0 mL, PCR clean , 200 provette (4 buste da 50)	0030 108.310
Starter set per Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean , 400 provette (2 pacchi con 2 buste da 100), 2 rack (da 16 posti), colori bianco, 8 adattatori universali per rotori con foro per provette coniche da 15 mL	0030 119.380
Eppendorf Quality™, ambra (protezione leggera), 200 provette (2 sacchetti x 100 provette)	0030 119.452
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite , 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 200 provette (2 sacchetti x 100 provette)	0030 122.305
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite, PCR clean , 200 provette (2 sacchetti x 100 provette)	0030 122.313
Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite , 5,0 mL, Sterili e prive di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA, 200 provette (2 sacchetti x 100 provette)	0030 122.321
Accessori di sistema	
Rack per 5,0 mL (16 posti) , 2 pz., colori bianco, adatto anche per provette coniche con tappo a vite da 15 mL	0030 119.495
Storage Box 5 x 5 , per 25 provette da 5 mL, 4 pezzi, altezza 63,5 mm, 2,5 pollici, in polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.532
Storage Box 5 x 5 , per 25 provette da 5 mL con tappo a vite, 2 pezzi, altezza 76,2 mm, 3 pollici, polipropilene, per il congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica	0030 140.613
Tube Clip 5.0 mL , 10 pz., per il fissaggio del tappo	0030 119.509
Centrifuge 5427 R: rotore	
Rotore FA-45-12-17, per 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 20.600 × g, tenuta di aerosol	5409 700.006
Centrifuge 5430/ 5430 R: rotori e adattatori	
Rotore FA-45-16-17, per 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 21.191 × g, tenuta di aerosol	5427 750.002
Adattatore per il rotore F-35-6-30 (foro grande), 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 7.129 × g	5427 747.001
Adattatore per il rotore F-35-6-30 (foro piccolo), 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 6.237 × g	5427 746.005
Centrifuge 5804/ 5804 R e 5810/ 5810 R: rotori e adattatori	
Rotore FA-45-20-17, per 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 20.913 × g, tenuta di aerosol	5820 765.003
Adattatore per il rotore F-34-6-38, 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 16.824 × g	5804 777.00
Adattatore per il rotore F-45-6-30, 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 19.806 × g	5820 730.005
Adattatore per il rotore S-4-104, 2 pz., per 28 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 3.214 × g	5825 739.000
Adattatore per il rotore S-4-72, 2 pz., per 32 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 3.215 × g	5804 793.005
Centrifughe con rotori per provette con tappo a vite da 15 mL: adattatori universali	
Inserto, 8 pz., per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5820 732.008
Eppendorf ThermoMixer® comfort e Eppendorf ThermoStat™ plus: blocco di sostegno intercambiabile , per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000.333
Eppendorf ThermoMixer® C e Eppendorf ThermoStat™ C: Eppendorf SmartBlock per 5,0 mL , per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5309 000.007
epMotion®: modulo per rack per recipienti , per 4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5075 799.340

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com