



Find Your Best Fit

새로운 Eppendorf Research® 3 neo 피펫과 함께하세요. 맞춤 설정, 정밀성 그리고 편안함까지 모두 담았습니다.



It's your pipette, your way.

차세대 Eppendorf 피펫으로 액체 취급 방식을 혁신하는 Eppendorf 여정에 동참하세요. Research 3 neo는 액체 취급에 있어 획일적인 접근 방식에서 벗어나 개인의 필요에 맞춰 피펫팅 경험을 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다.

다양한 맞춤형 설정과 액세서리로 나만의 피펫팅을 만들어 보세요. 탁월한 안정성과 인체공학적 설계를 경험해 보세요.

4-digit display
넓은 시야각으로 볼륨을
쉽고 정확하게 조절할 수 있습니다.



Volume lock
의도치 않은 볼륨 변화로부터
보호합니다.

Operating concept
하나의 버튼으로 볼륨 선택 및
피펫팅이 가능합니다.
모든 사용자에게 적합한 인체공
학적 디자인과 작은 손에도 편안
한 사용감을 제공합니다.

Unique volume gear shift
> Fast 모드: 최대 40% 더 빠른
조정
> Easy 모드: 한 손으로 간편하게
미세 조정

Ergonomic design
힘이 적게 들면서도 부드러운 피펫
팅이 가능하며, 편안한 곡선 모양과
현대적인 디자인을 자랑합니다.

Research 3 neo pipettes
사용자 정의 가능한 설정으로
간편한 피펫팅, ISO 8655 이상의 성
능, 가벼운 무게와 힘, 높은 신뢰성,
오토클레이브 사용에 적합합니다.

Temporary adjustment
액체 종류, 팁 타입, 고도 등에 맞춰
조정하여 재교정 없이도
정확도를 유지할 수 있습니다.
견고한 커버 플러그는
분실의 위험이 없습니다.

Open cone system
Eppendorf 팁에 최적화되어 있지만
다른 팁과도 호환 가능합니다.
스프링 로딩 방식으로 Eppendorf 팁을
장착하고 제거할 때 발생하는 힘을 줄여
줍니다.



Made for your hands

Your best and most comfortable fit


고객의 실험실 생활 개선을 목표로, 인체공학을 중심에 둔 Eppendorf PhysioCare Concept®을 선도합니다. Research 3 피펫은 손에 부담을 주지 않으면서도 정밀성을 높였으며, 모든 디테일은 사용자의 편안함과 사용 편의성을 고려하여 설계되었습니다.

- > 새로운 작동 방식: 볼륨 조절 기능이 통합된 더 짧아진 피펫팅 버튼
- > 완벽하게 균형 잡힌 유기적이고 가벼운 디자인
- > 인체공학적인 핑거 후크로 부담 최소화
- > 스프링 장착 팁 콘으로 팁 장착 및 제거 용이
- > 전반적으로 이전보다 향상된 인체공학적 디자인



Eppendorf PhysioCare Concept®에
대한 자세한 정보:
www.eppendorf.link/physiocare

PhysioCare
concept

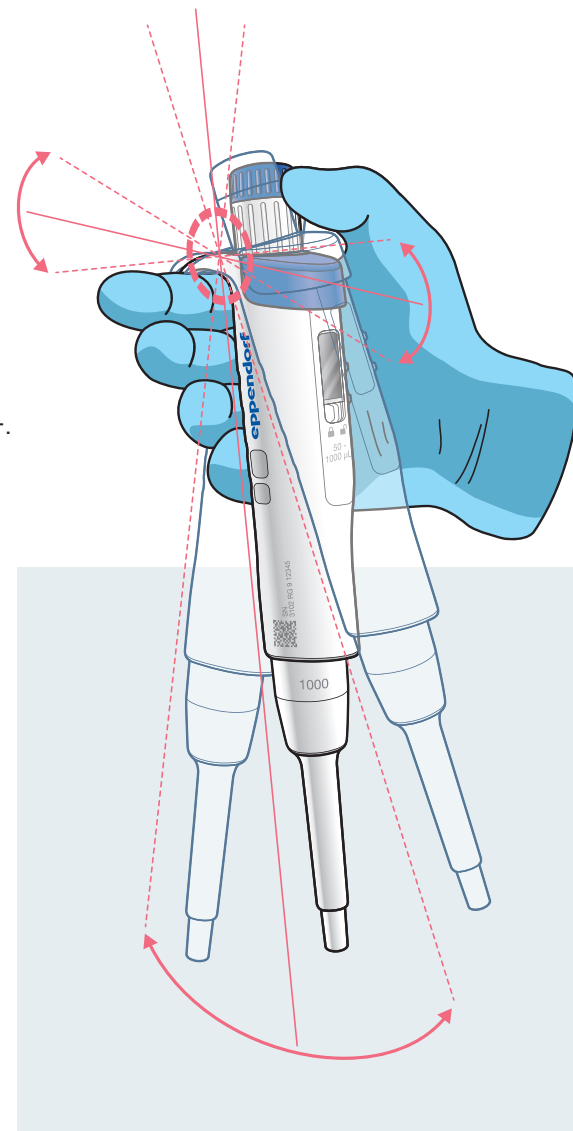

»Fast«



»Easy«



Make pipetting your own

Adjust it!

Eppendorf Research 3 neo는 두 가지 볼륨 조절 속도를 갖춘 혁신적인 볼륨 기어를 탑재했습니다.

»fast« 모드를 선택하면 피펫 볼륨 변경 속도를 높이고 회전 횟수를 줄여 최대 40%* 시간을 절약할 수 있습니다.

»easy« 모드를 선택하면 필요한 작동 힘을 줄이고 피펫 볼륨을 미세하게 조절하여 근육 피로를 완화하고 한 손으로 간편하게 볼륨을 변경할 수 있습니다.

* 시간 절약 효과는 사용하는 피펫 모델에 따라 다릅니다.

Tag it!

다양한 색상과 크기로 제공되는 ColorTag 피펫 마킹 링으로 피펫을 구분하거나 교정 날짜를 표시하세요. 필요에 따라 이름, 날짜 및 세부 정보를 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

Attach it!

팁은 피펫팅 결과에 매우 중요합니다.

Research 3 neo 피펫과 epT.I.P.S.® 팁은 함께 작동하여 최고의 정확도와 정밀도를 위한 시스템을 구축합니다. 오픈 콘 시스템은 다른 팁과도 호환됩니다.

Modify it!

피펫 설정을 용액의 성질, 팁 종류, 리버스 피펫팅 또는 실험실 고도에 맞게 일시적으로 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 재교정 번거로움 없이 정확한 피펫팅이 가능합니다. 자세한 내용은 설명서를 다운로드하세요.



1. www.eppendorf.link/newpipette
웹사이트 방문



2. 일련번호 입력 및
사용 설명서 다운로드



동영상 가이드 보기
www.eppendorf.link/r3-pip



제품 페이지에서 모든 기능 보기:
www.eppendorf.link/research3neo



Pipettes you can count on


뛰어난 정확도와 긴 수명

Eppendorf Research 3 neo는 Eppendorf 피펫의 오랜 사랑을 받아온 탁월한 액체 핸들링 기술을 바탕으로 제작되었습니다.

심층적인 테스트를 거쳐 싱글 캐스트 하우징과 고품질 소재를 갖춘 Eppendorf Research 3 neo는 오랜 수명, 정확도, 신뢰성을 염두에 두고 제작되었습니다.

최고의 품질을 유지하기 위해 Eppendorf는 제품 개발 과정에서 광범위한 테스트를 시행했습니다.


정확도 및 정밀성 테스트, 기후 테스트, 낙하 테스트, 고압증기멸균, 자외선 및 내화학성 테스트. 수년간 로봇을 이용한 시뮬레이션을 통해 매일 사용 환경을 실험실 환경에서 테스트했습니다. 간단히 말해, Eppendorf는 모든 제품을 철저히 테스트합니다.

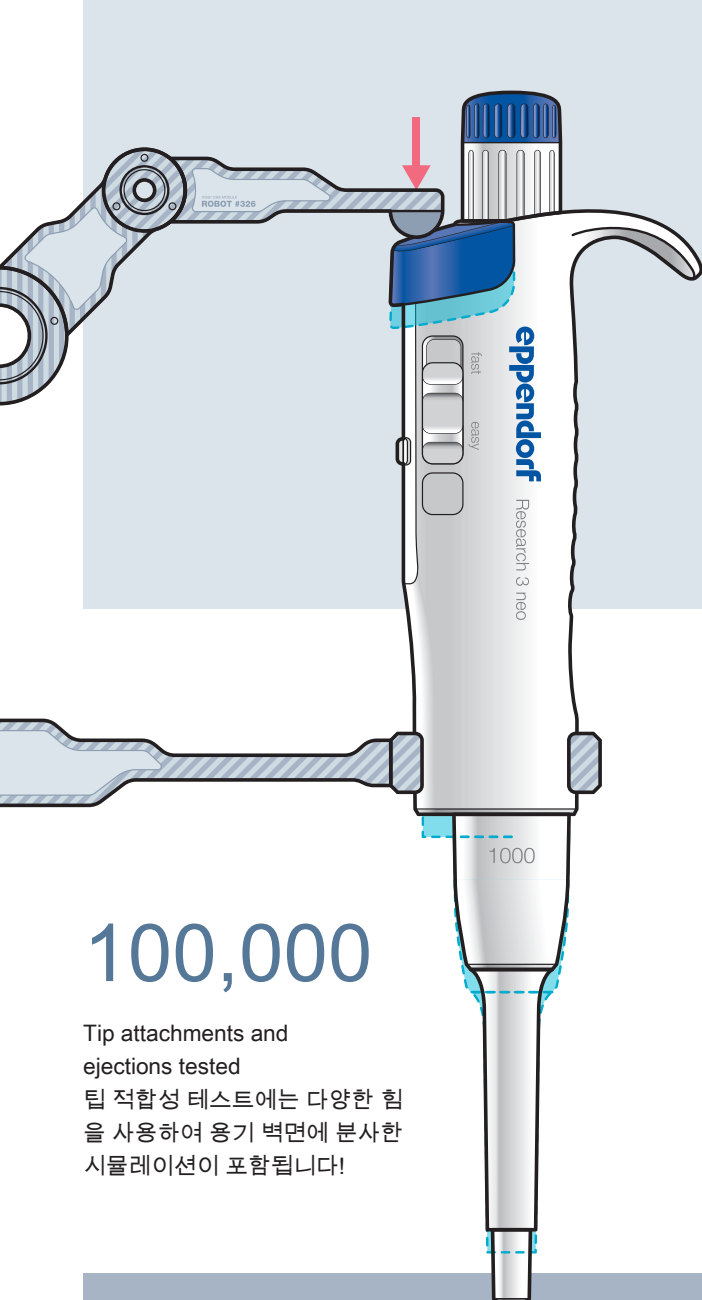

26,000

Volume adjustments

최대 볼륨에서 최소 볼륨까지,
그리고 백테스트까지;
빠르고 쉬운 모드!

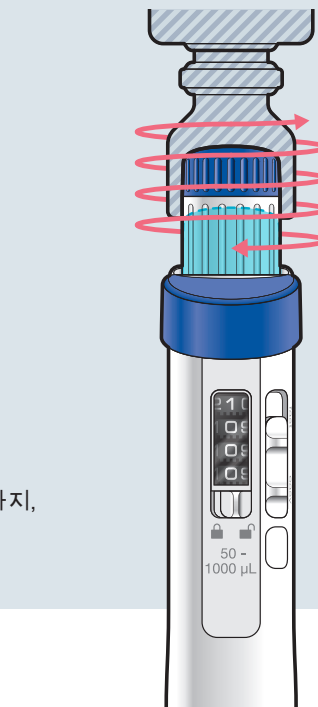

100,000

Tip attachments and
ejections tested

팁 적합성 테스트에는 다양한 힘을 사용하여 용기 벽면에 분사한 시뮬레이션이 포함됩니다!

200,000

Pipetting strokes tested.

이는 매일 5년 동안 지속적으로 사용할 수 있는 수치입니다.



Our commitment to sustainability

Eppendorf에서 지속가능성은 단순한 목표가 아니라 헌신입니다.

높은 품질, 긴 수명, 그리고 수리 용이성을 자랑하는 Eppendorf 피펫은 환경 영향을 최소화하고 성능을 극대화하도록 설계되었습니다.

Eppendorf 제조 공장은 100% 재생 에너지, ISO 14001 인증, 그리고 책임 있는 화학물질 관리를 기반으로 합니다. Research 3 neo 피펫은 ACT® 인증을 받았으며, 이는 Eppendorf의 친환경 관행에 대한 독립적인 검증을 제공합니다. 이 피펫은 이전 버전보다 더 작은 재활용 가능한 포장으로 제공되어 공급망의 CO₂ 배출량을 줄여줍니다.

Research 3 neo 피펫은 100% 바이오 기반 폴리프로필렌으로 제작된 혁신적인 epT.I.P.S.® 바이오 기반 팁과도 호환되어 제품과 관련된 탄소 발자국을 크게 줄여줍니다.



The complete solution

고객의 성공을 위한 저희의 헌신은 피펫, 팁, 교정 서비스 그 이상으로 확장됩니다. 인증서, 다국어 매뉴얼, 어플리케이션 노트, 사용자 가이드, 그리고 통찰력 있는 백서 등 풍부한 자료를 간편하게 이용하세요.

도움이나 안내가 필요하신가요?

저희의 전문적인 어플리케이션 지원, 유익한 웨비나, 다양한 교육 자료는 모든 단계에서 종합적인 지원을 제공해 드립니다.

추가 정보, 서비스 문의 및 지역별 혜택은 가까운 Eppendorf 담당자에게 문의하세요.

선택의 힘

피펫팅 혁명에 동참하여 선택의 힘을 통해 이전과는 비교할 수 없는 정밀함과 편안함을 경험해 보세요.



제품 페이지에서 관련 다운로드 및 서비스 제품 찾기:
www.eppendorf.link/research3neo

Eppendorf Research 3 neo 피펫 웹페이지를 방문하세요:
www.eppendorf.link/research3neo



주문 정보

Description	Color Code	Order no.
Eppendorf Research® 3 neo, 1-channel, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and ep Dualfilter T.I.P.S.® "PCR clean and sterile" Rack (x 96 tips)		
0.1 – 2.5 µL, dark gray		3174 000 001
Eppendorf Research® 3 neo, 1-channel, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased "PCR clean and sterile" Reload (x 96 tips)		
0.5 – 10 µL, medium gray		3174 000 002
1 – 20 µL, light gray		3174 000 003
1 – 20 µL, yellow		3174 000 004
5 – 100 µL, yellow		3174 000 005
10 – 200 µL, yellow		3174 000 006
15 – 300 µL, orange		3174 000 007
50 – 1,000 µL, blue		3174 000 008
Eppendorf Research® 3 neo, 1-channel, incl. epT.I.P.S.® sample bag (x 10 tips)		
0.1 – 2 mL, red		3174 000 009
0.25 – 5 mL, violet		3174 000 010
0.5 – 10 mL, turquoise		3174 000 011

피펫 교정 서비스¹ (시장별로 제공 여부가 다르므로 담당자에게 확인하시기 바랍니다.)

New Pipette Calibration ISO 17025, only for new 1-channel pipettes	0082 000 213
ISO 8655 including Preventive Maintenance, maintenance & calibration in acc. with Eppendorf / ISO 8655 specifications	0082 000 142

액세서리

Pipette Holder 2, holds 1 Research 3 neo pipette in Pipette Carousel 2 or wall mounting		3116 000 295
ColorTag pipette marking rings, sample bag with 6 sizes, each in 2 colors (12 marking rings)²	12 Colors	3102 666 000

¹ www.eppendorf.link/pipette-service에서 더 많은 서비스를 확인할 수 있습니다.

² www.eppendorf.link/colortag에서 더 많은 ColorTag 팩을 확인할 수 있습니다.



자세한 기술 사양을 보려면 제품 데이터 시트를 다운로드하세요.

적합한 피펫 팁, 서비스,
액세서리 및 예비 부품 찾기:
www.eppendorf.link/research3neo



혁신적인 epT.I.P.S.® BioBased에 대해
자세히 알아보기:

www.eppendorf.link/biobased-eptips



에펜도르프코리아(주) : 06235 서울시 강남구 테헤란로 322 서관 6층
Contact : T)1577-4395 Service : T)1577-7167 E-Mail: cs@eppendorf.kr Homepage : www.eppendorf.kr

www.eppendorf.link/research3neo

ACT® is a registered trademark of My Green Lab®, USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf PhysioCare Concept®, epT.I.P.S.® and ep Dualfilter T.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
Bestell-Nr. AA01048975/KR1/PDF/0725/SSO · All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2025 by Eppendorf SE.