



Find Your Best Fit

Nowe pipety Eppendorf Research® 3 neo. Personalizacja, precyzja i komfort, wszystko w Twoich rękach.



Twoja pipeta, Twój sposób pracy.

Dołącz do nas w naszej misji transformacji obsługi cieczy z nową generacją pipet Eppendorf. Pipeta Research 3 neo pomoże Ci zerwać z podejściem „jeden rozmiar do wszystkiego” i umożliwi dostosowanie pipetowania do indywidualnych potrzeb.

Wykonuj pipetowanie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dzięki szerokiej gamie konfigurowalnych ustawień i akcesoriów, korzystając z niezrównanej niezawodności i ergonomii.

4-cyfrowy wyświetlacz
Łatwa i precyzyjna regulacja objętości z dużym kątem widzenia.



Blokada objętości
Chroni przed niezamierzoną zmianą objętości.



reddot winner 2026

Koncepcja obsługi
Wybór objętości i pipetowanie jednym przyciskiem: ergonomia dla wszystkich z dodatkowym komfortem dla mniejszych dłoni.

Unikalne opcje zmiany objętości
Tryb szybki: regulacja szybsza nawet o 40%; Tryb łatwy: łatwa regulacja jedną dłonią.

Ergonomiczny design
Płynne pipetowanie z niewielkim nakładem siły; wygodny, zaokrąglony kształt i nowoczesny wygląd.

Pipety Research 3 neo
Łatwe pipetowanie dzięki konfigurowalnym ustawieniom, wydajność przekraczająca wymagania normy ISO 8655, niska waga i siły, duża niezawodność i pełna autoklawowalność.

Tymczasowa regulacja
Dostosowanie do rodzajów cieczy, geometrii końcówki, wysokości nad poziomem morza i innych czynników w celu zapewnienia dokładności bez konieczności ponownej kalibracji. Solidna zaślepka zapobiega gubieniu naklejek.

System z otwartym stożkiem
Zoptymalizowany dla końcówek Eppendorf, ale kompatybilny z innymi końcówkami. Obciążenie sprężynowe redukuje siły mocowania i wyrzutu w przypadku końcówek Eppendorf.



Odwiedź naszą stronę docelową produktu
www.eppendorf.link/best-fit

Dane techniczne na naszej stronie produktu:
www.eppendorf.link/research3neo



Stworzona z myślą o Twoich dłoniach


Twoje najlepsze i najwygodniejsze dopasowanie

W naszej misji ułatwiania klientom pracy w laboratorium realizujemy Eppendorf PhysioCare Concept® - koncepcję, która w centrum uwagi stawia ergonomię. Pipety Research 3 są lekkie, a jednocześnie bardzo precyzyjne. Każdy ich szczegół został zaprojektowany z myślą o wygodzie i łatwości użytkowania. Oto przykłady:

- > Nowa koncepcja obsługi: krótszy przycisk pipetowania ze zintegrowaną regulacją objętości
- > Doskonale wyważona, organiczna, lekka konstrukcja
- > Ergonomiczny haczyk na palec minimalizujący obciążenie
- > Sprężynowe stożki końcówek pozwalają na łatwe mocowanie końcówki i wyrzucanie jej z niewielką siłą
- > Lepsza ogólna ergonomia niż kiedykolwiek do tej pory



Przeczytaj więcej
o Eppendorf PhysioCare Concept®:
www.eppendorf.link/physiocare

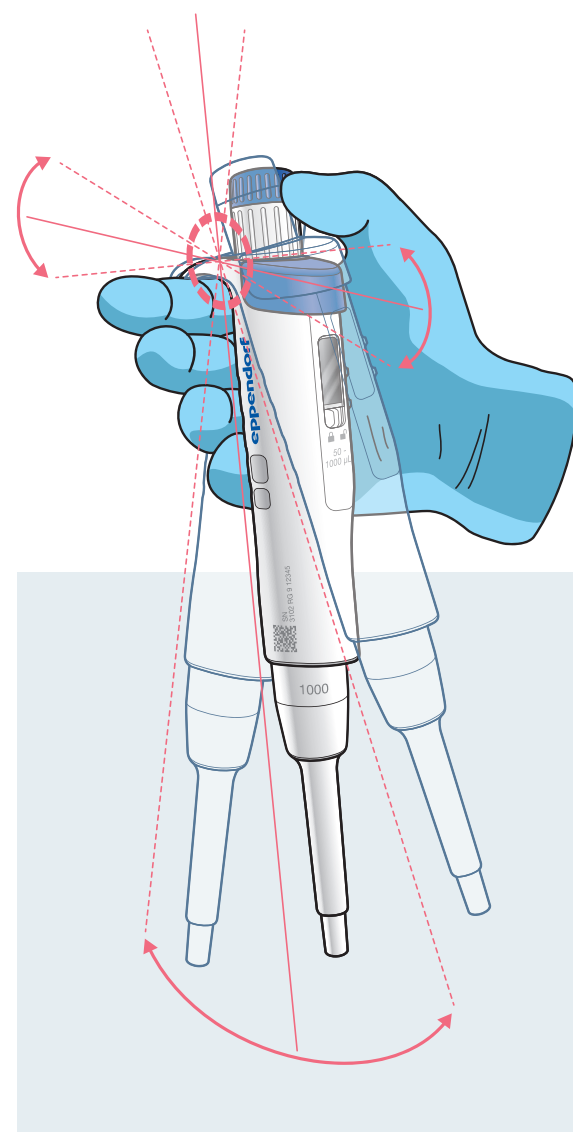

Pipetuj na swój sposób

Wyreguluj!

Pipeta Eppendorf Research 3 neo jest wyposażona w innowacyjny system z dwiema prędkościami regulacji objętości. Ustawienie »fast« przyspiesza zmianę objętości pipetowania dzięki mniejszej liczbie obrotów i pozwala zaoszczędzić do 40%* czasu. Z kolei ustawienie »easy« redukuje siłę niezbędną do obsługi i pozwala precyzyjnie dostosować pipetowaną objętość, łagodząc zmęczenie mięśni i umożliwiając łatwą zmianę objętości jedną dłonią.

* Oszczędność czasu zależy od używanego modelu pipety

Oznacz!

Oznacz swoją pipetę lub datę jej kalibracji za pomocą dostępnych w różnych kolorach i rozmiarach pierścieni do oznaczania pipet ColorTag. W razie potrzeby możesz łatwo zaktualizować nazwy, daty i szczegóły.

Założ końcówkę!

Końcówka ma kluczowe znaczenie dla procesu pipetowania. Pipety Research 3 neo i końcówki epT.I.P.S.® współpracują ze sobą perfekcyjnie, zapewniając najwyższą dokładność i precyzję. System z otwartym stożkiem umożliwia również kompatybilność z innymi końcówkami.

Zmodyfikuj!

Dostosuj tymczasowo ustawienia pipety do cieczy niewodnych, geometrii końcówek, pipetowania odwrotnego lub wysokości laboratorium nad poziomem morza. Pozwala to na dokładne pipetowanie bez uciążliwej ponownej kalibracji. Pobierz instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.



1. Odwiedź
www.eppendorf.link/newpipette




2. Wprowadź numer seryjny i pobierz instrukcję



Obejrzyj samouczek
www.eppendorf.link/r3-pip



Odkryj wszystkie funkcje na naszej stronie produktu:
www.eppendorf.link/research3neo

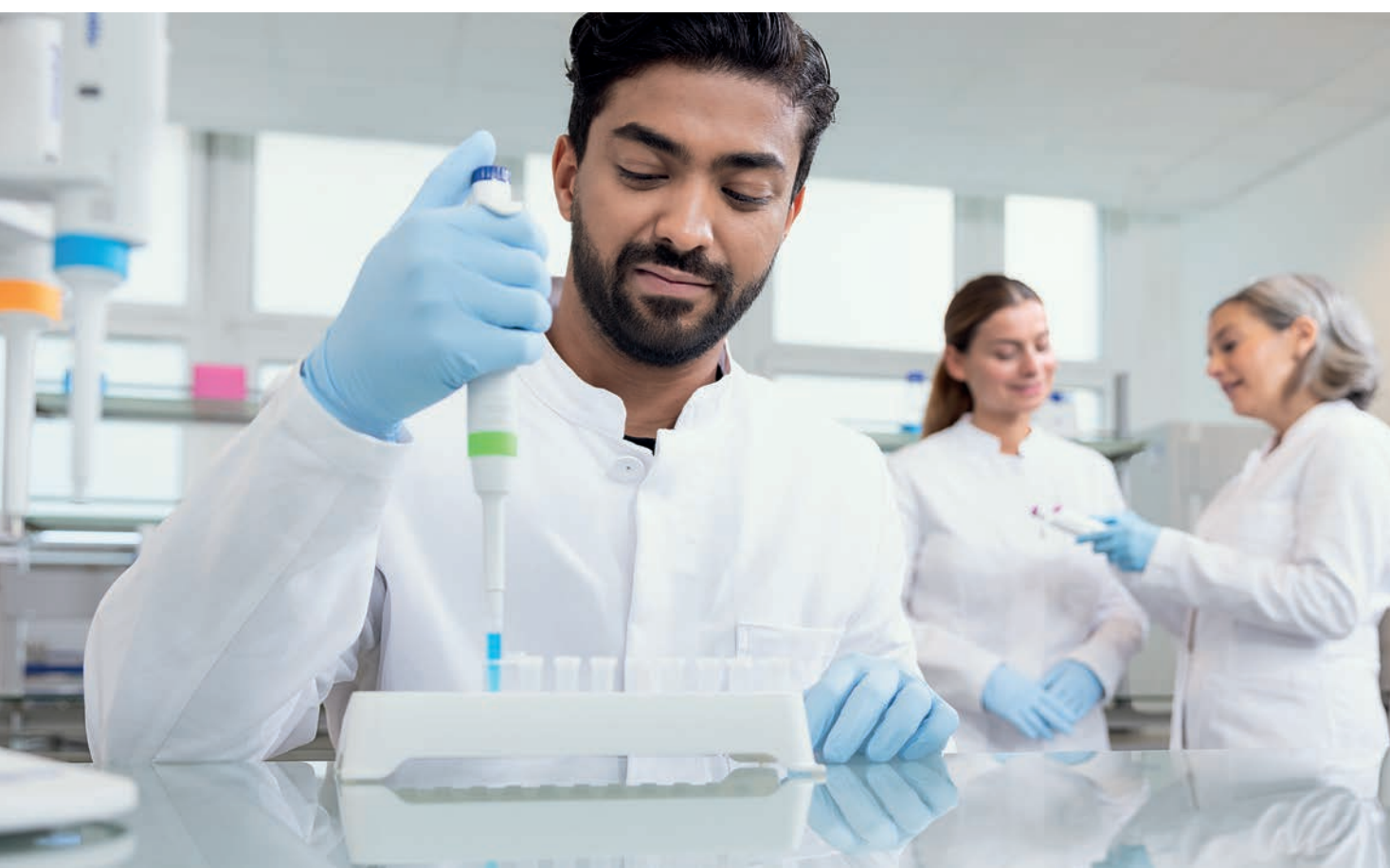

Pipety, na które możesz liczyć

Renomowana dokładność i trwałość


Pipeta Eppendorf Research 3 neo jest wykonana z tą samą doskonałością w obsłudze cieczy, która przesądziła o popularności naszych pipet. Pipety Eppendorf Research 3 neo zostały poddane obszernym testom, a ponieważ są wykonane z pojedynczego odlewu i wysokiej jakości materiałów, są długowieczne, dokładne i niezawodne.

Aby zapewnić najwyższą jakość, podczas opracowywania produktów przechodzą one szeroko zakrojone testy. Testy dokładności i precyzji. Testy klimatyczne. Testy upadku. Testy odporności na autoklawowanie, promieniowanie UV i substancje chemiczne. Codzienne użytkowanie przez wiele lat symulowane za pomocą robotów. Testy w rzeczywistych warunkach laboratoryjnych. Podsumowując: testujemy je. Dokładnie.



26 000

regulacji objętości
przetestowane od objętości nominalnej do minimalnej i z powrotem; w trybie szybkim (»fast«) i trybie łatwym (»easy«)!

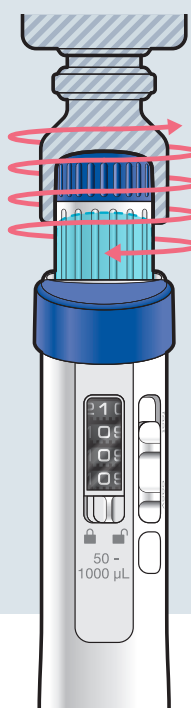

100 000

mocowań i wyrzutów końcówek - potwierdzone testami.
Dodatkowo nasze testy dopasowania końcówek obejmują symulację dozowania na ściankę naczynia z różną siłą!




200 000
skoków pipetowania - potwierdzone testami.
Odpowiada to ciągłemu użytkowaniu przez około 5 lat.

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Dla Eppendorf zrównoważony rozwój to nie tylko cel - to nasze zobowiązanie. Nasze pipety charakteryzujące się wysoką jakością, trwałością i możliwością naprawy, zostały zaprojektowane tak, aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko przy jednoczesnej maksymalnej wydajności.

Nasza fabryka opiera się w 100% na energii odnawialnej, certyfikacie ISO 14001 i odpowiedzialnym zarządzaniu chemikaliami. Pipety Research 3 neo posiadają oznaczenie ACT®, które stanowi niezależne potwierdzenie naszych ekologicznych praktyk. Pipety są dostarczane w opakowaniach nadających się do recyklingu, które są teraz mniejsze niż poprzednie wersje, pozwalając na zmniejszenie emisji CO₂ w łańcuchu dostaw. Pipety Research 3 neo są oczywiście również kompatybilne z naszymi innowacyjnymi końcówkami epT.I.P.S.® BioBased, które są wykonane w 100% z polipropylenu pochodzenia biologicznego i znacznie zmniejszają ślad węglowy związany z produktami.

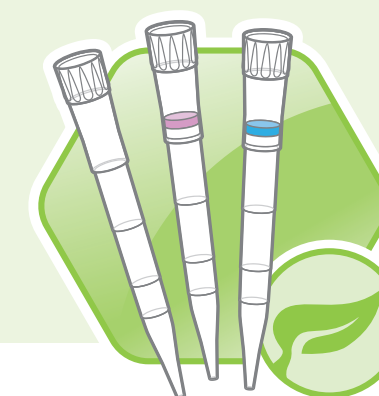

Kompletne rozwiązanie

Nasze zaangażowanie w Twój sukces wykracza daleko poza pipety, końcówki i usługi kalibracji. Do Twojej dyspozycji są bogate zasoby, w tym certyfikaty, wielojęzyczne podręczniki użytkownika, noty aplikacyjne, instrukcje obsługi i wnikliwe białe książki – wszystko to na wyciągnięcie ręki.

Potrzebujesz pomocy lub wskazówek? Nasze wsparcie ekspertów w zakresie zastosowań, webinaria informacyjne i obszernie zasoby szkoleniowe zapewnią Ci kompleksową pomoc na każdym etapie.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Eppendorf, aby uzyskać dodatkowe informacje, złożyć zapytania serwisowe i poznać lokalne oferty.

Tu chodzi o wybór

Dołącz do rewolucji w pipetowaniu i dowiedz się, jak możesz doświadczyć nieznanej dotąd precyzji i komfortu dzięki możliwości wyboru.



Odpowiednie pliki do pobrania i produkty serwisowe znajdziesz na naszej stronie produktu:
www.eppendorf.link/research3neo

Odwiedź stronę internetową pipety Eppendorf Research 3 neo:
www.eppendorf.link/research3neo



Ordering information

Description	Color Code	Order no.
Eppendorf Research® 3 neo , 1-channel, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and ep Dualfilter T.I.P.S.® "PCR clean and sterile" Rack (x 96 tips)		
0.1–2.5 µL, dark gray		3174000001
Eppendorf Research® 3 neo , 1-channel, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased "PCR clean and sterile" Reload (x 96 tips)		
0.5–10 µL, medium gray		3174000002
1–20 µL, light gray		3174000003
1–20 µL, yellow		3174000004
5–100 µL, yellow		3174000005
10–200 µL, yellow		3174000006
15–300 µL, orange		3174000007
50–1,000 µL, blue		3174000008
Eppendorf Research® 3 neo , 1-channel, incl. epT.I.P.S.® sample bag (x 10 tips)		
0.1–2 mL, red		3174000009
0.25–5 mL, violet		3174000010
0.5–10 mL, turquoise		3174000011
Eppendorf Research® 3 neo , 3-pack, 1-channel, incl. 3x epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and pipette pen		
3-pack Option 1: 0.5–10 µL, 5–100 µL, 50–1,000 µL		3174000200
3-pack Option 2: 1–20 µL yellow, 10–200 µL, 50–1,000 µL		3174000201
Eppendorf Research® 3 neo , 3-pack, 1-channel, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips), 2x sample bags (x 10 tips) and pipette pen		
3-pack Option 3: 50–1,000 µL, 0.25–5 mL, 0.5–10 mL		3174000202
Eppendorf Research® 3 neo , 6-pack, 1-channel, incl. Pipette Carousel 2, 6x epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 tips) and 2x pipette pen		
0.1–2.5 µL, 0.5–10 µL, 1–20 µL yellow, 5–100 µL, 10–200 µL, 50–1,000 µL		3174000203
Selected services¹ (availability varies by market – please check with your representative)		
New Pipette Calibration ISO 17025 , only for new 1-channel pipettes		0082000213
Selected accessories		
Pipette Carousel 2 , with holders for 6 Research 3 neo pipettes		3116000236
Pipette Holder 2 , holds 1 Research 3 neo pipette in Pipette Carousel 2 or wall mounting		3116000295
ColorTag pipette marking rings , sample bag with 6 sizes, each in 2 colors (12 marking rings) ²	12 Colors	3102666000

¹ For further available services please check www.eppendorf.link/pipette-service

² For further available ColorTag packs please check www.eppendorf.link/colortag



Download product data sheet for detailed technical specifications

Find matching pipette tips, services, accessories and spare parts:

www.eppendorf.link/research3neo



Learn more about our innovative epT.I.P.S.® BioBased at:

www.eppendorf.link/biobased-eptips



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.link/research3neo

ACT® is a registered trademark of My Green Lab®, USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf PhysioCare Concept®, epT.I.P.S.® and ep Dualfilter T.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. Order No. AA01048120/PL2/PDF/0626/SSO - All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2026 by Eppendorf SE.