

Find Your Best Fit

Com as pipetas Eppendorf Research® 3 neo. Personalização, precisão e conforto: tudo em suas próprias mãos.



É a sua pipeta, do seu jeito.

Se junte à nossa missão de transformar o manuseio de líquidos com a próxima geração de pipetas Eppendorf. A Research 3 neo chegou para ajudar você a se libertar de uma abordagem uniformizada para o manuseio de líquidos, possibilitando a personalização da sua experiência de pipetagem de acordo com as suas necessidades pessoais.

Domine a sua pipetagem com uma variedade de configurações e acessórios customizáveis, tudo isso enquanto experimenta uma confiabilidade e uma ergonomia imbatíveis.



Visite a nossa página inicial de produto
www.eppendorf.link/best-fit

Visor de 4 dígitos
Ajuste fácil e preciso do volume com alto ângulo de visão.



Bloqueio do volume
Proteção contra alterações acidentais do volume.

Conceito de funcionamento
Seleção do volume e pipetagem com um único botão: ergonomia para todos, com conforto extra para mãos mais pequenas.

Mudança de volume única
Modo rápido: ajuste até 40% mais rápido; Modo fácil: ajuste fino fácil com uma só mão.

Design ergonômico
Pipetagem suave com forças reduzidas; com forma curva confortável e visual moderno.

Pipetas Research 3 neo

Pipetagem sem esforço com configurações customizáveis, performance além da norma ISO 8655, peso e forças reduzidas, alta confiabilidade e capacidade total de autoclavagem.

Ajuste temporário

Ajuste para tipos de líquido, geometria da ponteira, altitude e mais fatores, para manter a exatidão sem recalibrar. A sólida tampa de cobertura evita perder etiquetas.

Sistema de cone aberto

Otimizado para ponteiras Eppendorf mas compatível com outras ponteiras. O carregamento por mola reduz as forças de aderência e ejeção com ponteiras Eppendorf.



Concebida para suas mãos


A melhor solução com o máximo conforto para você

Como parte de nossa missão para melhorar a vida nos laboratórios de nossos clientes, promovemos o Eppendorf PhysioCare Concept® que coloca a ergonomia no centro das atenções. As pipetas Research 3 são leves nas mãos mas muito precisas, com cada detalhe concebido para lhe dar conforto e facilidade de uso, incluindo:

- > Novo conceito de funcionamento: botão de pipetagem mais curto com ajuste de volume integrado
- > Design perfeitamente equilibrado, orgânico e leve
- > Gancho para o dedo ergonômico para esforço reduzido
- > Cones de ponteira com mola para fixação fácil da ponteira e força de ejeção reduzida
- > Ergonomia global melhor do que nunca



Leia mais sobre o Eppendorf PhysioCare Concept®:
www.eppendorf.link/physiocare

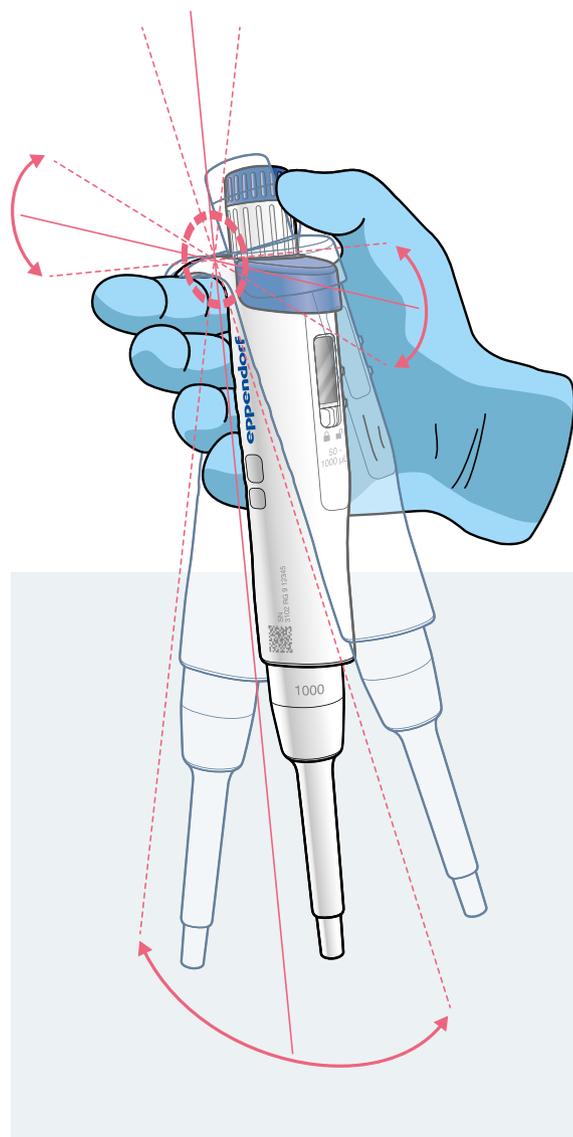

«rápido»



«fácil»



Domine a sua pipetagem

Ajuste tudo!

A Eppendorf Research 3 neo apresenta uma inovadora alteração de volume com duas velocidades diferentes de ajuste do volume. Escolha a configuração «rápido» para acelerar as alterações do volume de sua pipeta com menos ciclos e economize até 40%* de seu tempo. Em alternativa, escolha a velocidade «fácil» para reduzir a força operacional necessária e regular o volume de sua pipeta, aliviando a fadiga muscular e permitindo alterações de volume fáceis somente com uma mão.

* A economia de tempo depende do modelo de pipeta usado

Marque tudo!

Identifique a sua pipeta ou marque a data de sua calibração com os anéis de marcação de pipeta ColorTag, disponíveis em várias cores e tamanhos. Atualize nomes, datas e detalhes facilmente e conforme precisar.

Conecte tudo!

A ponteira é crucial para sua experiência de pipetagem. As pipetas Research 3 neo e as ponteiras epT.I.P.S.® trabalham em conjunto, criando um sistema que garante a nossa exatidão e precisão máximas. Porém, o sistema de cone aberto também oferece compatibilidade com outras ponteiras.

Mude tudo!

Ajuste temporariamente as configurações de sua pipeta para líquidos não aquosos, geometrias de ponteira, pipetagem reversa ou a altitude de seu laboratório. Isso permite uma pipetagem precisa sem o incômodo da recalibração. Baixe o manual para saber mais.



1. Visite www.eppendorf.link/newpipette



2. Insira o # de série e baixe o seu manual



Veja o tutorial www.eppendorf.link/r3-pip



Descubra todas as funcionalidades na nossa página de produto: www.eppendorf.link/research3neo




Pipetas confiáveis

Exatidão e longevidade reconhecidas

A Eppendorf Research 3 neo foi criada com a mesma excelência de manuseio de líquidos que tornou as nossas pipetas tão apreciadas. Submetida a testes extensivos, para além de apresentar uma carcaça de peça única e materiais de qualidade, a Eppendorf Research 3 neo foi concebida com o objetivo de obter máxima longevidade, exatidão e confiabilidade.

Para salvaguardar a nossa qualidade premium, implementamos testes extensivos no nosso processo de desenvolvimento de produtos. Testes de exatidão e precisão. Testes climáticos. Testes de gotejamento. Testes de autoclavagem, UV e resistência a substâncias químicas. Simulação, com robôs, do uso diário durante muitos anos. Testes em ambientes reais de laboratório. Resumindo: nós testamos os nossos produtos. Exhaustivamente.

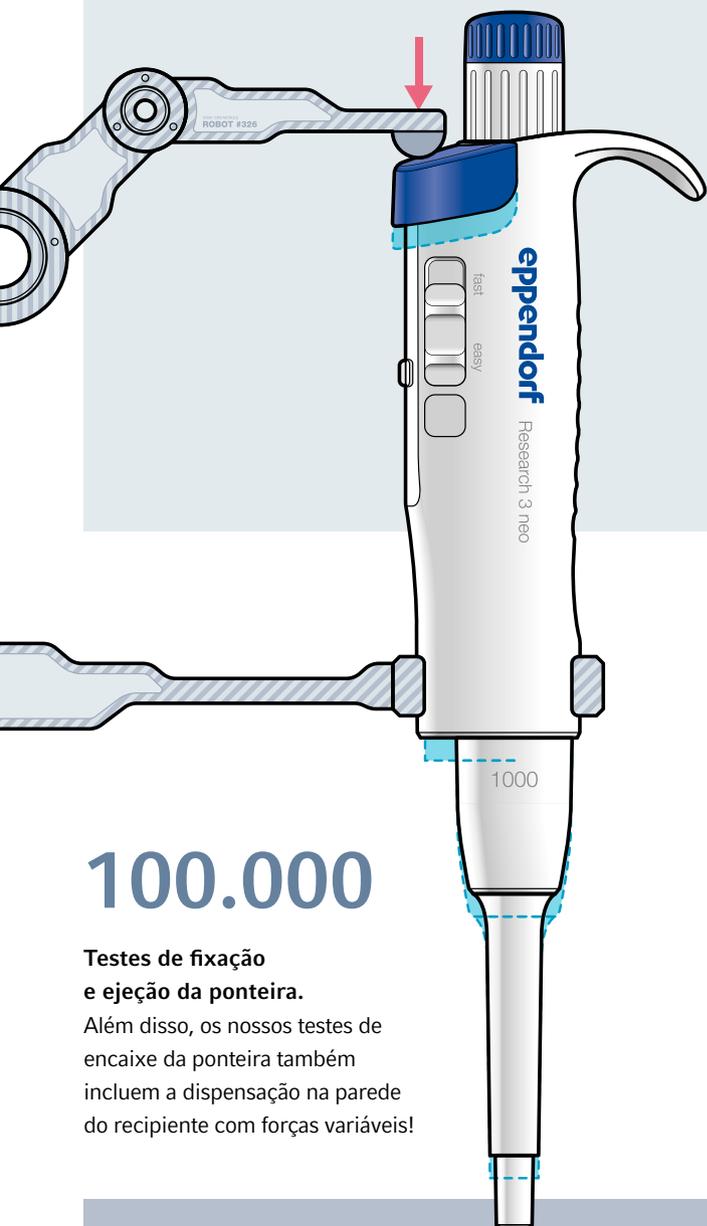


100.000

Testes de fixação e ejeção da ponteira.

Além disso, os nossos testes de encaixe da ponteira também incluem a dispensação na parede do recipiente com forças variáveis!

26.000

Ajustes de volume do nominal ao mínimo e testes reversos; no modo rápido e fácil!

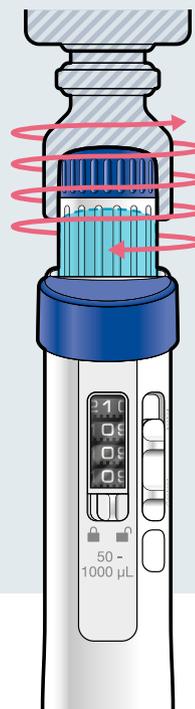

200.000

Testes dos movimentos de pipetagem.

Isso corresponde a aproximadamente 5 anos de uso diário contínuo.



Nosso compromisso com a sustentabilidade

Na Eppendorf, a sustentabilidade não é somente uma meta: é um compromisso. Trazendo alta qualidade, longevidade e reparo fácil, as nossas pipetas foram concebidas para minimizar o impacto ambiental e maximizar a performance.

A nossa fábrica aposta 100% no uso de energia renovável, na certificação ISO 14001 e no gerenciamento responsável de substâncias químicas. As pipetas Research 3 neo trazem a certificação ACT®, oferecendo uma validação independente das nossas práticas ecológicas.

As pipetas são fornecidas em embalagens recicladas e recicláveis menores do que as versões anteriores, reduzindo, com isso, as emissões de CO₂ na nossa cadeia de suprimentos.

Naturalmente, as pipetas Research 3 neo também são compatíveis com as nossas ponteiras innovative epT.I.P.S.® BioBased, feitas de polipropileno 100% de base biológica, reduzindo significativamente a pegada de carbono do produto.



A solução completa

O nosso empenho em prol do seu sucesso vai muito além da pipeta, das ponteiras e dos serviços de calibração. Ganhe acesso a uma grande variedade de recursos que inclui certificados, manuais multilíngues, notas de aplicação, guias do usuário e informes técnicos detalhados – tudo na ponta dos seus dedos.

Precisando de assistência ou orientação? Os nossos especialistas do suporte de aplicação, os webinários informativos e os vastos recursos de treinamento estão disponíveis para lhe oferecer um suporte abrangente em todos os momentos.

Entre em contato com o seu representante Eppendorf local para informações adicionais, pedidos de serviço e ofertas locais.

O poder da escolha

Junte-se à revolução da pipetagem e descubra como experienciar precisão e conforto absolutamente inovadores, impulsionados pelo poder da escolha.



Encontre downloads relevantes e produtos de serviço na nossa página de produto: www.eppendorf.link/research3neo



Informações para pedido


Descrição	Código de cor	N° de pedido
Eppendorf Research® 3 neo , monocanal, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 ponteiras) e ep Dualfilter T.I.P.S.® "PCR clean and sterile" Rack (x 96 ponteiras)		
0,1–2,5 µL, cinza escuro	■	3174 000 001
Eppendorf Research® 3 neo , monocanal, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 (x 96 ponteiras) e ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased "PCR clean and sterile" Reload (x 96 ponteiras)		
0,5–10 µL, cinza médio	■	3174 000 002
1–20 µL, cinza claro	■	3174 000 003
1–20 µL, amarelo	■	3174 000 004
5–100 µL, amarelo	■	3174 000 005
10–200 µL, amarelo	■	3174 000 006
15–300 µL, laranja	■	3174 000 007
50–1.000 µL, azul	■	3174 000 008
Eppendorf Research® 3 neo , monocanal, incl. saco de amostras epT.I.P.S.® (x 10 ponteiras)		
0,1–2 mL, vermelho	■	3174 000 009
0,25–5 mL, violeta	■	3174 000 010
0,5–10 mL, turquesa	■	3174 000 011

Serviços de calibração de pipetas¹ (disponibilidade dependente do mercado – confira com o seu representante)

Calibração de pipeta nova ISO 17025 , somente para pipetas monocanal novas	0082 000 213
ISO 8655 incluindo Manutenção Preventiva , manutenção e calibração conforme as especificações Eppendorf/ISO 8655	0082 000 142

Acessórios selecionados

Suporte de pipetas 2 , suporta 1 pipeta Research 3 neo em suporte giratório de pipetas 2 ou em suporte de parede	□	3116 000 295
Anéis de marcação de pipeta ColorTag , saco de amostras com 6 tamanhos, cada um em 2 cores (12 anéis de marcação) ²	12 cores	3102 666 000

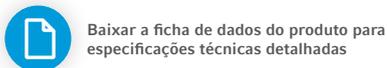¹ Para mais serviços disponíveis, confira o endereço www.eppendorf.link/pipette-service
² Para mais packs ColorTag disponíveis, confira o endereço www.eppendorf.link/colortag


Baixar a ficha de dados do produto para especificações técnicas detalhadas



Encontre ponteiras de pipeta, serviços, acessórios e peças de reposição compatíveis aqui:
www.eppendorf.link/research3neo



Saiba mais sobre as nossas inovadoras epT.I.P.S.® BioBased aqui:

www.eppendorf.link/biobased-eptips


Seu distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
 Eppendorf SE · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.link/research3neo

ACT® is a registered trademark of My Green Lab®, USA.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf PhysioCare Concept®, epT.I.P.S.® and ep Dualfilter T.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. Bestell-Nr. AA01048715/PT1/PDF/0725/SSO · All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2025 by Eppendorf SE.